



使い捨て・折畳式

N95マスク

米国NIOSH認証

- ☐ N95 高機能マスク
- ☐ 高性能ろ過フィルター採用
- ☐ 快適な通気性の三次元デザイン
- ☐ 全国マスク工業会マーク取得

3Dデザインで 密着 & 快適

呼吸耐性、ろ過効率に関するNIOSHの厳しい承認要件を満たしたN95規格のマスク。
ノーズフィッター付きで使用時の密着性を高めます。


—安心品質のマスク—

全国マスク工業会マーク取得



5層構造 3種フィルター

花粉・ホコリ・飛沫・PM2.5
などの
微粒子をブロックします

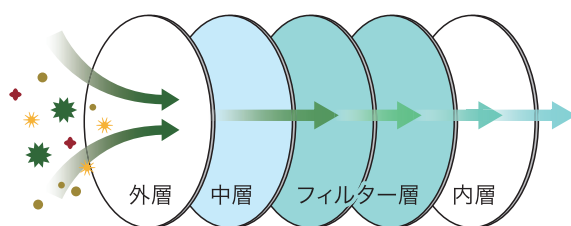

N95マスクは、サージカルマスクとしての液体防護性があり、血液・体液の曝露予防にも有効です。

外層 : PPスパンボンド不織布
中層 : PPニードルパンチ不織布
フィルター層×2 : PPメルトブロー高ろ過不織布
内層 : PPスパンボンド不織布

個包装タイプ



製品情報

品名	N95 マスク(米国 NIOSH 認証)折畳式・個包装・弁なし
品番	FV-MS-005 (S-108)
色	白
入数	1箱20枚入(個包装)×20箱/ケース
原産地	CHINA

一括(バラ)包装タイプ※

※10枚ずつ2袋



製品情報

品名	N95 マスク(米国 NIOSH 認証)折畳式・弁なし
品番	FV-MS-005(A) (S-108)
色	白
入数	1箱20枚入(10枚ずつ2袋)×20箱/ケース
原産地	CHINA



FIFTY VISIONARY

米国NIOSH認証 N95

NIOSH規格とは
米国衛生省機関の米国労働安全衛生研究所 (NIOSH) が定めた防じんマスクの規格です。
N95は、N:耐油性が無いこと (Not resistant to oil)、95:試験粒子を95%以上捕集できること、を表しています。

N95マスクは、サージカルマスクとしての液体防護性があり、
血液・体液の曝露予防にも有用です。

ノーズフィッター & ノーズクッション

ノーズフィッター

ノーズフィッター付きで鼻の形に合わせてしっかりホールドし、物質の侵入を減らします。また、マスク内側にあるノーズクッションで密着性を高め、不快なメガネの曇りもガード。

クッション


呼吸・会話がしやすい



立体構造で顔とマスクが密着。ウイルスの隙間からの侵入を防ぎます。口と鼻の空間は確保されるので、呼吸・会話がしやすい設計です。


高性能ろ過フィルター採用

5層構造/3種フィルター

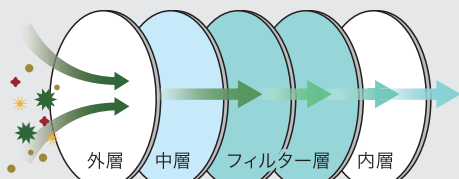

花粉・ホコリ・飛沫・PM2.5などの微粒子をブロックします。

外層 : PPスパンボンド不織布
中層 : PPニードルパンチ不織布
フィルター層 : PPメルトブロー高ろ過不織布 ×2
内層 : PPスパンボンド不織布

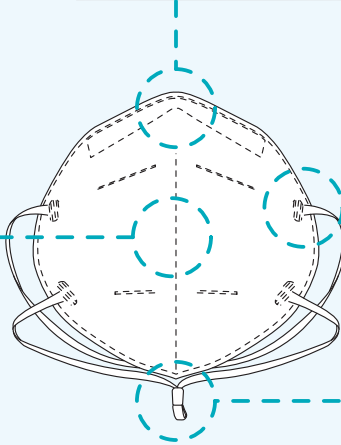

外れにくい接合


接合部



顔に触れないよう、マスクとゴムの接合部は外側でしっかりと圧着されています。サイズ調整でゴム紐を引っ張っても安心。

ゴム紐ストッパーでサイズ調整可能

ストッパーで長さ調整

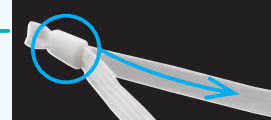

ゴム紐についているストッパーを動かすことで、紐の長さ調整が可能です。

肌に優しい高品質不織布

柔らかい不織布



肌に触れる不織布は、柔らかく肌に優しい高品質不織布を使用。毛羽立ちにくく、快適。


2本のゴム紐で固定



上下2本の平ゴム紐で顔にしっかり固定されます。

オーバーヘッドタイプ&平ゴム採用

平ゴム

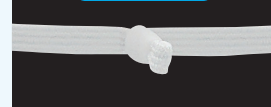

接触面が痛くなりやすい平ゴムを採用したオーバーヘッドタイプなので、耳への負担がありません。

カケンテストセンター試験報告書取得済


マスク蛍光試験:
著しい蛍光は認められない
遊離ホルムアルデヒド量:
溶出量 (μg/g) 20以下



カケン試験結果

N95証明書

N95証明書発行済み製品です。

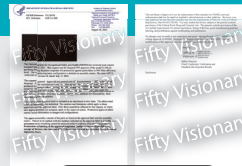


N95証明書

全国マスク工業会マーク取得済

全国マスク工業会の定める「衛生マスクの安全・衛生自主基準」を遵守し生産された衛生マスクの証です。



N95マスクの使い方

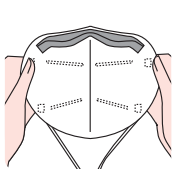

マスクを開いてノーズフィッターを広げます。ゴム紐はマスクの外側になるようにします。



マスクをしっかりと顔に当て、マスクを押さえながらゴム紐の下側を後頭部に引っ張り耳の下にかけます。



上側のゴム紐を頭頂部にかけます。



上下のストッパーを引っ張り、ゴム紐の長さを調整します。



両手でノーズフィッターを鼻の形に合わせてしっかりとフィットさせます。

密着性の確認 (シールチェック)



- 両手でマスク全体を覆い、息を吐き、マスクと顔の間から空気の漏れがないか確認します。
- 両手でマスク全体を覆い、息を吸い、マスクと顔の間から空気が流入しないか確認します。
- 漏れがある場合は、マスクの位置・ノーズフィッター・ゴム紐を調節してください。

〈マスク・アイソレーションガウンなど、衛生関連用品を多数取り扱っております〉

【販売元】

株式会社フィフティ・ヴィジヨナリー

〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町1216-64

第2版 2025年9月発行

mail info@50visionary.co.jp

URL www.50visionary.co.jp



メディカル/衛生用品