

「 生体情報検知型離床センサー 」

おだやかタイム miNi

心拍・体動をセンサーマット内の空気を通じて検知。

独自のアルゴリズムで離床を判断します。

ナースコールでスタッフにお知らせ。
転倒を未然に防ぐお手伝いをします。



● 誤報の低減

心拍・体動から離床を検知するため
寝返り等の誤報が少なくなっています。

● 水洗いでき衛生的

センサーマットには電気部品は
使っていないため水洗いも可能です。

※本製品は医療機器ではありませんので医療行為には使用しないで下さい。

従来方式より誤報・失報が低減!

① 圧力検知式との比較

誤報・失報回数

圧力検知式



おだやかタイム
miNi

約
86%減




正報率

圧力検知式



おだやかタイムmiNi

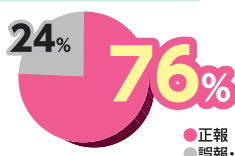

※熊本県某病院 対象者2名(計5日間)の実証試験より

② クリップ式との比較


誤報・失報回数

クリップ式



おだやかタイム
miNi

約
50%減

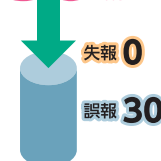


正報率

クリップ式



おだやかタイムmiNi

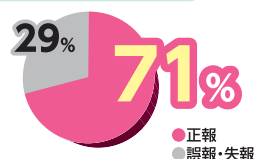

※北海道某病院 対象者3名(計9日間)の実証試験より

おだやかタイム miNi

●寝心地の違和感が少ない

マットはPVC素材で最薄1.2mm、中身も空気のため体の下に敷いた時の違和感がほとんどありません。

●選べる検知タイミング

1. 起き上がり…ベッドから起き上がると通知
2. 離床…ベッドから離床すると通知

●コンパクトに収納できる

マットの中身は空気のため自由に折り曲げて収納できます。


●一時停止ボタン搭載

介助などで一時的にナースコールを呼出したくない場合に、このボタンを長押しすると5分間、機能を停止できます。

)) 設置イメージ

センサーマット

汗取りマットやシーツの下に敷いてご使用ください。

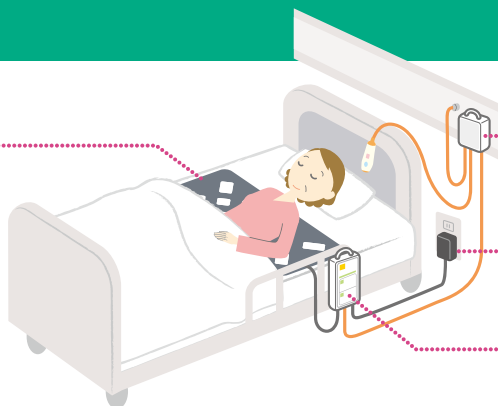

分配コンセント

ケアコム純正品をご使用ください。

ACアダプター

モードセクター

お知らせモードが設定できます。

おだやかタイムmiNi 通常セット〔 EKD00-0074 〕 製品構成

センサーマット

EKD00-0051

- 寸法(mm):W760×H370
- 材質:PVC
- 重量:約430g
- ケーブル長:約1.5m

※メンテナンス用として専用の空気入れ(EKD00-1146)を別途ご用意ください。



モードセクター

EKD00-064

- 寸法(mm):W76×H160×D27
- 材質:ABS
- ケーブル長:約2m



ACアダプター

EKD90-0161

- 入力:AC100V 50Hz/60Hz
- 出力:DC5V 2.2A
- 寸法(mm):W48.6×H63.5×D31
- 材質:ABS
- ケーブル長:約1.8m



オプション品

弁付き空気入れ

EKD00-1146

センサーマットに空気を入れる際に必要です。



延長チューブ(1m)

EKD00-1143

モードセクターとセンサーマット間の距離を延長する際に使用します。



分配コンセント

型 名	センサー呼分け	センサー呼出種別※	対応システム
BB-301WZ-2P/W6P-NC	×	一 般	NICSS、CICSS等 WZ型子機対応のシステム
BB-301WZ-2P/W6P-OP1	○	特定1	

※センサーからの呼出を親機やPHSに通知する時の音や表示の種類。

特 定1：特定呼出(トイレ介助・点滴終了)対応子機の特定呼出1(トイレ介助)と同じ種類。
表示メッセージはシステム設定で変更できます(別途有償)

○センサーを使用しない場合の「入切スイッチ」付 ○コード約2m

○壁掛け用ハンガーおよびマグネット(裏面)付

○寸法:W75×H114×D34mm

*この他にもナースコール子機別にご用意しています。弊社営業担当までお問い合わせください。

お問い合わせは

ケアする される心を形に
株式会社ケアコム

東京オフィス(代表) 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-13-7 名古屋ビル本館1F
Tel.050-3816-6300(代) Fax.050-3737-9707 ☎0120-047-533

札幌支店 Tel.011-272-1511 仙台支店 Tel.022-272-8781 東京第1支店 Tel.050-3816-6301
東京第2支店 Tel.042-485-7312 北関東支店 Tel.0270-20-4051 東京東支店 Tel.043-350-3431
南関東支店 Tel.045-250-5067 金沢支店 Tel.076-210-4255 名古屋支店 Tel.052-731-5361
大阪第1支店 Tel.06-4964-1895 大阪第2支店 Tel.06-4964-1896 大阪第3支店 Tel.06-4964-1897
広島支店 Tel.082-568-5951 高松支店 Tel.087-885-3623 福岡支店 Tel.092-714-5345
熊本支店 Tel.096-375-7090 営業開発グループ Tel.050-3816-6304 CSサービスグループ Tel.042-485-7306

ケアコムホームページ <https://www.carecom.jp/> ケアコムはNursing-plaza.comを支援しております。