

アルケアだから実現できた、 手指固定のための新しいスタイル。

独自形状のキャストステー + 専用のステーカバー

1955年、国産の石膏ギブス「スピードギブス」の開発、製造に成功して以来、
ギブス固定の製品開発と改良を重ねてきたアルケアの提案する、
新カテゴリーのカバー付きキャストリングシステム。
コンセプトは「ギブスをもっと快適に～簡単なギブス治療でギブス生活に笑顔を～」。
開発にあたりギブス使用者への調査を行い、ギブスへの不満や悩みを分析。
それらを解決するために、新たな視点でアルケアの持つ技術を融合し生まれました。



簡単なギブス治療でギブス生活に笑顔を

Fit Cure

「フィットキュア」

カバー付きキャストリングシステム

Wearable Cast～ギブス固定のストレスフリーを目指して～

Fit：ぴったり合う、適合する + Cure：治療する、硬化する

Speedy

QOL

Simple

Comfortable

使用手順

1

キャストステーをアルミバックから取り出します。

2

キャストステーの通水口より水を入れ、キャストステー全体をよく濡らします。

3

キャストステーをステーカバーに挿入します。

4

ステーカバーを裏から手の甲に当て、手首ベルト、掌ベルト、周回ベルトの順にとめます。

5

掌ベルトを手のひらに通し、甲側へとめます。

6

周回ベルトをコカンに通し、甲側へとめます。

7

甲ベルト

8

固定する肢位を保持し、甲ベルト(2カ所)をとめ、キャストステーが患部の形状に沿うようにモールドイングします。



フィットキュア®ナックル Fit Cure-Nnuckle				
種類	商品コードNo.	適応範囲	1箱入数	メーカー希望 小売価格(税抜き)
右	20961	17～22cm	1セット/ 箱	
左	20962	17～22cm	1セット/ 箱	
キャストステー	20981	左右兼用	1枚/ 箱	

一般医療機器/医療機器届出番号：13B1X00207000075

ALCARE
アルケア株式会社
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

●本カタログの内容は2020年12月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ：コールセンター
フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前 9:00～午後 5:00



フィットキュア®ナックル Fit Cure-Knuckle



カバー付きキャストリングシステム
Casting System with Cover

簡単なギブス治療で、
ギブス生活に笑顔を。

《フィットキュア®・ナックル》 カバー付きキャストリングシステム

従来のキャストリング固定に代わる 手指固定の新しいカタチ。

手指の形状に合わせた **キャストステー** + **ステアカバー** だから、
その人にフィットしたギブス固定がすぐに行えます。



独自形状のキャストステー
により患部にフィット

専用のステアカバーは
フロントオープンのベルト構造



手指固定に必要な機能を搭載。

MP関節を目的の肢位に保持し、
PIP関節の屈曲・伸展を阻害しないステアカバー形状



左右2本の甲ベルトにより、MP関節を屈曲方向へ保持する力を補助することができます。

小指、環指などの隙間を埋める
スペーサー



スペーサーを設置することで、ステアカバーと
手指をフィットさせます。

治療経過に合わせて
交換ができるキャストステー



巻き直しできる別売りキャストステーを用意。
交換することで、固定の緩みを低減します。

従来のキャストリング固定に比べ、 処置の手間・労力を軽減。



プレカットしたキャストステーと専用ステアカバーだから、
【キャストリング】、【トリミング】、【モールドニング】の手間、労力が低減します。


フィットキュア・ナックルの装着方法について
動画で閲覧できます。

URL: <https://www.alcare.co.jp/fcn> ▶



「水濡れ」「蒸れ」のストレス低減に向けて、高速乾・高通気の生地を使用しています。

ステアカバーの肌側は吸水性が高く、
外側は水分を拡散しやすい、特殊構
造の吸水・速乾・通気性素材を採用。
患者さんの装着時の水濡れや蒸れの
ストレス低減に寄与します。

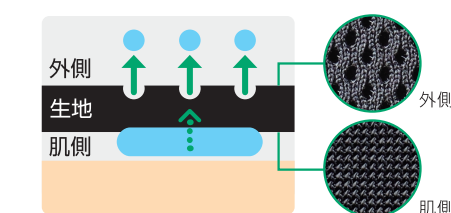

■フィットキュア・ナックル生地と弾力包帯(エラスコット)の性能比較

