

歯石用

酸性

STONE MELT GEL

ストーンメルトジェル

歯科医院/技工所専用義歯洗浄剤

義歯に付着した 歯石の除去に!!

- 「義歯の歯石」または「歯ブラシ」に塗布して**1~2分**磨くだけ
- ヌメリをとり、**除菌**にもなります
- クラスプやレジン床を**傷めません**
- 超音波洗浄器不要**

●容 量:200mL ●標準価格:

訪問診療や**介護施設**

などで**簡単洗浄!!**



【使用前】



【1分後】



【使用後】

亀水化学工業株式会社

STONE MELT GEL

ストーンメルトジェル

歯科医院/技工所専用義歯洗浄剤

用途:義歯に付着した歯石の除去


液性:酸性

容量:200mL


特長

- 義歯に付着した歯石を除去し、汚れを落とします。
- アクリル系軟質、シリコーン弾性リライニング材にも使用できます。
- 強酸性で磨くことで、除菌効果があります。
- 短時間の使用のため、金属床やクラスプにも使用できます。


使用方法 ※取扱いには必ず保護手袋、保護眼鏡を着用してください。

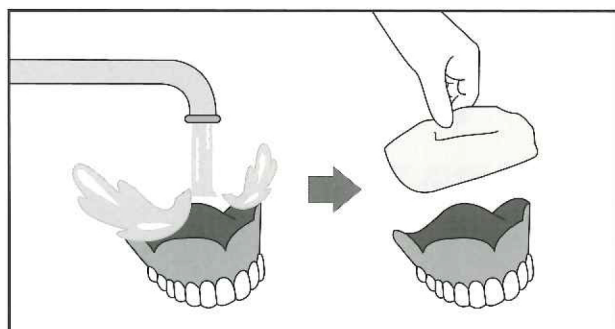


1. 義歯を水で軽く洗って水分をふきとります。

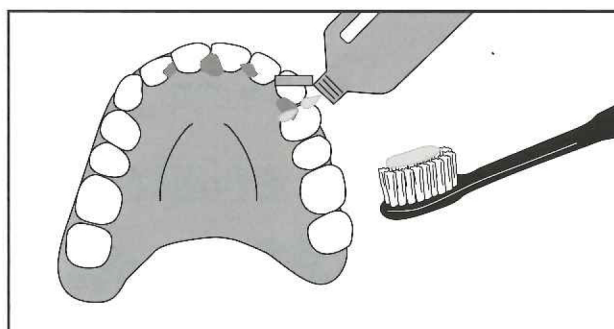

2. 歯石付着の部分または歯ブラシに塗付します。
時間をおく必要はありません。

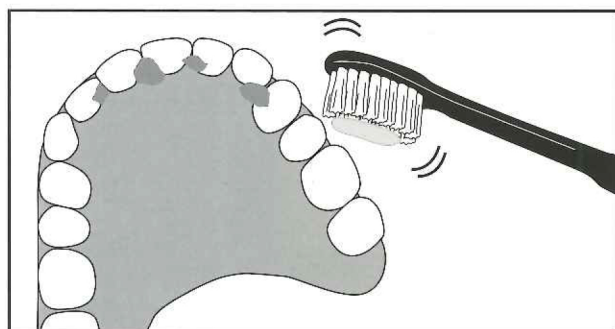

3. 義歯用歯ブラシ、または使い捨て歯ブラシを用いて1~2分磨いてください。

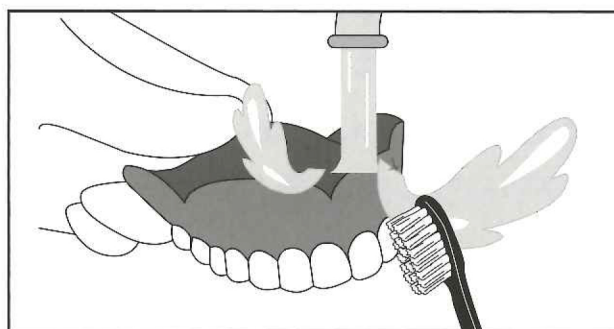

4. 磨いた後は必ず、十分な流水でしっかりとよくすすいでください。

頑固に付着した歯石は一度に除去できませんので、数回に分けてご使用ください。

(ご注意) 塩素系の製品と混合すると、有害なガスが発生して危険なため絶対に混合しないこと。

超音波洗浄器を
お使いの場合は



着色
汚れに

デントクリーン

- 容量:1.2L
- 標準価格:



頑固な
歯石に

ストーンメルト

- 容量:1.8L
- 標準価格:

●取扱歯科商店名

発売元 亀水化学工業株式会社
〒572-0071大阪府寝屋川市豊里町17-16
お問い合わせ フリーダイヤル ☎ 0120-267-720

禁無断転載