

パラファンゴパックの フィルム交換時期のご案内


ポリウレタンフィルムの特性

伸縮性が良く、ゴムより丈夫で強いフィルムです。伸縮性を必要とし、身体にフィット性を求められる物に使用されています。

こうした優れた特長がある反面、ゴムと同じように2年～3年で弾力性がなくなりフィルムが劣化して、切れてきます。劣化がみられたら、パックを買い換えてください。


使用時は必ずパックカバーを使用してください。

紫外線・塩素・高湿度・酸化窒素ガス・油脂等は劣化を早めますので注意して下さい。

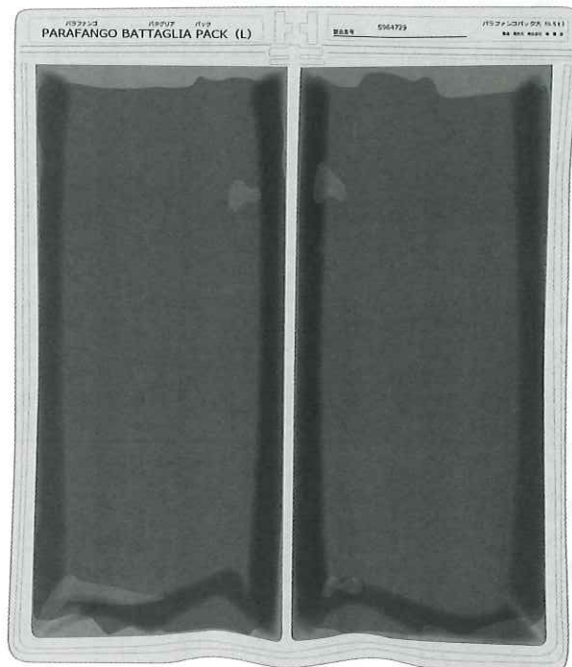


交換の目安 劣化の状態の例


硬くなった状態パックはポリウレタンフィルムに負担がかかり、劣化して切れてきます。

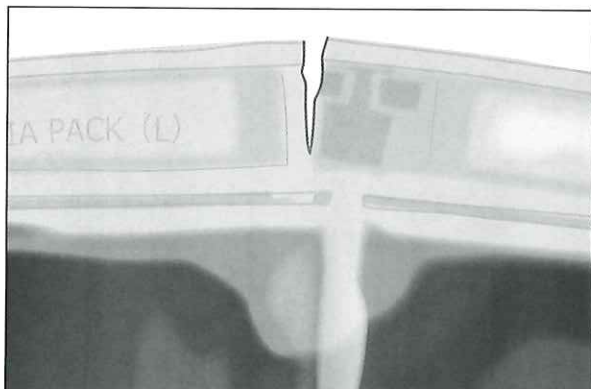


上部ラベル部分が切れた時

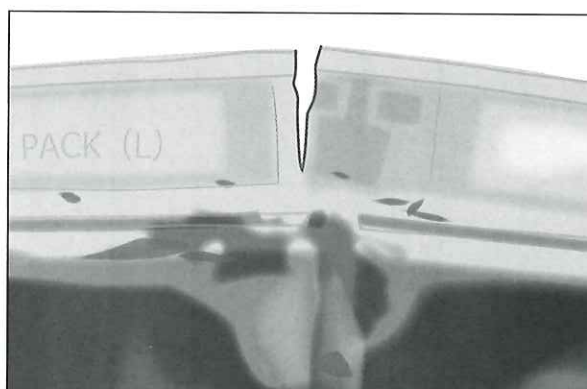

ウェルダー加工が剥がれて中身が
染み出てきた時

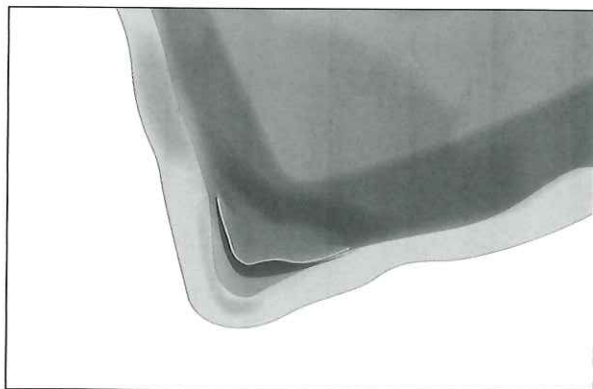

ウェルダー加工で着用部分が
剥がれ切れてきた時

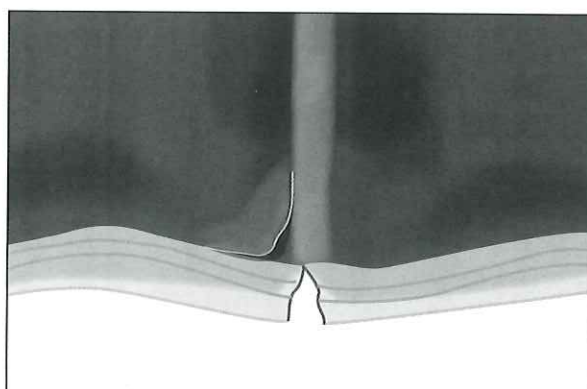

下部が切れてきた時

傷口、急性のリウマチ、急性の炎症、循環器疾患、発熱を伴う疾患、裂症等の場合はPARAFANGO®BATTAGLIA PACKを使用しないで下さい。

※パックの中身はリサイクル品として再利用いたします。

