

マグネチックスターラー

MS3-J MS5-J MS5-S-J

取扱説明書


1. 製品の概要

本製品は、国際的に先進的な設計理念と製造技術を採用しており、流麗で美しい外観と、コンパクトで頑丈な構造を持っています。高い汎用性と簡便な操作性を備え、研究実験に欠かせない優れた機器です。この磁力攪拌器は主に液体混合の実験室機器として使用され、低粘度の液体や固液混合物の攪拌に最適です。

2. 製品概要



3. 製品外観

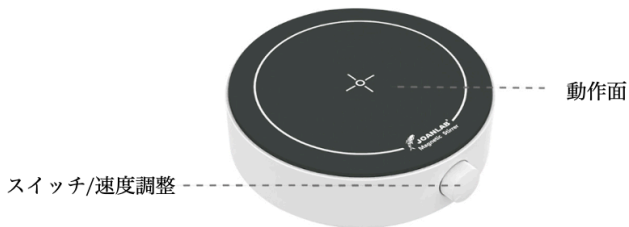

4. 製品仕様

型番	MS3-J	MS5-J	MS5S-J
製品写真			
制御方法	ダイヤル	ダイヤル	ダイヤル/ デジタル表示
プレート寸法	ブラシレスモーター		
プレート材質	PVC		
容量	1L(H2O)	2L(H2O)	2L(H2O)
回転数範囲	350～1800rpm	350～1800rpm	200～2000rpm
磁石サイズ	20～30mm		
定格電力	5W	10W	10W
回転方向	右回転	右回転	左回転
筐体保護等級	IP21	IP42	IP42
電圧	100～240V 50/60Hz		
許容環境	5～40℃ 80%RH		
製品寸法(mm)	138×130×41	168×160×47	168×160×47
梱包寸法(mm)	225×165×60	250×200×70	250×200×70
総重量/正味重量(kg)	0.22/0.2	0.66/0.46	0.66/0.46

5. 使用方法

基本使用

- 用途
 - 低粘度の液体や固液混合物の攪拌に主に使用されます。
- 使用目的
 - 各種大学、環境保護、衛生、防疫、化学、上水、医療などの実験で広く使用されています。
- 使用手順
 - MS3-J / MS5-J
 - プラグを差し込み、右に回して電源を入れます。
 - 回転速度を調整します。
 - 左に回して電源を切ります。
 - MS5S-J
 - プラグを差し込みます。
 - ノブを回して所望の回転速度に調整します。
 - 停止状態でノブを1回押して起動します。
 - 起動状態でノブを1回押して一時停止します。

機器使用環境

- 室内使用
- 標高：≤2000m
- 動作温度範囲：+5℃～+40℃
- 相対湿度範囲：≤80%
- 周囲に機器の性能に影響を与える振動や気流がないこと
- 空気中に導電性の粉塵、爆発性ガス、腐食性ガスがないこと
- 動作中は前後左右に10cmの安全距離を保持すること

安全にご使用いただくための注意事項

- 手が液体で濡れているときに電源プラグを抜いたり、スイッチを操作したりしないこと！
- 機器が通電中に電源プラグを抜かないこと！
- 通電状態で機器のメンテナンスや清掃をしないこと！
- 機器を凹凸のある、揺れる台の上に設置しないこと！

同梱リスト

- 攪拌器
- 攪拌子
- 電源ケーブル
- 使用説明書