


ITEM NO. 0418011/0418021
ベッドガード組立・取扱説明書

【第1版】

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品を末永く安全にご使用いただくために、本説明書をよくお読みいただき、内容を良くご理解した上で、正しくご使用頂けるようお願いいたします。
また、本説明書は必要に応じていつでも見られるよう、大切に保管してください。

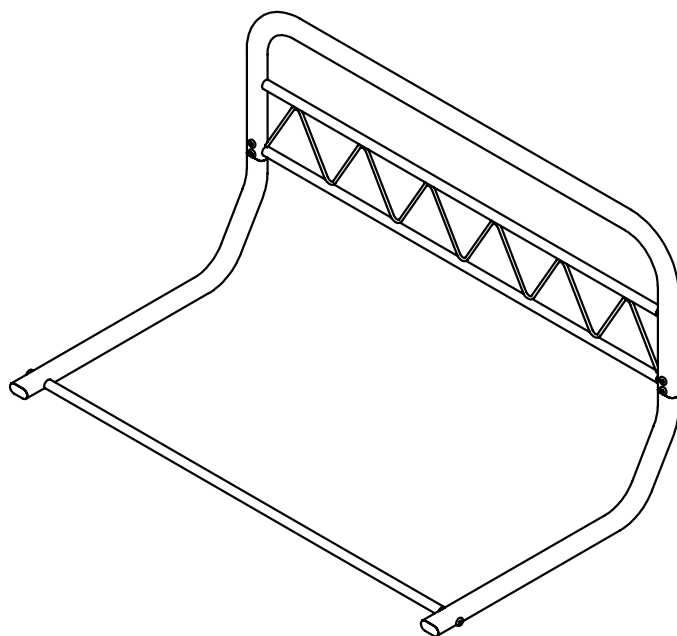

万一、商品に不備や不都合な点がありましたら、下記のフリーダイヤルにお電話ください。

株式会社ファミリー・ライフ

TEL : 0120-4125-99 (営業時間 : 土・日・祝日を除くAM9:00~PM5:00)

Copyright 2023 Family-Life Co.,Ltd. All rights reserved. (不許複製・禁無断転載)



注意

注意を無視した取扱いをすると、物質損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。



禁止

してはいけない行為です。

設置について



禁止

- 直射日光の当たる場所に設置しないでください。劣化や変色の原因になります。
- 火気のそばで使用しないでください。火事や変形などの原因になります。
- 改造等は絶対に行わないでください。
- 本製品を濡らさないでください。サビの原因になります。
- 乳幼児のそばに放置しないでください。思わぬ事故につながる恐れがあります。



注意

- 商品をマットレスとフレームの間に商品がマットレスに当たるまで差し込んでご使用ください。

取扱い上の注意



禁止

- 商品に無理な荷重を加えたり、手をついて立ち上がったたりしないで下さい。
(商品の破損や転倒して怪我の発生の原因となります)
- 商品(ベッドガード)の上に乗ったり、座らないで下さい。
(商品の破損や転倒して怪我の発生の原因となります)

お手入れ方法



禁止

- 塩素系・シンナー、クレゾールなどは使用しないでください。
また、金たわしや研磨剤を使用しないでください。




注意

- お手入れは乾いた布等で拭いておこなってください。
著しい汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤をスポンジ等に含ませ拭いてください。
洗浄後は、完全に水分を拭き取ってからご使用ください。
- ネジ類に緩みがないか確認してから使用してください。
また、定期的に点検し、緩みを発見されましたら締め直してください。


部品明細

A 本体

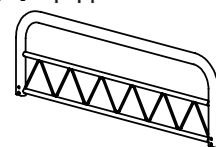

x 1

B 脚部

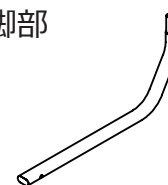


x 2

C 補強バー



x 1

D ネジ (大)

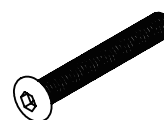

x 2

E ネジ (小)



x 4

F 六角レンチ




x 1

組立方法

※ネジ類は、最初仮締めし、最後に全てをしっかり本締めしてください。


1

本体にネジ(小)を使って脚部を取り付けます。

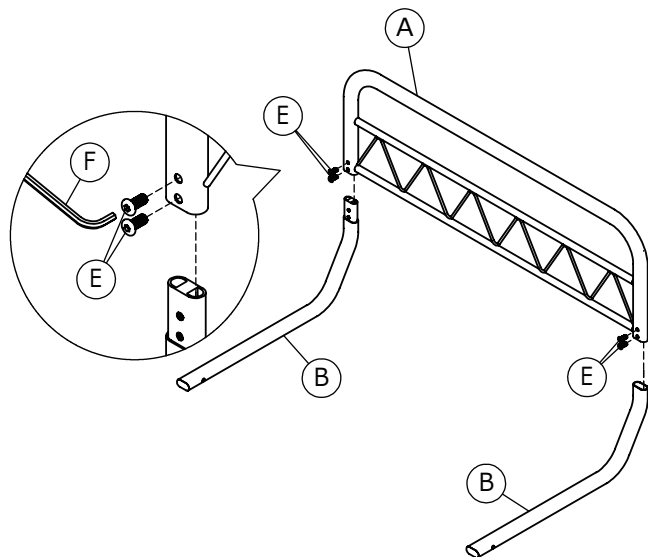

2

脚部に、ネジ(大)を使って補強バーを取り付けます。
最後に、全てのネジをしっかり本締めして完成です。

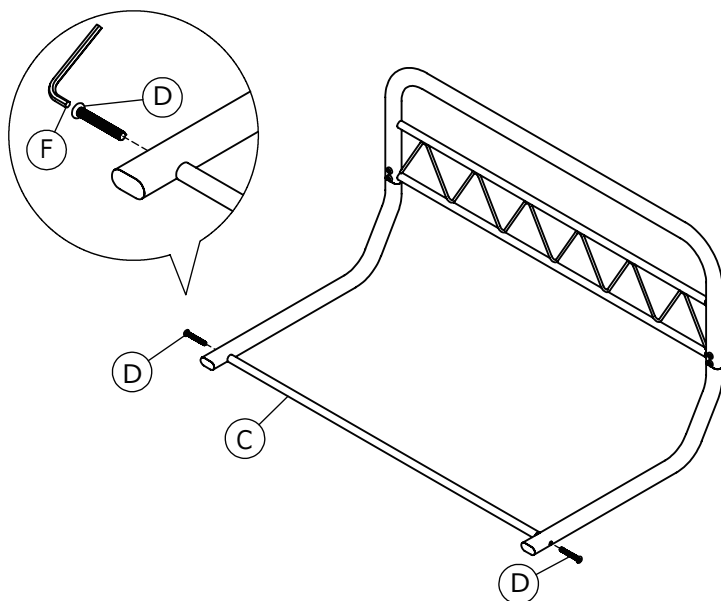

設置方法

本製品の脚部をお使いのベッドとマットレスの間に奥まで差し込んでください。

※シーツなど、薄手の寝具には差し込まないでください。

※設置後、本製品を左右に動かして、動かないか確認してください。

※完全に固定されてはおりませんので、1ページ目の注意事項をよくお読みになってからお使いください。

【使用例】

