


ハンディマッサージャー MD-013U

取扱説明書

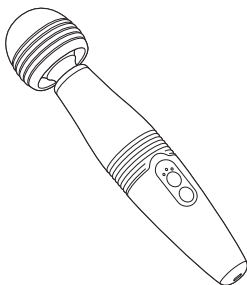

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

使用目的または効果

あんま、マッサージの代用

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

一般家庭で使用するこ

もくじ

● 安全上のご注意	1～4
● 各部の名称	5
● ご使用前に	6
● 使いかた	7
● 使用例	8
● 使用上のご注意	8
● お手入れについて	8
● 保管について	9
● 故障かなと思ったら	9
● 愛情点検について	9
● 電池のリサイクルについて	10
● 仕様	11
● アフターサービスについて	12・13
● 無料修理規定	14
● 保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の方への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	注意	人が損害を負う可能性および物的損害が想定される内容

絵表示の例

	○記号は、「禁止」の行為を示しています。(左図の場合は分解禁止)
	●記号は、行為を強制・指示するものです。(左図の場合は電源プラグを抜く)

- お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

警告

	禁止 次の人は使用しない。 医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈ひょう(瘤)、急性静脈ひょう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) 症状を悪化させる原因になります。 マッサージ以外の目的には使用しない。 また、頭、胸、腹、骨部へは使用しない。 事故やけがの原因になります。 乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせない。 事故やけがの原因になります。 安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供や補助を必要とする人に使わせない。 事故やけがの原因になります。 子供には本体の上に乘らせたり遊ばせたりしない。 事故やけがの原因になります。 本体内部に金属類や燃えやすいものを入れない。 火災や感電、ショートの原因になります。
--	---

	禁止 本体のUSBポートに金属類を差し込まない。 火災、感電、ショートの原因になります。 落としたり、強い衝撃をあてない。 発熱、発火、感電、けが、故障の原因になります。 物を載せたり、落下しやすいところに置いたりしない。 発熱、発火、感電、けが、故障の原因になります。 USBポートやUSBコネクタが破損したときは使用しない。 破損した場合は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに修理を依頼する。 そのまま使い続けると火災、感電、ショートの原因になります。 充電する場合は定格出力電圧DC5V、定格出力電流1.0A以上で、PSEマークの表示がある安全技術基準に適合した市販のUSB充電アダプターで充電を行う。 発熱、発火、感電、けが、故障の原因になります。 付属以外のUSBケーブルを使用しない。 また、付属のUSBケーブルを他の電気製品には使用しない。 発熱、発火、感電、けが、故障の原因になります。 USBケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしない。 また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。 火災、感電の原因になります。 リチウムイオン電池を内蔵しているため、高温環境下での使用、保管、充電、放電や加熱したり火の中に入れない。 また、廃棄する場合を除いてリチウムイオン電池を取り外さない。 事故、火災の原因になります。 フトンや毛布をかぶせたりコタツの中に入れて使用しない。 発火や故障の原因になります。 ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。 また、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない。 火災の原因になります。 水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しない。 発熱、発火、感電、けが、故障の原因になります。
	分解禁止 機器が故障した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡する。USBケーブルやUSBコネクタが破損した場合は危険ですので、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに修理の依頼をする。 機器は分解や改造をしない。 発熱、発火、感電、けが、故障の原因になります。
	水場使用禁止 浴室など湿度の高い場所では使用しない。 発熱、発火、感電、けが、故障の原因になります。

安全上のご注意

警告

 強制	医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。 ● ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ● 悪性腫瘍のある人 ● 心臓に障害のある人 ● 妊娠中や出産直後の人 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ● 皮膚に創傷のある人 ● 安静を必要とする人 ● 体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ● 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ● 背骨に異常がある人、曲がっている人 ● けんしろう(腱鞘)炎の人 ● かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ● 本品を使用しても効果がみられない人 ● その他医療機関で治療中の人事故や体調不良をおこす原因になります。
	USBポートやUSBコネクタは定期的に掃除する。 ホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災の原因になります。


注意

 禁止	次のようなときは使用しない。 ● 疲労が激しいとき ● 酒に酔っているとき ● 湿疹が生じているとき 体調不良をおこす原因になります。 食前、食後の1時間は使用しない。 体調不良をおこす原因になります。
	食前、食後の1時間は使用しない。 体調不良をおこす原因になります。
	他の治療器具と同時に使用しない。 体調不良をおこす原因になります。
	使用中は眠らない。 事故やけがの原因になります。
	肌の弱い人は素肌で使用しない。 けがややけどの原因になります。
	強く押しつけて使用しない。 皮膚や筋肉を痛める原因になります。
	治療部位にアクセサリなどの硬いものをつけて使用しない。 事故、けが、故障の原因になります。
	振動ヘッドを強い力で曲げない。 スプリングカバーに亀裂が生じ、髪の毛の巻き込み、事故、けが、故障の原因になります。
	二人以上で同時に使用しない。 事故、けが、故障の原因になります。

 禁止	お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しない。 変色、変形の原因になります。
 強制	1回の使用時間は10分以内にする。 また、一箇所への連続使用は3分以内にする。 1日の使用時間は30分以内にする。 長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やけがの原因になります。 はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用する。 強い刺激に慣れていないと逆効果やけがの原因になります。
	本品は必ず手に持って使用する。 事故、けが、故障の原因になります。
	使用中、振動ヘッドのすき間に衣類や髪の毛が巻き込まれないよう注意する。 事故、けが、故障の原因になります。
	使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。 事故や体調不良をおこす原因になります。
	使用後はOFFボタンで動作を止め、充電後はUSBコネクタをUSBポートから抜いて子供の手の届かないところに保管する。 本品やUSBケーブルで遊ぶことがないよう子供を監視する。 子供のいたずらによる事故やけがの原因になります。
	USBケーブルをUSBポートから抜くときはUSBケーブルを持たず、必ずUSBコネクタを持って引き抜く。 感電、ショート、故障の原因になります。
	故障が見つかったら、すぐに使用を止める。 事故やけがの原因になります。
	USBケーブルはねじれをほどいて保管する。 断線やショートの原因になります。
	長期間使用しない場合、半年に1回は充電する。 長期保管による過放電は、リチウムイオン電池の劣化の原因になります。
 電源プラグを抜く	充電中以外は、USBケーブルをUSBポートから抜く。 ホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災の原因になります。
	お手入れの際は、USBケーブルをUSBポートから抜く。 また、ぬれた手でUSBコネクタにふれない。 感電ややけどの原因になります。
	停電のときは、USBケーブルをUSBポートから抜く。 停電復帰時に事故やけがの原因になります。

各部の名称

本体

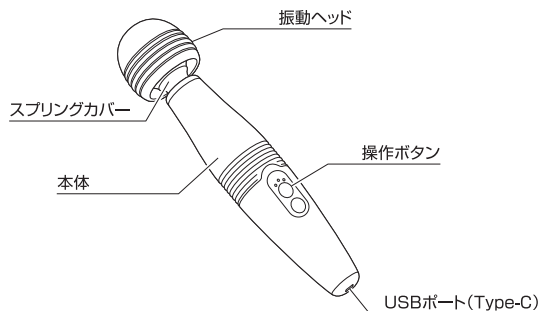


振動表示ランプ

振動ボタン(長押しスタート)
振動1/振動2/振動3/振動4/振動5

OFFボタン



付属品

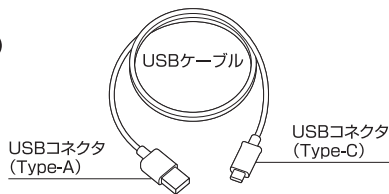


- 付属品は同梱されているものをお使いください。

ご使用の前に

充電のしかた

はじめてご使用になるとき、または長期間ご使用にならなかったときは、電池が自己放電し、動かないことがありますので、ご使用の前には必ずフル充電してからお使いください。

1. USBコネクタ (Type-C) を本体のUSBポートに差し込んでください。
(抜け落ちないように確実に接続する)
 2. USBコネクタ (Type-A) を市販のUSB充電アダプターに差し込んで充電してください。
充電を開始すると振動表示ランプがすべて点滅し、
充電が完了すると振動表示ランプはすべて消灯します。
 3. 充電が完了したら、USBケーブルを外してください。
- フル充電時間は約2時間30分です。
(1回の充電で約60分使用できます)

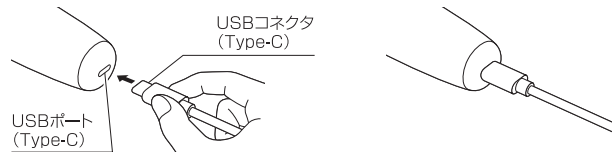

USBコネクタ (Type-C) は真っすぐに
差し込んでください。

確実に差し込んで充電してください。
故障、破損の原因になります。

動作中は充電しません。
充電する場合は動作を止めて、
DC5V1.0A以上の充電器で充電を行ってください。

- 充電中はUSBコネクタに強い力をかけないでください。
折れたり、曲がったりして破損する原因になります。
- めれた手でUSBコネクタに触れないでください。
感電やショート、故障やけどの原因になります。

ご使用前の確認とご注意

機器に異常や破損がある場合はただちに使用を中止してください。

- 施術部位にアクセサリなどの硬いものをつけて使用しないでください。
事故やけが、故障の原因になります。
- 頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。
事故やけがの原因になります。
- はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用してください。
- 操作ボタンが正しく動作するか確認してください。

使いかた

1. 本体を持ち、 ボタンを長押し(約1秒)してください。動作がはじまります。

2. 振動ヘッドを各部位に当ててお使いください。

振動は「5段階」の設定です。

動作は「振動5」(速い振動)からスタートし、ボタンを押すごとに「振動1」(遅い振動)まで切り替わり、再度「振動5」に戻ります。お好みで切り替えてください。(下図参照)

- 使い始めや慣れないうちは遅い振動に設定し、短い時間で使用してください。
- 本品は必ず手に持って使用してください。

振動表示	振動速度	ランプの動き
振動5	速い	● ● ●
振動4	▼	● ● ●
振動3	▼	● ● ○
振動2	▼	● ● ○
振動1	遅い	● ○ ○


- ……点灯
- ……点滅
- ……消灯

3. マッサージを終了するときは  ボタンを押してください。動作が止まります。

オートタイマーについて

使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります。

使用例

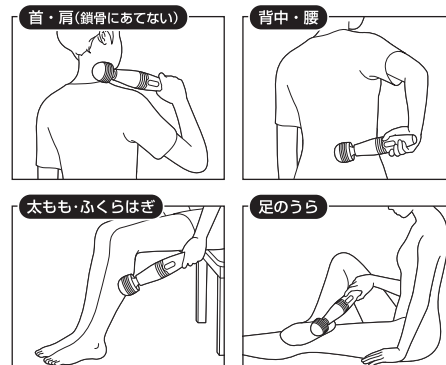

- 頭、胸、腹、臀部へは使用しないでください。



警告

1回の使用時間は10分以内にします。
また、一箇所への連続使用は3分以内にします。
1日の使用時間は30分以内にします。
長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やけがの原因になります。

使用上のご注意

- 整髪料・化粧品などの薬品を付着させないでください。
化学変化による変色や劣化の原因になります。
- 直射日光を毎日長時間あてないでください。
変色や劣化の原因になります。
- ビニールや室内の壁紙などに長時間接触させないでください。
変色する原因になります。

お手入れについて

乾いた布で汚れをふき取ってください。
シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。
変色、変形の原因になります。

保管について

- 汚れやホコリをとったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- しばらくご使用にならないときはカバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- USBケーブルはねじれをほどこいて保管してください。

故障かなと思ったら

点検、修理を依頼される前に下記のご確認をお願いします。

症 状	調べるところ
● マッサージ動作時の音	● 構造上のものに機能などに影響はありません
● 動作しない	● 充電不足や電池容量が無くなっているかもしれません ● オートタイマーが働き停止状態になっていませんか 再度「振動ボタン」を押してください
● 充電できない	● USBケーブルが抜けていませんか ● DC5V1.0A以上の充電器を使用していますか
● 充電してもすぐに止まる	● フル充電を数回くり返して改善する場合があります それでも改善されない場合は電池の寿命と思われるます
● 連続使用時にマッサージが止まる	● モーターの温度上昇のため、安全装置が働いています しばらく本体を休ませて(2時間程度)から再度動作を確認してください

機器に異常音や動作しないなどの異常や故障が発見された場合は使用をただちに中止してください。また、電池の寿命と思われる場合は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。

愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

 愛情点検	このような症状はありませんか。 ● こげくさいにおいがする ● USBケーブルが異常に熱い ● USBケーブルを動かすと通電したりしなかったりする ● その他異常がある	故障や事故防止のため使用を中止し、USBケーブルをUSBポートから抜いて、必ずお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理をご相談ください。
--	--	---

電池のリサイクルについて

本品の電池はリチウムイオン電池を使っています。

- ご使用の都度充電をしても電池の寿命には影響がありません。
- 過放電状態になる(カラまで使う)と電池の寿命が大幅に低下します。また、長期間ご使用されない場合は、半年に一度はフル充電をしてください。
- 電池の寿命はフル充電をくり返して約500回です。
また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなつた場合は寿命と考えられます。
(電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります)。



リチウムイオン電池のリサイクルへ



この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源ですので、リサイクルにご協力をお願い致します。本品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。※リチウムイオン電池は短絡防止のため、必ずリード線の端に絶縁テープを貼ってください。




警告

下記の手順は製品を廃棄するためのものであり、修理用のものではありません。
修理は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターにご依頼ください。分解した場合は修理不可能です。

電池の取り出しかた

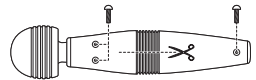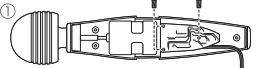- 
動かなくなるまで動作させて電池を使いきってください。
● ラバーを切り、本体から取り外します。
● 本体の3本のネジを外します。
- 
① 本体を開け、基板側の3本のネジを外し基板を取り出します。

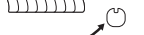② 取り出した基板を裏返し、リチウムイオン電池とつながる端子部(コネクタ)を外し、リチウムイオン電池が入るケースを取り出してください。
- 
① 巻かれている黒い絶縁テープをカッターナイフ等で切ってください。
(このとき、コードは切らないように注意してください)

② コード側にある金属の蓋を取り外してリチウムイオン電池を取り出してください。端子部(コネクタ)には必ず短絡防止のため、絶縁テープを貼ってください。

仕様

販売名	ハンディマッサージャー MD-Q13U	
医療機器認証番号	308AHBZX00006000	
医療機器の種類	管理医療機器	
一般的名称	家庭用電気マッサー器	
電源方式	充電式	
内蔵電池	リチウムイオン電池	
充電時間	約2時間30分	
動作時間	約60分	
使用、充電環境温湿度	+10℃～+35℃、45%～85%RH	
保管環境温度	-5℃～+45℃	
充電回数	約500回	
定格入力	DC5V 1.0A	
定格時間	20分	
オートタイマー	約10分	
振動回数	振動1:約4800回/分 振動4:約6000回/分 振動2:約5200回/分 振動5:約6400回/分 振動3:約5600回/分	
外形寸法	直径(振動ヘッド) 約6cm×長さ 約27cm	
質量	約450g	
USBケーブル長さ	約50cm	
材質	本体:PC樹脂 振動ヘッド:EVA樹脂	
付属品	USBケーブル	
製造販売元	大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38	
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055	

アフターサービスについて

- 保証書(裏表紙)
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
弊社は補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。
(ただし、縫製部品は除きます)。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- その他ご不明な場合
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

**地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで
各自治体の取り決めにしてください。**

お客様ご相談センターのご案内

製品の返品・返金などについては、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

製品のお取り扱い方法、修理などのご相談は

フリーダイヤル

 0120-064-762

※お客様がご加入されている電話（NTT以外の一般回線、IP電話など）によっては、ご利用できない場合がございます。

上記番号がご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください。

TEL 086-722-5110

FAX 086-722-5055

岡山大東電機工業株式会社

〒709-3104 岡山県岡山市北区建部町角石谷 1503-1

【受付時間（祝日を除く月～金）9:00～17:00】
都合によりお休みさせていただくことがあります。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。なお、お客様の個人情報は弊社で責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的には使用いたしません。

〈無料修理規定〉

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店または、P13のお客様ご相談センターが無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店または、P13のお客様ご相談センターに依頼してください。
3. ご転居の場合には事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼にならない場合には、P13のお客様ご相談センターにご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外（業務用など）に使用された場合の故障および損傷
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - (ト) 指定外電源（電圧・周波数）使用による損傷
6. 本書は国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または、P13のお客様ご相談センターにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはP12をご覧ください。

保証書

持込修理

ハンディマッサージャー MD-013U

お買い上げ日	保証期間
年 月 日	お買い上げ日より1年間

お客様	
フリガナ	
お名前	様
住所 〒	
電話番号	
販売店	

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売などで購入された場合は、製品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げ販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

P14の無料修理規定をご覧ください。

製造販売元

大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38