


一度にたくさんの錠剤をカットできます マルチ錠剤カッター



カバーを上から押すことで刃が出てくるため、刃に触れることなく安全に使えます。

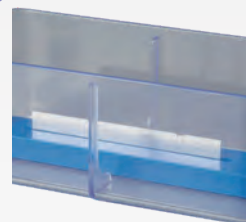

レバーを押し、錠剤を置くための溝を広げます。



カバーをかぶせて上からしっかりと押します。



溝に錠剤を並べ、レバーを戻します。



カバーを取り外して半分にカットされた錠剤を取り出します。

品番	型番	幅 × 奥行 × 高さ (mm)	適応錠剤サイズ	価格 (税抜)
8-394-01	MPS-2	100×50×55	17mm 未満	¥ 1,500

- 材質：本体／ABS 樹脂、カッター刃／ステンレス (SUS420)
- 付属品：清掃用ブラシ



商品の
詳細は
コチラ！

アズワン株式会社

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q> (24時間受付)

TEL **0120-711-875** (ユーザー様用)

電話受付時間：午前9時～午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

◎価格・納期については変動する場合がございます。最新情報はAXELをご覧ください。

■ご用命は信頼ある代理店へ