



衛生的で便利なノンタッチ・ディスペンサー

ハンドクリーン-III

スリー

センサーが手指を感知してアルコール消毒液を自動で噴霧(又は流下)します。交差感染を防止して衛生的かつスピーディ。安全で確実な手指衛生に貢献します。



小型タイプながら消毒液が
1リットル入ります



1回の分量は5段階設定で
調節できます **0.75~4mL**



乾電池または100V家庭電源の
どちらでも使用できます



オプション(別売品)※を
ご用意しております

※ 「消毒したらノンタッチで入室」
自動ドア連動装置

※ 「壁にビス穴をあけずに設置可能」
手すり設置用金具


※ 詳細は裏面をご参照ください



株式会社 オーヤラックス

アルコール自動手指消毒器 **HANDCLEAN-Ⅲ**

手指衛生は衛生管理の基本です。 様々なシーンでの使用をご提案いたします。

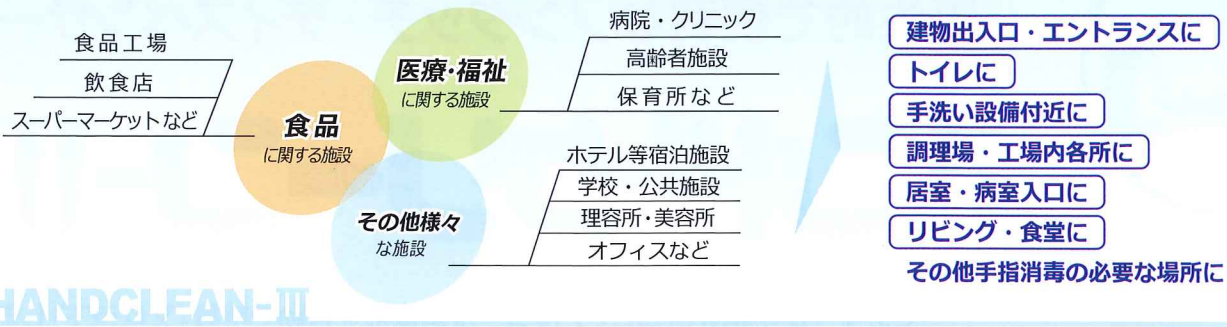

仕様


商品名	ハンドクリーン-Ⅲ
型式	TEK-M4-2
噴霧方式	圧力噴霧式、流下方式
手指検知方式	赤外線センサー
電源	単2アルカリ乾電池4個 または AC100V 50/60Hz (ACアダプター接続時)
電池寿命	約3ヶ月(0.75mL噴霧×100回/1日)
噴霧量	約0.75、1、2、3、4mL
タンク容量	1,000mL
外形寸法	W153mm×H297mm×D173mm
重量	約2.5kg(消毒液満タン時・電池を除く)
梱包寸法	W375mm×H237mm×D217mm
梱包重量	約2.8kg

付属品

単2アルカリ乾電池4個、ACアダプター1個、壁取付用部品一式(壁掛金具、取付けネジ等備品類)、受皿1個、受皿キャップ1個、廃液チューブ1本、火気厳禁シール1枚、取扱説明書1冊。

オプション(別売品)

自動ドア連動装置

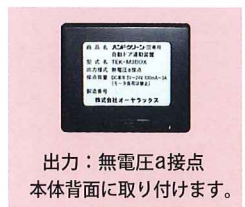

手すり設置用金具



安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 消毒液は日本薬局方消毒用アルコール、又は当社の指定する消毒液をお使いください。

使い方

「ワンプッシュ」が不要です



手のひらをノズルの下に
入れます。



手を引いて、消毒液が乾く
までよくすり込みます。

消毒液の補給

手間なく補給できます



本体上部のふたを開け、
補給口キャップを外し、
消毒液を注ぎます。

消毒液に当社製品「シルキテン・P」を
ご使用いただく場合は、ボトルごと容易
に交換することができます。

PRODUCT

速乾性すり込み式 手指・皮膚消毒剤

シルキテン[®]P
SILKYTEN P

第3類医薬品

ベンザルコニウム塩化物を有効成分とする
エタノール製剤です。迅速な殺菌効果と
速乾性を有し、手指・皮膚の保護性に留意
した消毒剤です。容量1,000mL。

写真はハンドクリーン-Ⅲにシルキテン・P
をボトルごとセットしたものです。



性能・寸法などは改良のため予告無く変更する場合が
ございますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 オーヤラックス

http://www.oyalox.co.jp

本社 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル
TEL. 03(3263)6201【代表】

大阪支店 TEL. 06(6358)2291
札幌支店 TEL. 011(271)1585
釧路フロントオフィス TEL. 0154(44)1101
仙台営業所 TEL. 022(264)1231
福島営業所 TEL. 024(932)7895
北関東営業所 TEL. 028(635)4970
水戸営業所 TEL. 029(225)4108

埼玉営業所 TEL. 048(651)7123
千葉営業所 TEL. 043(266)6151
横浜営業所 TEL. 045(201)4835
山梨営業所 TEL. 055(228)1158
北陸営業所 TEL. 076(223)1336
名古屋営業所 TEL. 052(211)6221
京都営業所 TEL. 075(314)0991

岡山営業所 TEL. 086(272)5701
広島営業所 TEL. 082(227)7831
高松営業所 TEL. 087(834)0501
松山営業所 TEL. 089(923)9801
福岡営業所 TEL. 092(721)1935

オーヤラックスカーンサービス(株) TEL. 042(488)8211
新潟オーヤラックス販売(株) TEL. 025(283)1851
山陰オーヤラックス販売(株) TEL. 0857(36)0271
東京工場 TEL. 042(661)4436