

取扱説明書


Instruction Manual

ファンユニット

型番：M型

目次

安全上のご注意	2
製品設置時の注意事項	3
製品使用時の注意事項	4
製品概要	5
お手入れについて	6

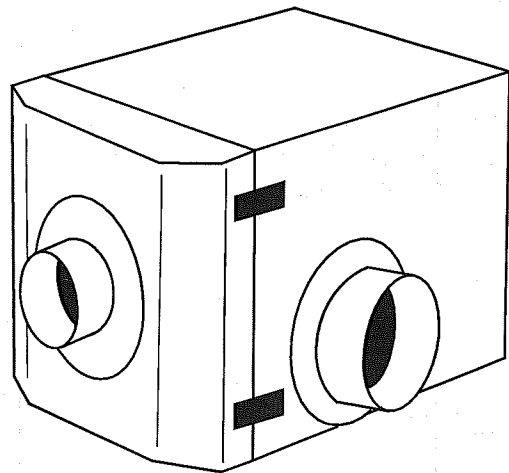

お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読み
になって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ
に大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ
ところに添付して下さい。

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

 危険	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。	 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。	 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		感電の危険性の注意
	高温による傷害が起こる可能性がある場合の注意		破裂、爆発の危険性の注意
	指を挟みこむ危険がある場合の注意		ファン等に巻き込まれる危険性の注意
	特定しない一般的な使用者の行為		アース線の接続の指示

製品設置時の注意事項

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

⚠ 警告	
	●近くに引火性の固体・液体・気体のないところ。 ●周囲温度が5～35℃以内のところ。
⚠ 注意	
	●結露しないところ。 ●水平で安定したところ。 ●湿気の少ないところ及び水滴のかからないところ。 ●ホコリの少ないところ及び風通しの良いところ。 ●直射日光のあたらないところ。
⚠ お願い	
	●電源コードは、足を引っ掛けないようなところに取りまわしてください。


※本製品を屋外で使用することはできません。

製品使用時の注意事項

 警告	
	●改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	●このファンユニットは防爆構造ではありませんので、引火性・爆発性のガスは絶対に吸引させないでください。
	●濡れた手でスイッチの操作はしないでください。
	●吸気口、排気口に手を入れたり、物を入れないでください。
	●本製品は強酸、強塩基等の化学ガスを吸引させた場合、ファンの寿命を縮める場合がありますので注意ねがいます ●ファンユニットの通気口はふさがないようにお使い下さい。 ●ヒューズは定格外のものと入れ替えしないでください。又、ヒューズが切れた場合、内部回路の異常と考えられますので、修理を依頼してください。 ●排気口には必ずダクトホースを接続して屋外に排気して使用してください。又、ホース口は確実に奥まで差し込んでください。ダクトホースを接続しないと排気口が露出して危険です。
 注意	
	●長期間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。又、電源プラグを抜く時は、プラグ部分を持って抜いてください。
	●ダクトホースを配管する際は、ファンユニットの排気口に力が加わらないようにしてください。ダクトホースが抜ける恐れがありますので 接続部をホースバンド等で固定する事をお勧めします。

製品概要

■製品全体図および各部名称

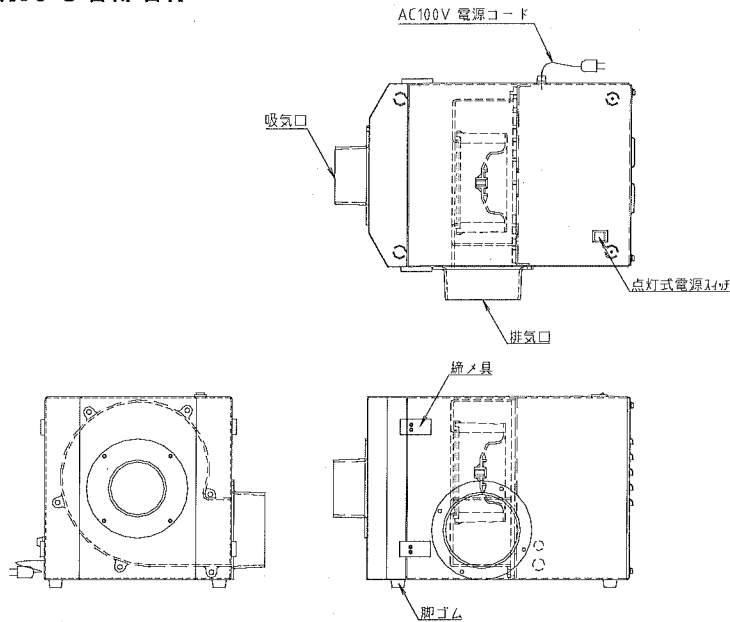

■製品仕様

外寸 mm	W240×D330×H240 ※	
主要材質	本体 : SPCC(金属)	
	ファンケーシング : ポリプロピレン	
	ファン羽根 : ポリプロピレン	
使用周囲温度	5℃～35℃	
ファ ン	50Hz	7.2m ³ /min (単体能力) 静圧 500Pa
	60Hz	8.6m ³ /min (単体能力) 静圧 550Pa
ヒューズ	3A	
接続口径	吸気/排気 φ75/φ100	
電源電圧	AC100V 50/60Hz 90W	

※記載の寸法にはダクトジョイント、ゴム足、その他突起部を含みません。詳細は弊社までお問い合わせください。

使用方法

＜設置上の安全に関する注意＞の条件を満たす場所に本製品を置き御使用ねがいます。

1. 吸気口・排気口にダクトホース(別売)を接続して、設置上の安全に関する注意の条件を満たす所に置いて下さい。
2. 電源コードをAC100Vのコンセントに差し込んでください
3. 電源スイッチをONにして、作動させてください。



強制事項

●本商品は起動時に定格以上の電力が流れます。本商品に対して 100V 3Aを確保できるようにしてください。

＜排気について＞

必ず、排気ダクトホースを接続し、お客様既設の排気設備(排気管)等に接続する等して、屋外に排気してください。この時、ファンユニットから排気設備等までの排気ダクト長さや、ダクトの曲げ回数、配管等の取り回し方法により、本品の排気能力(風量)が低下しますから、極力、ダクト長さを短くして御使用願います。

お手入れについて

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。
取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

警告	
	●お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 ●清掃する場合は、外装や内部に直接水をかけたりしますと漏電等の事故原因になりますので、絶対にしないでください。
注意	
	●クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

■修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル  0120-788-535

FAX 0120-788-763

問い合わせ
専用E-mail

repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2010年8月初版作成