

Acura manual digital reading pipettes

SOCOREX 社製ピペット 825/826XS/835/855



825 micro

0.1 - 2 μ L
0.5 - 10 μ L
1 - 10 μ L
2 - 20 μ L
5 - 50 μ L
10 - 100 μ L
20 - 200 μ L
100 - 1000 μ L



826 XS extra sharp

0.1 - 2 μ L
0.5 - 10 μ L
1 - 10 μ L
2 - 20 μ L
5 - 50 μ L
10 - 100 μ L
20 - 200 μ L
100 - 1000 μ L



835 macro

0.2 - 2 mL
0.5 - 5 mL
1 - 10 mL



855 multi

0.5 - 10 μ L
5 - 50 μ L
20 - 200 μ L
40 - 350 μ L

スイス SOCOREX 社が提供する
スタンダードなピペットシリーズ
機能性と多種多様な特色を持った、
高品質なピペットシリーズを、ぜひ
お手元に

最少0.1 μ Lから最大10mL、
シングルチャンネル、8 チャンネ
ル、12チャンネルの豊富なラインナ
ップよりお選び下さい

特長

- ・エルゴノミクスに基づいて操作性を
追求したデザイン
- ・SOCOREX 社オリジナルの Justip
システム(チップイジェクター位置調
整機能)により、各社ピペットチップ
に幅広く対応
- ・容量調整は分注ボタンを回すだけ
- ・ステップ状に分注容量調整
- ・視認性に優れた大型目盛り
- ・ユーザーキャリブレーション機能
- ・分解なしで121°C20分のオートクレ
ーブ滅菌可能

使用可能ピペットチップ例

- ・SOCOREX
- ・ピオラモサクラチップ
- ・アイビス
- ・エッペンドルフ
- ・ニチリョー

Acura manual 825/826XS

- Acura825 シリーズは、最もスタンダードなシングルチャンネルピペット
- スタンダードな中に SOCOREX 社オリジナルの機能性を誇るピペット
- Acura826 シリーズは、825 シリーズを元に、シャフト長を短くするとともに軽量化されたシングルチャンネルピペット
- SOCOREX 社独自の設計により、軽力で滑らかに動作、長時間作業のユーザーに特にお勧めです




ユーザーキャリブレーション
分注容量の微調整も簡単操作



視認性に優れた大型目盛



キャップが自由に回転
キャップと分注容量調整つまみが
別々に回転
分注操作中の設定容量ズレを防止

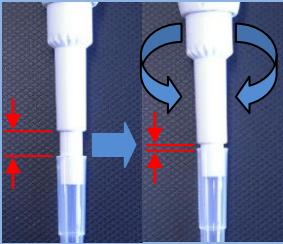

Justip システム
SOCOREX 社オリジナルの
チップイジェクター位置調整機能
により、各社ピペットチップに
幅広く対応

性能表

型番		分注容量 (μ L)	最小可 変容量 (μ L)	重量・シャフト長				精度(E%)			再現性(CV%)		
				825		826XS		最小容量	中間容量	最大容量	最小容量	中間容量	最大容量
(g)	(mm)	(g)	(mm)										
825.0002	826.0002	0.1-2	0.002	88	120	84	100	<±6.0	<±4.0	<±2.0	<5.0	<3.3	<1.5
825.0010	826.0010	0.5-10	0.01	88	120	84	100	<±2.5	<±1.8	<±1.0	<1.8	<1.2	<0.5
825.0010Y*	826.0010Y*	1-10	0.01	88	136	85	108	<±2.5	<±1.8	<±1.0	<2.5	<1.6	<0.7
825.0020	826.0020	2-20	0.02	88	135	85	108	<±2.5	<±1.8	<±1.0	<1.7	<1.1	<0.5
825.0050	826.0050	5-50	0.1	90	124	86	96.5	<±1.5	<±1.3	<±1.0	<1.0	<0.7	<0.4
825.0100	826.0100	10-100	0.1	92	124.5	87	97	<±1.5	<±1.2	<±0.8	<1.0	<0.6	<0.2
825.0200	826.0200	20-200	0.2	90	117	86	90	<±1.5	<±1.1	<±0.6	<0.6	<0.4	<0.2
825.1000	826.1000	100-1000	1	95	133.5	88	115	<±1.5	<±1.0	<±0.5	<0.5	<0.4	<0.2

性能値は、EN ISO8655に基づき、20℃～25℃の間の一定温度(±0.5℃)の条件で、滑らかに安定したベースの分注によって求められた値です。
※0010Yタイプは 200 μ L ピペットチップ用です。

Acura manual 835/855

- Acura835 シリーズは、分注容量 0.2～10mL の大容量シングルチャンネルピペット
- ガラスパスツールピペット使用可
※PP仕様のみ
- Acura855 シリーズは、8 チャンネル、および 12 チャンネルのピペット
- 分注モジュールは 360 度回転可能
向きを調整してご使用下さい



パスツールピペットアダプター



360 度 自在に回転



ノズルフィルター
ピペット本体からのコンタミネーションを
防止
※835.05PPを除く



Justip システム
SOCOREX 社オリジナルの
チップイジェクター位置調整機能
により、各社ピペットチップに
幅広く対応

性能表

型番	チャンネル	分注容量 (μ L)	最小可 変容量 (μ L)	精度(E%)			再現性(CV%)		
				最小容量	中間容量	最大容量	最小容量	中間容量	最大容量
835.02	1	0.2-2mL	0.002mL	<±1.5	<±1.0	<±0.5	<0.5	<0.3	<0.2
835.02PP*									
835.05		0.5-5mL	0.01mL	<±1.5	<±1.1	<±0.6	<0.6	<0.5	<0.3
835.05PP*									
835.10	8	1-10mL	0.01mL	<±1.5	<±0.7	<±0.5	<0.5	<0.3	<0.2
855.08.010		0.5-10	0.01	<±3.5	<±2.5	<±1.5	<3.0	<2.0	<1.0
855.08.050		5-50	0.1	<±1.0	<±0.9	<±0.8	<1.0	<0.7	<0.4
855.08.200		20-200	0.2	<±0.9	<±0.8	<±0.7	<0.6	<0.5	<0.3
855.08.350	12	40-350	0.4	<±1.0	<±0.9	<±0.8	<0.6	<0.5	<0.3
855.12.010		0.5-10	0.01	<±3.5	<±2.5	<±1.5	<3.0	<2.0	<1.0
855.12.050		5-50	0.1	<±1.0	<±0.9	<±0.8	<1.0	<0.7	<0.4
855.12.200		20-200	0.2	<±0.9	<±0.8	<±0.7	<0.6	<0.5	<0.3
855.12.350		40-350	0.4	<±1.0	<±0.9	<±0.8	<0.6	<0.5	<0.3

性能値は、EN ISO8655に基づき、20℃～25℃の間の一定温度(±0.5℃)の条件で、滑らかに安定したベースの分注によって求められた値です。
※型番 PP 付はパスツールピペットアダプター付仕様 取付部外径 ϕ 6.5～7.0mm のガラスパスツールピペット使用可能

SOCOREX Tips for Acura micropipettes

SOCOREX 社製ピペット用チップ

- 袋入りタイプやラックタイプ、フィルター付タイプなど、豊富なラインナップから用途に合わせてお選び頂けます。
- DNase/RNase/エンドトキシン(パイロジェン)/ATP フリーです。
- 滅菌タイプは DNA フリーです。
- 121℃ 20 分オートクレーブ滅菌可能です。 ※フィルター付タイプを除く
- 材質:PP(ポリプロピレン) フィルター:HDPE(高密度ポリエチレン) 滅菌方法:γ線滅菌 ※滅菌タイプのみ

								825/826/926										855/956				
								0.1-2 μL	0.5-10 μL	1-10 μL (Y)	2-20 μL	5-50 μL	10-100 μL	20-200 μL	100-1000 μL	0.5-10 μL	5-50 μL	20-200 μL	40-350 μL			
仕様		仕様				包装形態																
型番	カラー	形状	フィルター	滅菌	仕様	数量																
容量 10 μL																						
	31.4 mm	3090.0010B	ナチュラル	ウルトラマイクロ			袋	1000 本	●	●								●				
		3090.0010R	ナチュラル	ウルトラマイクロ				ラック	96 本 × 12	●	●							●				
		3090.0010RS	ナチュラル	ウルトラマイクロ			滅菌	ラック	96 本 × 12	●	●								●			
	31.4 mm	3090.0010FRS	ナチュラル	ウルトラマイクロ	あり	滅菌	ラック	96 本 × 12	●	●								●				
	70.9 mm	302.0010GR	ナチュラル	ゲルローディング			ラック	204 本 × 4		●												
容量 20 μL																						
	49.6 mm	3080.0020FRS	ナチュラル	レギュラー	あり	滅菌	ラック	96 本 × 10			●	●	▲	▲	▲			▲				
容量 100 μL																						
	49.6 mm	3080.0100FRS	ナチュラル	レギュラー	あり	滅菌	ラック	96 本 × 10						●	●	▲		●				
容量 200 μL																						
	49.6 mm	3070.0200B	ナチュラル	10、50、100 目盛			袋	1000 本			●	●	●	●	●			●	●			
		3070.0200R	ナチュラル	10、50、100 目盛				ラック	96 本 × 10			●	●	●	●	●			●	●		
		3070.0200RS	ナチュラル	10、50、100 目盛			滅菌	ラック	96 本 × 10			●	●	●	●	●			●	●		
	52.1 mm	3070.0200FRS	ナチュラル	レギュラー	あり	滅菌	ラック	96 本 × 10							●			●				
	83.8 mm	3080.0200LFRS	ナチュラル	ロング	あり	滅菌	ラック	96 本 × 6								●						
	82.5mm	3080.0200GR	ナチュラル	ゲルローディング			ラック	96 本 × 6			●	●	●	●	●							
容量 300 μL																						
	58.8 mm	308.0300FR	ナチュラル	レギュラー	あり	滅菌	ラック	96 本 × 10								●			●	▲		
容量 350 μL																						
	58.8 mm	308.0350B	ナチュラル	レギュラー			袋	1000 本						●	●	●			●	●		
		308.0350R	ナチュラル	レギュラー				ラック	96 本 × 10						●	●	●			●	●	
容量 1000 μL																						
	88.9 mm	3070.1000B	ナチュラル	レギュラー			袋	1000 本										●				
		3070.1000R	ナチュラル	レギュラー				ラック	96 本 × 6									●				
		3070.1000RS	ナチュラル	レギュラー			滅菌	ラック	96 本 × 6										●			
	88.9 mm	3070.1000FRS	ナチュラル	レギュラー	あり	滅菌	ラック	96 本 × 6										●				

※▲はチップの最大容量まで

マクロピペット 835/936 用チップ

						835/936		
						0.2-2mL	0.5-5mL	1-10mL
容量	型番	仕様		包装形態				
		カラー	形状	仕様	数量			
容量 2mL								
 115.5 mm	312.02	ナチュラル	レギュラー	袋	250 本×2 袋	●		
容量 5mL								
 123.2 mm	312.05B	ナチュラル	1~5mL 0.5mL 刻目盛	袋	250 本×2 袋		●	
	312.05R	ナチュラル	1~5mL 0.5mL 刻目盛	ラック	50 本×2 ラック		●	
容量 10mL								
 150.0 mm	312.10	ナチュラル	レギュラー	袋	100 本×3 袋			●

■空ラック

型番	適合チップ	数量
312.10ER	312.10 (10mL)	4



リロードタイプ

■専用空ラックに取付けて使用します。

■プレートはスタックされていますので、省スペースです。

■専用ラックは繰り返しご使用頂けますので、環境にやさしく、経済的です。

					825/826/926								855/956			
					0.1-2 μL	0.5-10 μL	1-10 μL (Y)	2-20 μL	5-50 μL	10-100 μL	20-200 μL	100-1000 μL	0.5-10 μL	5-50 μL	20-200 μL	40-350 μL
容量	型番	仕様	カラー	形状	数量											
容量 10 μL																
 31.4 mm	3090.0010T	ナチュラル	ウルトラマイクロ		96 本×13 プレート	●	●						●			
	3090.0010T-10	ナチュラル	ウルトラマイクロ		96 本×13 プレート 10 箱	●	●						●			
容量 200 μL																
 49.6 mm	3070.0200T	ナチュラル	10,50,100 目盛		96 本×10 プレート			●	●	●	●	●		●	●	
	3070.0200T-10	ナチュラル	10,50,100 目盛		96 本×10 プレート 10 箱			●	●	●	●	●		●	●	
容量 1000 μL																
 88.9 mm	3070.1000T	ナチュラル	レギュラー		96 本×5 プレート							●				
	3070.1000T-10	ナチュラル	レギュラー		96 本×5 プレート 10 箱							●				

■リロードタイプ専用空ラック

型番	適合チップ	数量
3070.0210ER	3090.0010T 3070.0200T	10
3070.1000ER	3070.1000T	6

Acura electro pipettes 926XS/936/956

SOCOREX 電動ピペット Acura エレクトロ

スイス SOCOREX 社製の高品質電動ピペット。

マイクロプロセッサ制御による電動式ピペットですので、ピペッティング作業に不慣れな方でも安全で、安定した操作ができ、長時間のピペッティング作業による疲労も軽減します。

926XS micro

0.1 - 2 μ L
0.5 - 10 μ L
1 - 20 μ L
2.5 - 50 μ L
5 - 100 μ L
10 - 200 μ L
50 - 1000 μ L



936 macro

0.1 - 2 mL
0.25 - 5 mL
0.5 - 10 mL

956 multi

0.5 - 10 μ L
2.5 - 50 μ L
10 - 200 μ L
20 - 350 μ L

特長

- ・エルゴノミクスに基づいたデザインによる優れた操作性
- ・ピペッティング操作はもちろん、設定変更も全て片手で楽々操作
- ・軽量設計
- ・視認性に優れた大型液晶ディスプレイ
- ・電源として、AC アダプター直結仕様、バッテリー仕様を選択可
- ・分注速度を 3 段階に切り替え可能、どの設定においても分注ボタン操作のみで最低速度での分注が可能
- ・1.5 時間以内の急速充電、連続 3,000 回以上の長時間駆動バッテリー搭載（※バッテリー仕様のみ）
- ・SOCOREX 社オリジナルの Justip システム（チップイジェクター位置調整機構）により、各社ピペットチップに幅広く対応
- ・電動ピペットならではの 6 種類の操作モード
- ・専用充電台は同時に 3 台の充電が可能、バッテリーのみでの充電にも対応


エルゴノミクスデザイン

ピペッティング操作はもちろん、設定変更も全て片手で操作頂けます。ディスプレイ表示も左右切替できます。



Justip システム

アキュラピペットオリジナルのチップイジェクター位置調整機構により、各社チップを幅広くご使用頂けます。

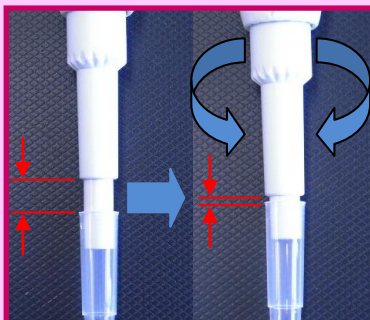

分注速度 3 段階切替

分注速度を 3 段階に切替可能です。どの速度設定においても分注ボタン操作のみで最低速度で分注できます。



カウンター機能

ピペッティング回数を自動でカウントします。



ユーザーキャリブレーション

分注容量の微調整も、デジタル式で、容易に行なえます。



操作モード

電動ピペットならではの 6 種類の操作モード。ピペッティング作業に不慣れな方でも容易にご使用頂けます。

フォワードピペッティング[FORWARD]

設定した容量だけ吸入、排出するモード。

リバースピペッティング[REVERS]

設定容量よりも少し多く吸入、設定容量分排出するモード。

容量 20 μ L 以下を分注する際の再現性を高めます。粘度の高い溶液や発泡性溶液の分注作業に適します。

ステッパーモード[STEP]

ピペットチップに吸入した溶液を、一定容量ずつ、複数回に分けて分注するモード。

希釈モード[DILUTE]

2 種類、または 3 種類の溶液を、あらかじめ設定した容量ずつ吸入するモード。

サンプルの希釈を容易に行なえます。

タクティルモード[TACTIL]

容量を測定しながら吸入、または排出するモード。滴定やゲルローディング操作を容易にします。

攪拌モード[MIXING]

ピペットチップ内への溶液吸入、排出を繰り返すモード。

サンプルチューブやディープウェルプレート内の溶液攪拌に適します。

プラグインパック



ノーマルパック



※充電台・ACアダプターは付属しておりません

付属品

	プラグインパック	ノーマルパック
本体	1 台	1 台
プラグインハンドル	1 個	—
AC アダプター	1 個	—
バッテリー	—	1 個
充電スタンド	—	—

プラグインパックは AC アダプター直結でのご使用です。別売の交換用バッテリー、充電スタンドをご購入頂くと、バッテリー駆動でもご使用頂けます。

ノーマルパックは、バッテリー駆動仕様。別売のプラグインハンドルをご購入頂くと、AC アダプター直結でもご使用頂けます。

仕様

型番		分注容量 (μ L)	最小可 変容量 (μ L)	精度 (E%)			再現性 (CV%)		
プラグインパック	ノーマルパック			最小容量	中間容量	最大容量	最小容量	中間容量	最大容量
マイクロピペット 926XS									
926.0002PIU	926.0002	0.1-2	0.01	< $\pm$ 2.5	< $\pm$ 1.2	< $\pm$ 0.9	<2.5	<1.5	<0.8
926.0010PIU	926.0010	0.5-10	0.05	< $\pm$ 1.2	< $\pm$ 0.8	< $\pm$ 0.6	<1.5	<0.7	<0.35
926.0010YPIU※	926.0010Y※	0.5-10	0.05	< $\pm$ 1.2	< $\pm$ 0.8	< $\pm$ 0.6	<1.7	<0.8	<0.4
926.0020PIU	926.0020	1-20	0.1	< $\pm$ 1.2	< $\pm$ 0.6	< $\pm$ 0.5	<1.2	<0.4	<0.3
926.0050PIU	926.0050	2.5-50	0.25	< $\pm$ 1.0	< $\pm$ 0.6	< $\pm$ 0.5	<0.7	<0.3	<0.25
926.0100PIU	926.0100	5-100	0.5	< $\pm$ 1.0	< $\pm$ 0.6	< $\pm$ 0.5	<0.7	<0.3	<0.2
926.0200PIU	926.0200	10-200	1.0	< $\pm$ 1.0	< $\pm$ 0.6	< $\pm$ 0.4	<0.6	<0.2	<0.15
926.1000PIU	926.1000	50-1000	5.0	< $\pm$ 0.8	< $\pm$ 0.5	< $\pm$ 0.4	<0.4	<0.15	<0.1
マクロピペット 936									
936.02PIU	936.02	0.1-2mL	0.01mL	< $\pm$ 1.5	< $\pm$ 1.0	< $\pm$ 0.5	<0.6	<0.3	<0.15
936.05PIU	936.05	0.25-5mL	0.05mL	< $\pm$ 1.2	< $\pm$ 0.8	< $\pm$ 0.5	<0.6	<0.3	<0.15
936.10PIU	936.10	0.5-10mL	0.05mL	< $\pm$ 1.0	< $\pm$ 0.7	< $\pm$ 0.5	<0.5	<0.2	<0.15
8 チャンネルピペット 956									
956.08.010PIU	956.08.010	0.5-10	0.05	< $\pm$ 3.5	< $\pm$ 1.5	< $\pm$ 1.0	<3.0	<0.9	<0.7
956.08.050PIU	956.08.050	2.5-50	0.25	< $\pm$ 1.0	< $\pm$ 0.9	< $\pm$ 0.8	<1.0	<0.6	<0.4
956.08.200PIU	956.08.200	10-200	1.0	< $\pm$ 0.9	< $\pm$ 0.7	< $\pm$ 0.6	<0.6	<0.4	<0.25
956.08.350PIU	956.08.350	20-350	5.0	< $\pm$ 1.0	< $\pm$ 0.8	< $\pm$ 0.6	<0.6	<0.4	<0.25
12 チャンネルピペット 956									
956.12.010PIU	956.12.010	0.5-10	0.05	< $\pm$ 3.5	< $\pm$ 1.5	< $\pm$ 1.0	<3.0	<0.9	<0.7
956.12.050PIU	956.12.050	2.5-50	0.25	< $\pm$ 1.0	< $\pm$ 0.9	< $\pm$ 0.8	<1.0	<0.6	<0.4
956.12.200PIU	956.12.200	10-200	1.0	< $\pm$ 0.9	< $\pm$ 0.7	< $\pm$ 0.6	<0.6	<0.4	<0.25
956.12.350PIU	956.12.350	20-350	5.0	< $\pm$ 1.0	< $\pm$ 0.8	< $\pm$ 0.6	<0.6	<0.4	<0.25

性能値は、EN ISO8655 に基づき、20℃～25℃の間の一定温度($\pm$ 0.5℃)の条件で、滑らかに安定したペースの分注によって求められた値です。

最小容量における精度・再現性は、最大容量の 10%(926.0002 は 0.5 μ L)設定での値です。

※0010Y タイプは 200 μ L ピペットチップ用です。

オプション

型番	仕様	入数
充電スタンド		
320.903.48※	3本掛け充電スタンド	1個
320.913.48※	3本掛け充電電池専用スタンド	1個
交換バッテリー		
900.920.48	交換用バッテリー	1個
ACアダプター		
900.901.48U	専用 AC アダプター	1個
プラグインハンドル		
900.909.48	プラグインハンドル	1個
ノズルフィルター		
322.05	2、5mL 用	250個
322.10	10mL 用	100個
パストツールピペットアダプタ		
1.835.631	2mL 用	1個
1.835.633	5mL 用	1個

※320.903.48、320.913.48 に AC アダプターは付属しておりません。

ノズルフィルター



※936.02、936.05、936.10 のみ

3本掛け充電スタンド



3本掛け 充電電池専用スタンド



プラグインハンドル



パストツールピペットアダプタ



取付部外径φ6.5~7.0mm
ガラスパストツールピペット用

分注モジュールオプション



1 台のコントローラーで、すべての分注モジュールに対応しています。

※926XS モデルの分注モジュールは XS タイプです。

型番	容量(μL)	全長(mm)
分注モジュール XS タイプ		
800.0002XS	0.1-2	100
800.0010XS	0.5-10	100
800.0010YXS	0.5-10	108
800.0020XS	1-20	108
800.0050XS	2.5-50	96.5
800.0100XS	5-100	97
800.0200XS	10-200	90
800.1000XS	50-1000	115
分注モジュール標準タイプ		
800.0002	0.1-2	120
800.0010	0.5-10	120
800.0010Y	0.5-10	136
800.0020	1-20	135
800.0050	2.5-50	124
800.0100	5-100	124.5
800.0200	10-200	117
800.1000	50-1000	133.5

型番	容量(μL)
マクロ分注モジュール	
800.2000	0.1-2mL
800.5000	0.25-5mL
800.10000	0.5-10mL
8 チャンネル分注モジュール	
800.08.010	0.5-10
800.08.050	2.5-50
800.08.200	10-200
800.08.350	20-350
12 チャンネル分注モジュール	
800.12.010	0.5-10
800.12.050	2.5-50
800.12.200	10-200
800.12.350	20-350

Drawing	Cat. No.	Spare part description	Comment	Instrument volume
# 01	825.705	* Ejector pad		All volumes
# 02	826.561	Ejector button		All volumes
# 03	825.708	Spring ring		All volumes
# 04	825.711	* Smartie plunger cap, green	See also packs of 6 and extra colours in accessory list	2, 10 µL
	825.717	* Smartie plunger cap, yellow		10Y, 20, 50 µL
	825.718	* Smartie plunger cap, orange		100, 200 µL
	825.713	* Smartie plunger cap, blue		1000 µL
# 05	826.754	Ejector spring		All volumes
# 06	826.941	Counter assembly		2 µL
	826.942			10, 10Y µL
	826.943			20 µL
	826.945			50 µL
	826.946			100 µL
	826.947			200 µL
	826.949			1000 µL
# 07	1.825.025	* Service Calibration Seal (25 pcs)		
	1.825.100	* Service Calibration Seal (100 pcs)		
# 08	826.511	Handpiece (incl. calibration lock)	Please advise serial No. when ordering.	2 µL
	826.512			10 µL
	826.513			10Y µL
	826.514			20 µL
	826.515			50 µL
	826.516			100 µL
	826.517			200 µL
	826.519			1000 µL
# 09	826.696	Window		All volumes
# 10	825.901	Handpiece screw (2 pcs)		All volumes
# 11	825.731	Ejector rod		All volumes
# 12	825.902	* Circlip (5 pcs)		All volumes
# 13	826.962	Plunger (incl. part 12)		2 µL
	826.964			10Y, 10 µL
	826.965			20 µL
	826.966			50 µL
	826.967			100 µL
	826.918			200 µL
	826.919			1000 µL
	826.939		Serial No. > 26041001	1000 µL
# 14	825.701	* Ring		50, 100 µL
# 15	825.756	Spring		50, 100 µL
# 16		Not available separatly (see part #18)		
# 17	811.842	* O-ring		50 µL
	825.845	*		100 µL
	826.848	* Lip seal		200 µL
	826.849	*		1000 µL
# 18	826.952	Barrel assembly, complete with O-ring (incl. part #12,13)		2 µL
	826.953			10Y µL
	826.954			10 µL
	826.955			20 µL
	826.956	Barrel assembly, complete with O-ring (inc. Part #12,13,14,15,16,17)		50 µL
	826.957			100 µL
	826.958	Barrel assembly, complete with lip seal (inc. Part # 17,21)		200 µL
	826.959			1000 µL
	826.928	Barrel assembly with barrel head (inc. Part # 21)		200 µL
	826.929			1000 µL
	826.909		Serial No. > 26041001	1000 µL
# 19	826.674	Ejector		2, 10 µL
	826.675			10Y, 20, 50, 100, 200 µL
	826.676			1000 µL
	826.679		Serial No. > 26041001	1000 µL

Drawing	Cat. No.	Spare part description	Comment	Instrument volume
# 20	826.681	Ejector nut		2 µL
	826.682			10 µL
	826.683			10Y µL
	826.684			20 µL
	826.685			50 µL
	826.686			100 µL
	826.687			200 µL
	826.689			1000 µL
# 21	826.428	Barrel head		200 µL
	826.429			1000 µL
	826.439		Serial No. > 26041001	1000 µL
Various				
	851.705	*	Silicon grease, tube, 1 g	1 / pack
	1.800.705		Silicon grease, tube, 1 g	5 / pack
	1.800.710		Silicon grease, tube, 10 g	1 / pack

