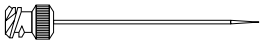
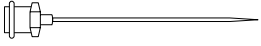

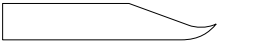


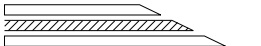
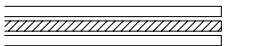


ハミルトンマイクロシリンジ 2-426-01.03.05.06

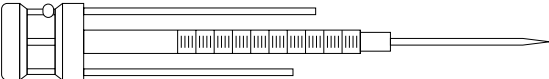
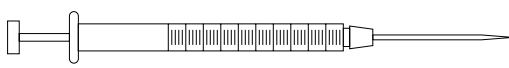
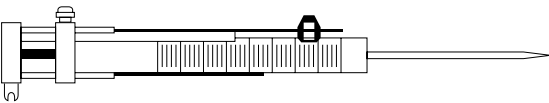





針接続部

N (固定針)	ガラスバレルの中央に、0点に正確に一致する深さまで穴を開け、針を接着したシリンジです。50 以上で使用できません。
LTN (固定針)	1750 ~ 1010の固定針型です。針をしっかりと固定するため、ルアーチップ型シリンジ本体に針を接着したタイプです。50 以上で使用できません。
RN (交換針)	0点に正確にシールする交換針と一体になったシリンジです。分解し加熱滅菌処理ができます。
KH (ナレーレッド)	7000シリーズにしかありません。シリンジ本体に取り外しできるメーリングルアーハブが取り付けられています。シール用のフェラルにより交換針がシールされます。
LT (ルアーチップ)	摺りガラスのテーパのついたルアーからなり、CTFEハブ付ハイポダーミック針を確実にシール接続します。メタルハブ付ハイポダーミック針は使用できません。分解し加熱滅菌処理ができます。
TLL (ルアーロック)	1700シリーズと1000シリーズにしかありません。一般的なラボ用として、また、自動希釈装置や、自動分注器にも使われています。分解し加熱滅菌処理ができます。

針先形状

KF CTFEハブ付交換針		ルアーロック・ルアーチップ型シリンジに使用できます。
N メタルハブ付交換針		ルアーロック型シリンジに使用できます。ルアーチップ型シリンジには使用できません。(確実なシールができない為です。)
RN リムーバブルニードル		全てのRN型シリンジに使用できます。但し、接続部には5 ~ 100 µl 用と250 µl ~ 10ml用の2種類があります。
PT-2		セパタムを刺し通す場合このポイントスタイルをお勧めします。針は22カットしており、針の詰まりを防ぐ為先端にわずかな反りをもたせています。
PT-3		レオサイン、ウォーターズなどHPLCインジェクターへのサンプルの注入に適します。また、針先は90カットになっていますので、液体の分注にも利用できます。
PT-5		横穴式で針の詰まりが問題になる場合などに使用します。通常より厚いセパタムや、薄いプラスチック、ビニール等に刺す場合に適します。
KH PT-2		針は22カットです。針先端までブランジャーワイヤーが通っています。シリンジ購入時はブランジャーワイヤーも同様のカットがされていますが、交換する場合ブランジャーワイヤーは90となります。
KH PT-3		針は90°カットです。針先までブランジャーワイヤーが通っており、リークの無いシリンジです。

シリンジ形状

固定針型 N ガイド付 WG 	ルアーチップタイプ固定針型 LTN 
固定針型 N チャニーアダプター付 CH 	ルアーチップタイプ固定針型 LTN 横穴針型 PT-5 
固定針型 N 標準型 	ルアーチップ型 LT 標準型 
固定針型 N 横穴針型 PT-5 	ルアーロック型 TLL 標準型 
リムーバブルニードル型 RN 標準型 