

4箇所の液面レベルを1台で検出！！



液面検知機（容器外付け式）

品番	型番	仕様	価格(税抜)
2-984-01	CLLAS-4	本体	¥ 76,000
2-984-11	E-2	交換用電極(2m)	¥ 6,000
2-984-12	E-5	交換用電極(5m)	¥ 9,000

※金属容器に使用することはできません。

■特長


- ・電極を容器の外側に取付、非接触で液面を感知しブザーで知らせます。
- ・最大4つの電極により複数の容器の液面を管理します。
- ・静電容量式により容器が不透明であっても検出可能です。
- ・ポンプのオン・オフや上下限警報などにご使用できます。

■仕様

- ・検出液体: 比誘電率20以上の液体
- ・保護構造: 本体/IP-30、電極/IP-67
- ・制御出力: 最大50mA
- ・サイズ: 本体/103×110×65mm、
電極/42×22×25mm
- ・材質: 本体/スチール粉体塗装、
電極/SBR(ステレンブタジエンゴム)、
コード/PVC(塩化ビニル樹脂)
- ・付属品: 電極(2m)×1本、ACアダプター、
ブザー、マジックテープ(1.5m)


様々な接続シーンに対応

原料の配合

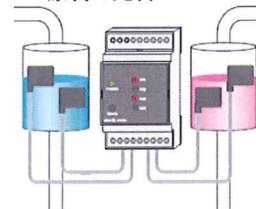

2つの原料を混ぜるとき、それぞれのタンクに取り付けた2つのセンサによって任意の定量を混ぜ合わせることができます。

容量の検出

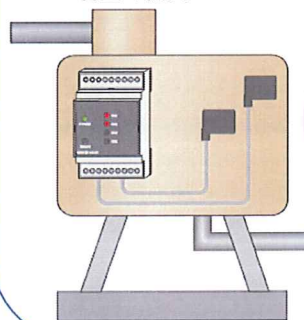

貯水タンク(非金属)等の水位センサとしても利用できます。静電容量式ですので、透明な容器でなくても液面レベルを計測できます。

アズワン株式会社

商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875
FAX 0120-700-763