

CIP 200®

Formulated Acid Cleaner
(調製酸性洗剤)

CIP 200調製酸性洗剤は製薬、バイオテクノロジー、化粧品等、効果的かつバリデーション可能な洗剤を必要とする業界用の高性能の洗剤です。本製品にはリン酸、界面活性洗剤、キレート剤等の重要成分が配合されています。起泡性が低く、高圧用途での使用に適しています。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。

用途

- プロセス機器
 - プロセス容器
 - 反応器
 - ブレンダー
 - 打錠機
- ルージ除去と不動態化
- コンポーネント部品の洗浄
- 超音波洗浄
- ラボ用ガラス器具類

特徴

利点

Formulated acid cleaner (調製酸性洗剤)

広範囲の化学作用で洗浄します。

洗剤残留物を検出する特異的、非特異的分析方法を有します。その方法にはHPLC、TOC、伝導度等が含まれます。

独自の分析方法を開発する必要性を無くし、バリデーションプロセスを援助します。

FDAおよびISO 9001 登録施設内にて製造

製造および品質保証において最高の基準を満たしています。

良好なリンス性

製品表面から簡単に除去できます。時間と水が節約できます。

完全なロットトレーサビリティ

品質保証および品質管理をサポートします。

製品の一貫性をお約束



処方が一貫しており、将来にわたって供給可能です。

プロセス洗浄用濃度範囲1%-5%

効率的な洗浄により機器のダウンタイムを減らし、経費を節約できます。

技術サポート

業界で高く評価されている化学、微生物およびエンジニアリング関係の専門家チームが製品とプロセスのコンサルティングを行います。またSTERIS技術サポートでは、プロセス洗浄および洗浄バリデーションに重点を置いたセミナーをオンサイトとオフサイトの両方で行っています。技術データ、ラボレポート、分析方法およびケーススタディについて細胞毒性、LD 50、基質適合性を含む広範囲のライブラリが作成されています。

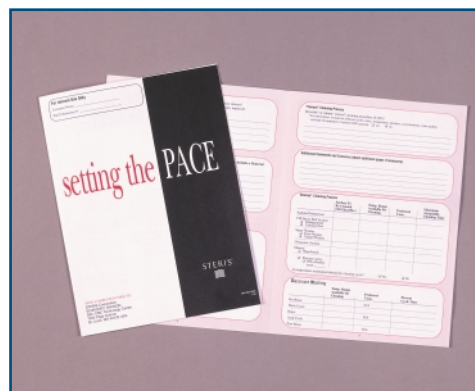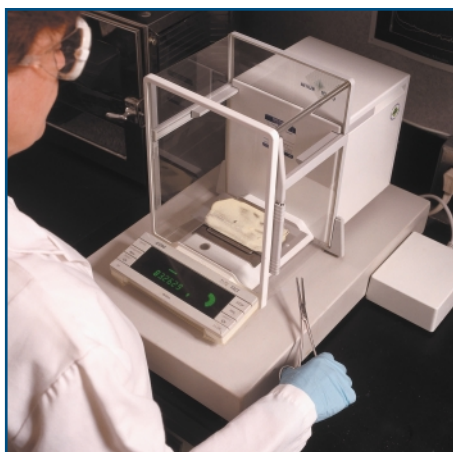

PACEプログラム

プロセスおよび洗浄剤の評価(PACE)プログラムは、効果的な洗浄プロトコルを提供します。STERISはこのプロトコルを汚れの化学的特徴、濃度、洗浄時間、温度、洗浄方法および水質に基づき、パラメータを指定することによって設計します。PACEは洗浄を行うための重要な第1段階です。

物理的性質

形態	無色/透明な液体
におい	僅かな薬品臭
比重 25°C	1.34
1%溶液のpH	2.0
溶解性	完全溶解
起泡性	少量
リンス性	良好

ご注文に関する情報

18.93リットル入りペール	1D20-05EC
208.18リットル入りドラム	1D20-01EC
1135.5リットル入りトート	1D20-P7EC

STERIS社は製薬、バイオテクノロジー、医療機器、研究室および産業市場に対して汚染管理装置、製品およびサービスのすべてを提供するグローバル企業です。当社のソリューションは製品開発のあらゆる側面、すなわち研究室、動物実験ラボ、および生産、製造工程のすべてにわたっています。

世界のSTERIS営業所

ベネルクス	32 2 523 2488
カナダ	800 661 3937
フランス	33 1 44 882688
ドイツ	49 2233 69990
イタリア	39 02 2130341
日本	81 78 321 2271
中南米	305 442 8202
北欧	358 9 25851
シンガポール	65 68 41 7677
スペイン	34 916 585 920
スウェーデン	46 152 228 30
イギリス	44 1256 840400

印刷物 #M1597JA.2003-03、改訂A
©2003 by STERIS Corporation. (2500)
All rights reserved.

感染および汚染予防のためのテクノロジー™



STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 ■ USA
440-354-2600 ■ 800-444-9009
www.steris.com