

有機化学実験に必須のエバポレーターと
オイルバスがセットに！

AS ONE

ロータリーエバポレーターセット



POINT1



デジタル表示により回転数がひと目で
分かり、ダイヤルによる直感的な操作が
可能です。また、正転・逆転機能もボタ
ン一つで設定できます。

POINT2



本体上部を
傾けることが
できるため、
サンプル残量や
オイルバスの
内容量に合わせて
フラスコの
角度を
調整できます。

POINT3



本体上部、および下部はそれぞれ上下
昇降できるため、フラスコの取り出しが
容易にでき、また、実験に合わせた細か
な位置調整も可能です。

POINT4



フラスコ取り出し用パーツを
回転させることにより、固着した
フラスコを容易に取り外しできます。

POINT5



ウォーターバス/
オイルバスの
切り替えができ、
±3℃
(オイル使用時)
での安定した
温調が可能です。
また、空焚き防止
機構も付いた
安全設計です。

付属品・オプション品



◆本体セット(4-2845-01)内容

- ロータリーエバポレーター本体
- オイルバス(ARE-V1200-H)
- 受けフラスコ(A18300110)
- クリップ(A18900188)
- 冷却器(A18900476)
- ナス型フラスコ1L(24/40)
- ロータリージョイント(A18300206)
- 真空シール(A18204186_18204187)

◆特長

- 耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。
- スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。
- 状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。
- 正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。
- PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。

◆仕様

<エバポレーター本体>

- サイズ：440×320×450～670mm
(冷却器セット時/530×320×690～910mm)
- モーター：DCブラシレスモーター
- 表示：LED
- 重量：約7kg
- 回転数：20～200rpm
- 冷却面積：1200cm²
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 正転・逆転機能付き
(インターバル時間：1～999秒)

<オイルバス>

- サイズ：300×320×240mm
- 表示：LED
- 温度調節精度：±3℃
- 最大消費電力：1000W
- 容量：約4.5L
- 温度設定範囲：室温+5℃～180℃(1℃単位)
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 重量：約3kg


<総合セット(4-7623)内容>

- 本体セット(4-2845-01)
- ドライ真空ポンプ(3-6719-02)
- 冷却水循環装置(4-2732-21)
- 冷却トラップセット

それぞれの仕様はAXELをご確認ください。(‐02のみ 2-8101-01、2-8101-12)

NEW 購入後すぐに使える総合セットが新登場！

※イメージ画像

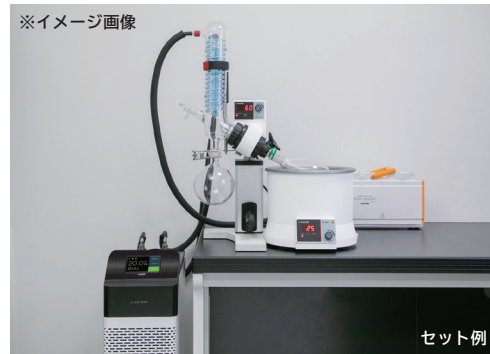

セット例

品番	仕様	セット内容	価格(税抜)
4-2845-01	本体セット	本体・冷却器・オイルバス	¥173,000
4-2845-02	本体セット (バスなし)	本体・冷却器	¥140,000
4-7623-01	総合セット1	本体・冷却器・オイルバス・冷却水循環装置・ 真空ポンプ・真空ホース・断熱ホース	¥499,000
4-7623-02	総合セット2	本体・冷却器・オイルバス・冷却水循環装置・ 冷却トラップセット・真空ポンプ・ 真空ホース・断熱ホース	¥799,000

商品の外観・仕様・特徴、価格は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

アズワン株式会社

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL.0120-700-875