


ブルックフィールド粘度計 少量サンプルアダプターセット構成

通常のB型粘度計での粘度測定には数百mLほどのサンプルを必要とします。
少量サンプルアダプターセットを使用することで、サンプル量を2~16mL程度に抑えられます。

少量サンプルアダプターセットは、スピンドルとそれに対応するチャンバー、ウォータージャケットで構成されており、ウォータージャケットを循環恒温槽と接続することで、温度制御をしながらの測定も可能です。

粘度計

- ・粘度計本体
- ・標準スピンドルセット
(LV用またはRV/HA/HB用)
- ・ガードレグ(LV/RVのみ)
- ・温度プローブ
(DVPlusの場合はオプション)
- ・スタンド
- ・電源ケーブル
- ・キャリーケース

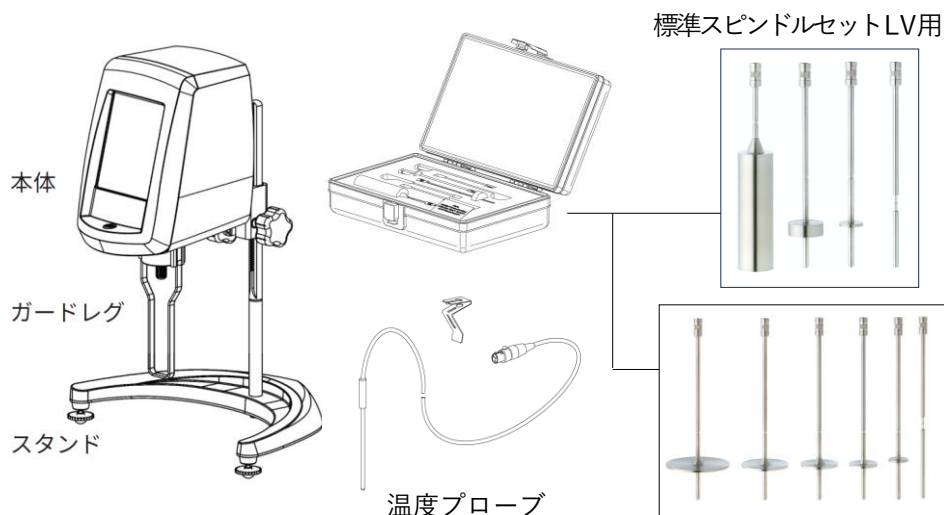

少量サンプルアダプターセット

標準構成

- ①位置決め治具
- ②ウォータージャケット
- ③サンプルチャンバー×1
- ④スピンドル×1

チャンバーとスピンドルは決まった組み合わせがあり、サンプルに合わせて適切なものを選択する形となります。

チャンバーおよびスピンドルは標準で各1個含まれます。別途追加も可能です。

オプション

- ⑤温度センサー付きサンプルチャンバー
- ⑥温度センサーケーブル

