


BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG滅菌対応 インジケーター付き



滅菌インジケーター変化イメージ
変化の色は実際の色とは若干異なることがあります。

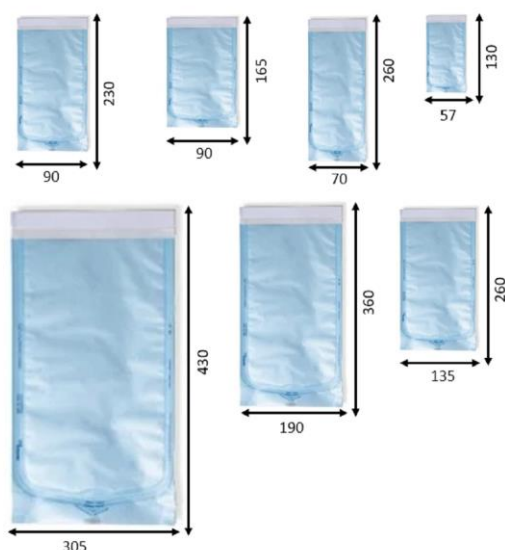

■特徴

- 優れた通気性と確実なバリア性の両立：滅菌剤（蒸気・ガス）の透過性に優れ、袋の隅々まで確実に滅菌。乾燥性も高く、滅菌後の水滴残りを防ぎながら、長期間の無菌保管を可能にします。
- 一目でわかるインジケーター付き：袋の表面に、滅菌処理によって色が変わるインジケーターを付き。滅菌前・滅菌後の識別がひと目でわかり、管理ミスを防ぎます。
- 優れた視認性：片面が透明なPET/PPフィルムになっており、開封前でも中身の器具を簡単に確認できます。
- イージーピール仕様：滅菌後の開封がスムーズで、繊維の毛羽立ち（ペーパーダスト）を抑え、器具への異物混入リスクを低減します。
- テープ付き/折るだけの「セルフシール（ワンシール）タイプ：手間のかかるヒートシーラーが不要、輸送中や保管中の破袋を防ぐ強固なシール性があります。

※イージーピール：プリンやゼリーのフタのように、軽い力で手でめくれる包装フィルム

■用途

医療機関、病院、歯科、動物病院、ネイル、エステサロン、アートメイクスタジオ、研究機関、ラボ

BS滅菌パウチ オートクレーブ、EO滅菌対応 インジケーター付き

■仕様

- 対応滅菌法：オートクレーブ（高圧蒸気滅菌）、EOガス滅菌
- 滅菌インジケーター変化：【オートクレーブ】[青→ 黒]
【EOガス】[ピンク→黄色]
- 材質 60gsm/70gsm医療グレード紙、医療グレードCPP（無延伸ポリプロピレン）/PET（ポリエチレンテレフタレート）複合フィルム、医療グレード粘着テープ
- サイズ：57x130、70x260、90x165、90x230、135x260、190x360、305x430
（単位mm）
- 各サイズ：入数1箱 200枚入
- 製造規格：ISO11607/EN868に準拠
- 品質認証：ISO13485に準拠

型番	サイズ（mm）	主な用途・入れる物の例
BS-POUCH-57130	57x130	ファイル（歯科用の細い器具）、リーマー、ピンセット、小さなスプーンなど
BS-POUCH-70260	70x260	ファイル（歯科用の細い器具）、リーマー、ピンセット、小さなスプーンなど
BS-POUCH-90165	90x165	歯科用ハンドピース（タービン）、ハサミ、複数の基本インスツルメント（器具）
BS-POUCH-90230	90x230	歯科用ハンドピース（タービン）、ハサミ、複数の基本インスツルメント（器具）
BS-POUCH-135260	135x260	鉗子（かんし）、大きめの手術器具、シャーレ（ペトリ皿）など
BS-POUCH-190360	190x360	器具を並べたトレイ（金属皿）ごと、あるいはまとめて滅菌したいとき
BS-POUCH-305430	305x430	器具を並べたトレイ（金属皿）ごと、あるいはまとめて滅菌したいとき

お問合せ：

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>

www.bitstrong.co.jp