

Suction Dry Unit

MODEL: ES-7000

移動式大容量モデル



■付属品

- ・吸引ボトル+ 蓋セット ×2
- ・安全サブボトル
- ・吸引ホース 2m
- ・フットスイッチ 2m
- ・吸引フィルター（本体に蔵済）

■製品概要

- ・ES-7000は、3,000 mL吸引ボトルを2本搭載した大容量タイプの移動型電動式吸引器です。
最大吸引圧 -93.3 kPa、吸引流量80/92 L/min（50/60 Hz）の吸引性能を備え、連続運転とフットスイッチモード（断続運転）の切り替えが可能です。

■特徴

【6,000 mL大容量ダブルボトル】

- ・3,000 mL吸引ボトルを2本搭載し、合計6,000 mLの大容量吸引に対応します。

【高い吸引性能】

- ・-93.3 kPa、吸引流量80/92 L/min（50/60 Hz）。
- ・3,000 mL×2の吸引ボトルにおいて、約18秒で -80 kPaに到達します。

【堅牢なスチール製筐体】

- ・SPCC製ケースを採用し、移動や日常使用を考慮した堅牢な構造です。

【連続運転 / フットスイッチモード】

- ・通常の連続運転に加え、モードをフットスイッチモードに切り替えることで付属のフットスイッチによる断続吸引操作が可能です。

【吸引系統の安全機構】

- ・吸引ボトル内のフロートストッパー、安全サブボトル、本体内に吸引フィルターを備え、液体等の吸い込みから機器を保護します。

■用途

- ・医療機関における各種吸引処置

■ ES-7000 モデル概要

- ・ 大容量ダブルボトルモデル
- ・ 3,000 mL吸引ボトル × 2
- ・ 最大吸引圧：-93.3 kPa
- ・ 吸引流量：80 / 92 L/min（50 / 60 Hz）
- ・ 連続運転 / フットスイッチモード

■ ES-7000 外形寸法図


本体寸法：W440 × D235 × H900 mm

*最大外形寸法：W500 × D235 × H940 mm

*W寸法は安全サブボトル、H寸法は取手を含む

吸引ボトル：3,000 mL × 2

乾燥重量：30.0 kg

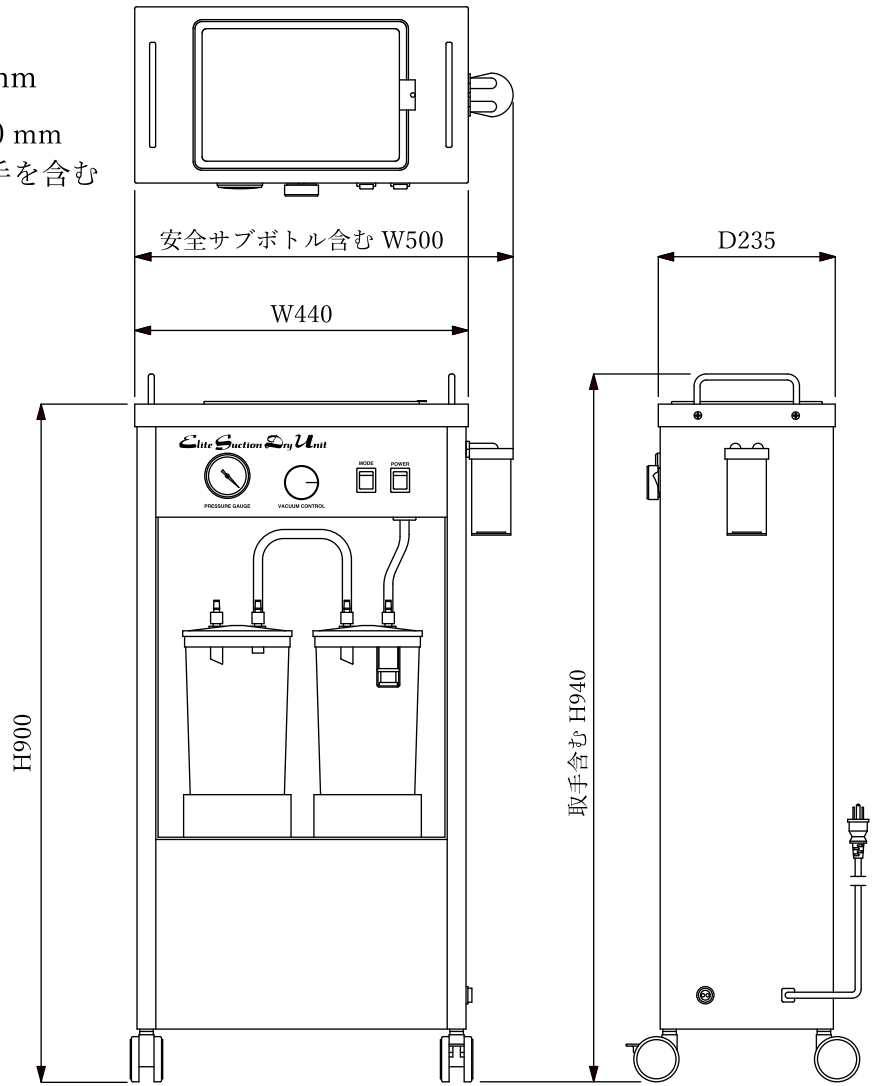

■ 仕様表：ES-7000

電源	AC100V, 50 / 60 Hz	冷却ファン	搭載
最大消費電力	320 VA	搭載吸引ポンプ	ダブルピストン式 / 250 W
最大吸引圧	-93.3 kPa (-700 mmHg)	ケース材質 / 塗装	SPCC / 焼付粉体塗装
吸引流量	80 / 92 L/min (50 / 60 Hz)	キャスター / ストッパー	φ60 双輪キャスター / 対角ストッパー
吸引調整方式	ダイヤル式	吸引系統保護	フロートストッパー(ボトル内) 安全サブボトル, 吸引フィルター
動作モード	連続運転 / フットスイッチモード		
吸引ボトル	3,000 mL × 2	電氣的保護	過電流プロテクター
ボトル本体 / 蓋材質	ポリカーボネート / ABS	医療機器承認番号	22200BZX00267000

■ 荷姿 / 標準価格

型 式	入 数	標準価格 (税別)
ES-7000	1 台	¥ 308,000