

「単回使用」で、いつも清潔な心電図検査用電極。

清潔で手間のかからない ディスポーザブル電極

「単回使用」で毎回清潔に使えるため、清掃（クリームの拭き取り）・消毒・滅菌の手間がかりません。交差感染対策としてもご使用いただけます。



肌にやさしい設計

被検者に配慮した角丸形状にこだわり、粘着部には未反応物質（残存モノマー等）が極めて少ない「テクノゲル」を使用。貼付中の皮膚刺激リスクを低減します。

小児や痩せた患者さんに マスター（負荷）心電図に

しっかりと固定できるため、動きの多い小児や、痩せて V5・V6 のとれやすい患者さんに使用いただけます。また、マスター（負荷）心電図検査も、電極を付けたまま手軽に行えます。

※「テクノゲル」は積水化成工業株式会社の登録商標です。

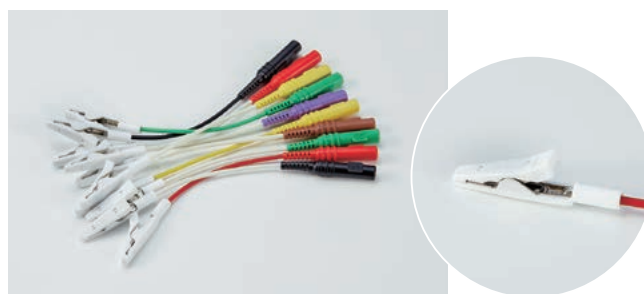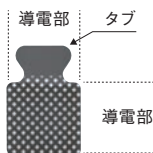

品名・規格	入数	希望小売価格	JAN コード
心電図検査用タブ電極 TAB-L01	10×10シート／袋	2,200円(税別)	4987382036925

一般医療機器 届出番号：08B2X10006000037 電極サイズ：33mm×23mm
製造販売業者 積水化成工業株式会社

品名・規格	入数	希望小売価格	JAN コード
タブ電極リード線 CL-1010	10本	12,600円(税別)	4987382137745

一般医療機器 届出番号：13B3X00107S00018 ワニ口クリップ：3mmφ
製造販売業者 フタミ・エム・イー工業株式会社

- 袋はジッパー付きのため、温湿度の影響を受けにくく、より安心してご利用いただけます。
- リード線は、お使いの心電計にあわせてご準備ください。 ●クリップはタブにのみ装着してください。深くかませて導電性粘着剤の上からはさむと、基線が揺れることがあります。

〈発売元〉 **ケンツメディコ株式会社**

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄 552 番地 1
TEL：0495-71-1001 FAX：0495-72-6716
ホームページ <https://www.kenzmedico.co.jp>



ケンツメディコホームページ