化学薬品を取り扱う工場の管理者様・研究担当者様へ

B-SAFETY
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

頑丈な本体と優れた機能性
緊急時の安全かつ迅速な洗眼を提供します

B-セイフティ B-SAFETY Emergency Eye Shower
緊急用洗眼器 シングル ダブル

DIN EN規格15154-2:2006、ANSI Z358.1-2009合致製品



⚠ 労働安全衛生法特定化学物質障害予防規則により
特定化学物質の取り扱いには緊急用洗浄器の設置が義務付けられています。

安定した水量で優しい洗浄が可能
シャワー放水

汚染物質付着を防ぐ
ヘッドカバー

一度握ると手を放しても水が止まらない
ロック機能付レバー

B-セイフティ社輸入総代理店
INOX 東栄株式会社

B-SAFETY EMERGENCY EYE SHOWER

【緊急用洗眼器】
B-セイフティ

- 緊急時の使用に耐えるように頑丈な部品で組み立てられた本体
- シングルヘッド(片目用)とダブルヘッド(両目用)の2種
- 一度握ると手を離しても水が止まらないロック機能付レバー
- 洗眼時に慌てて顔に当てても衝撃を和らげるゴム製ヘッド
- 汚染物質付着を防ぐヘッドカバー(洗眼時は水圧で自動的に開口)
- 表面をステンレスメッシュでカバーしたシリコン製ホースが付属
- 壁・卓上兼用ブラケットは壁と卓上の両方に設置可能
- 放水量:7リットル/分/ヘッド、逆流防止機能付き



緊急用洗眼器 B-セイフティ仕様


※流量の調節はできません。 ※水道配管への接続が必要です。設置は工事業者様にてお願いいたします。

品番	BR713020	BR713025	BR714020	BR714025
放水口	シングル(口径65mm、45度)		ダブル(口径65mm、45度)	
本体サイズ・材質	高さ270mm、幅65mm・プラスチック		高さ310mm、幅150mm・プラスチック	
付属ホース	ステンレスメッシュカバーホース[長さ1500mm、ホース外径15mm、配管側接続部:1/2インチ(メス捻子)]			
付属ブラケットタイプ	卓上専用ブラケット	壁・卓上兼用ブラケット	卓上専用ブラケット	壁・卓上兼用ブラケット
価格(税抜)	71,600円	71,600円	79,700円	79,700円
製品外観				

ブラケット設置イメージ

※壁・卓上兼用ブラケットは壁面と卓上ともに設置可能です。

壁面

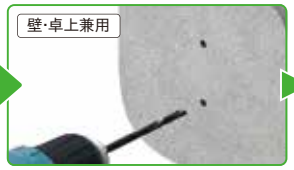

ネジ穴が縦に並ぶようにブラケットのネジ穴に合わせて穴を開けます。




開けたネジ穴にブラケットを合わせて、ネジでしっかりと固定します。




ブラケットの溝にホースが通るようにして洗眼器を立て掛けます。

卓上

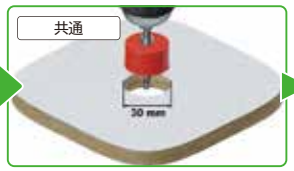

設置面に直径30mmの穴を開けます。

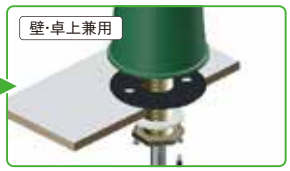

ホースを通した状態で、上と下から挟むようにして固定します。



卓上専用タイプも上と下から挟むようにして固定します。

ステンレスメッシュホース

- ステンレス製のメッシュでカバーされた柔軟性のあるシリコン製ホースです。
- 水道配管側の接続部を水道管に接続してご使用ください。



水道配管側接続部捻子
メス捻子 1/2インチ

仕様・デザイン・価格変更および生産中止等、予告なく実施される場合がございます。納品までに期間を要する場合もございます。掲載の数値等は基準値につき、ご使用条件により異なる場合があるためあくまでも選定の目安としてご覧ください。各種使用目的および薬品に応じた安全に関する知識および経験を有する指導者のもとでご使用ください。設置前には目視等で破損等の異常の有無を確認し、テスト・点検を行い安全を確認した上でご使用ください。不良・破損等によって誘発される二次的損失については対応いたしかねます。予めご理解のほどお願いします。弊社では設置工事は行っておりません。印刷物のため、実物と色が多少異なる場合がございます。価格はすべて税抜です。

B-セイフティ社輸入総代理店
INOX 東栄株式会社
www.labinox.co.jp

お問い合わせは下記へ