

グレー



スツと履ける!
足にやさしく、衛生的。
疲れにくいソフト感。

- 足囲 **4E**
- 抗菌 防臭
- 丸洗い **OK**
- 速乾

佐賀大学医学部附属病院との約10年におよぶ
「産・学・医」共同研究から生まれました。



リニューアルした新モデル

アサヒフットケア 005 [AFC 005]

- 足圧低減
- モーションガイドスロープ(特許取得)
- ふんわりカップインソール
- かかと反射材
- 大型カウンター

[足囲] 4E [サイズ] 22.0→28.0cm (27.5cmなし) ※サックス、ラベンダーのみ22.0→26.0cm
[表材] 合成繊維/合成皮革 [底材] 合成底 [ヒール高] 約5.5cm(26.0cm標準) ベトナム製



靴の断面写真

**縫い目や段差の少ない
シームレス構造**

足への刺激を最小限に抑えるため、靴内の縫い目や段差をできる限り少なくしました。



**スツと
足が入る履き口**

大きく開いた履き口が、着用時のストレスを軽減します。




**厚みたっぷり
やわらかインソール**

ボリューム感ある厚みが特徴。ソフトな履き心地。表布は抗菌防臭加工で、丸洗い可能です。



※グレーの底面像

構造イメージ ※うしろから見た図(中足部)

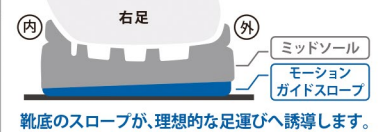

※特許第7062234号

特許取得 足への負担を低減する
モーションガイドスロープ

中足部にスロープ状の硬質バーを配置。体重移動を拇趾(ぼし)側へ誘導することで正常歩行を促進し、足趾(そくし)にかかる負担を減らします。



**衝撃吸収
ミッドソール**



円柱状の構造体を多数配置。高いクッション性で足全体にかかる衝撃を吸収します。



**ロッカーソールで
歩行をアシスト**




舟底形状(ロッカーソール)の靴底が、体重移動を前方へ無理なく誘導します。



**快適設計
ゆったり幅広4E**

つま先は全体的にゆったり広めの設計、特に親指先に余裕を持たせました。

ここが進化した!! 新・アサヒフットケア

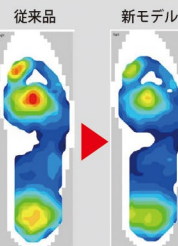

従来品(AFC 001)と比べて...

足への負担が
(足底圧)

約20% 軽減!