MICRONET

デジカメシステム
歴代販売数
第1位

無料貸出
実施中

OM SYSTEM (旧オリンパス)
Tough TG-7

NY-TGV スーパーアダプター


新機能
リモコンシャッター対応
ワイヤレスリモコンに対応しました

バイオ・サイエンス分野に

OM SYSTEM 製コンパクトデジカメ顕微鏡撮影システム
(旧オリンパス)

TG-7 スーパーシステム

ワクワク させる、顕微鏡カメラ

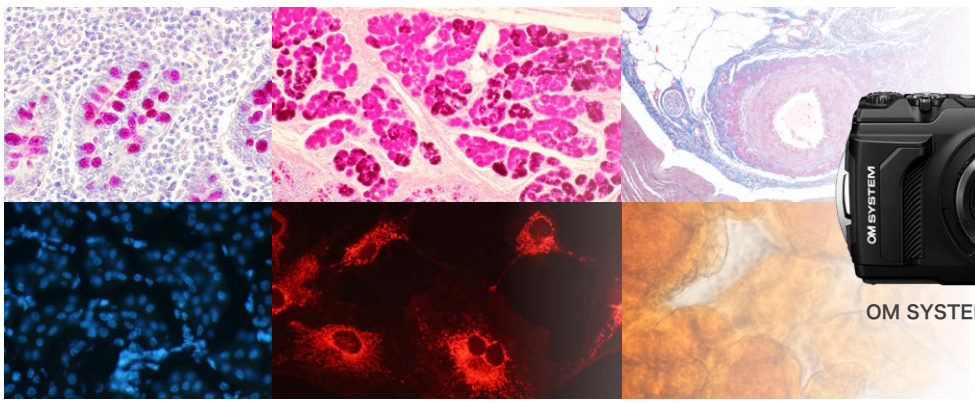



OM SYSTEM　Tough TG-7



NY-TGV スーパーアダプター

MICRONET

MICRONET

デジカメシステム
歴代販売数
第1位

無料貸出
実施中




産業・工業分野に

OM SYSTEM 製コンパクトデジカメ顕微鏡撮影システム
(旧オリンパス)

TG-7 スーパーシステム

ワクワク させる、顕微鏡カメラ

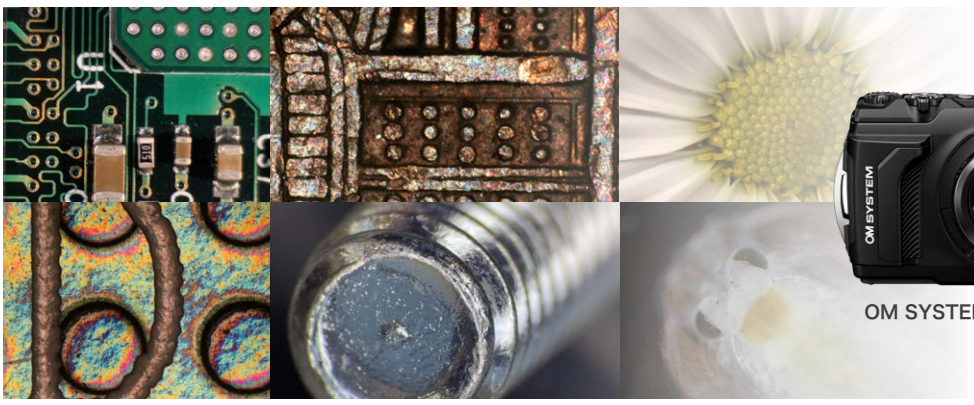



OM SYSTEM　Tough TG-7



NY-TGV スーパーアダプター

マイクロネット株式会社 http://www.microscope-net.com
[TEL] 048-227-5525　[FAX] 0482-27-5526　[MAIL] info@microscope-net.com

1. 簡単操作・簡単取り付け

デジカメならではの簡単操作に加え、アダプターとの脱着も手軽なバヨネット式。誰でも簡単に取り付け・撮影が可能です。



新機能

2. リモコンシャッター対応


Bluetooth リモコンシャッター（別売）に対応。静止画撮影、動画録画開始、ズーム操作も、カメラに触れずに手元で行えます。



新機能


3. USB-C 搭載

新世代規格 USB type-C を搭載。充電からPC へのデータ転送までケーブル一本で快適に行えます。※PC コントロールには対応していません

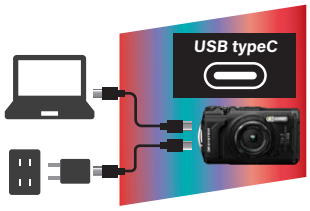


4. スマホ・タブレット操作 / モニター出力対応

アプリを使ったライブカメラコントロールや、外部モニターへの出力（HDMI / 4K 画質）が可能です。

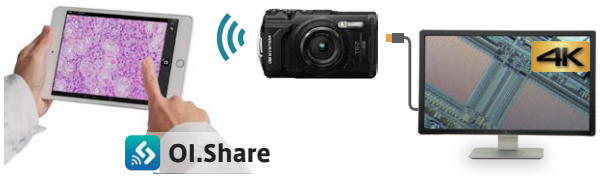

5. ACアダプター対応


電池残量を気にせず使用できるACアダプター (別売) 対応。※1

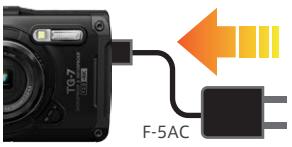

6. かんたん取説付き

取付からカメラの設定まで解説したオリジナル取説付き。



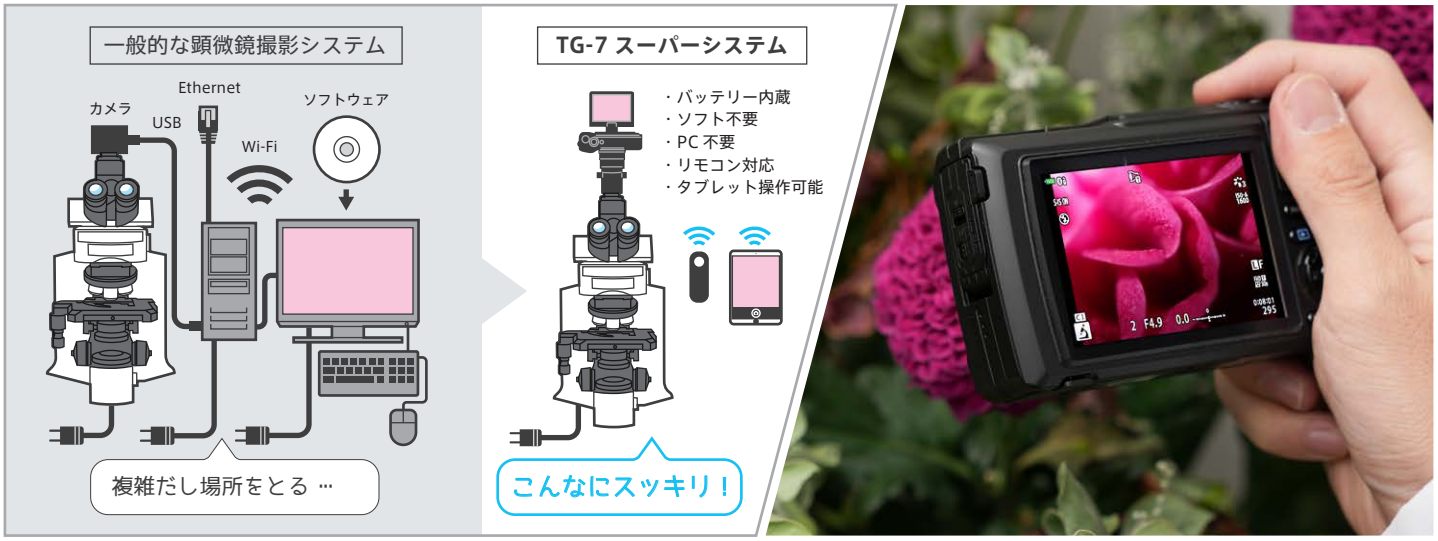

7. パソコン要らずだから、とことんシンプル

パソコンも、ソフトも、インターネットも必要なし。電源を入れて、シャッターを押すだけ。顕微鏡撮影装置として他にないシンプルさが魅力。

8. 顕微鏡モード／深度合成モード搭載

カメラ単体で顕微鏡並の高倍率撮影が可能です。さらに手前から奥までピントの合った全焦点画像撮影機能も搭載。※2

※1 HDMI外部映像出力と充電は同時にできません。給電しながらの撮影にはACアダプター F-5ACが必要です　※2 顕微鏡に取り付けた状態での使用は効果を得られません

OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジカメ顕微鏡撮影システム

TG-7スーパーシステム

標準構成　設定済み・充電済み

- OM SYSTEM製デジカメ Tough TG-7
- SDHCメモリーカード (ハイスピードクラス10) 16GB
- 液晶観察用ミラー
- NY-TGVスーパーアダプター



新製品 / 無料貸出 / コンパクトデジカメ / 1,200万画素 / プログラムオート撮影 / 顕微鏡モード / リモコン / 接眼部取付OK / Cマウント取付OK / 実体顕微鏡 SZ61TR SMZ745T 対応 / 4K 動画 / AC アダプター (オプション) / モニタ出力 (HDMI) / モニタ出力フレームレート 60fps※1 / Wi-Fi Bluetooth / スマホ タブレット / タイムラプス / フォーカスピーキング

おすすめオプション

- リモコンシャッター　RM-WR2
- USB ACアダプター　F-5AC ※1

その他のオプション

- BH用固定スリーブ NY-BH
- 直筒部固定スリーブ NY-JIS
- 5.5インチタッチスクリーンモニター DC-550PRO-M (HDMIケーブル付き)
- ウルトラCマウント（オリンパス(EVIDENT)顕微鏡用）
- HDMIケーブル（1.8m）

※デジカメ (TG-7) を含む、スーパーシステムの無料貸出 (1週間) を実施中です
※NY-TGVスーパーアダプターは単品でも販売しております。
※ 設定済み・充電済み …顕微鏡撮影モード (顕微鏡に取り付けて撮影する際の推奨設定であり、高倍率撮影モードのことではありません) に設定・充電を完了した上で出荷させて頂きます。

9. 便利な小型タッチスクリーンモニター

オプションの小型タッチスクリーンモニター DC-550PRO-M（別売）があれば、見やすい位置にちょうどよいサイズのモニターを設置でき、観察がよりしやすくなります。※1

顕微鏡用 5.5 インチタッチスクリーンモニター　DC-550PRO-M



10. 業務用途に最適な高耐久性

防水・防塵・耐衝撃

（15m）　（JIS/IEC 保護等級 6 級）　（2.1m）

薬品を扱う研究室から、粉塵の舞う工場まで、さまざまな現場での業務使用に最適な高い耐久性。洗浄できる防水仕様で衛生面でも安心。



11. 歴代のTGシリーズに対応

NY-TGV スーパーアダプターは、すべての OM SYSTEM(オリンパス) 製 TG シリーズに対応しています。



TG-1 / TG-2 / TG-3 / TG-4 / TG-5 / TG-6 / 最新 TG-7 に対応

顕微鏡への取り付け方法①　各種顕微鏡の Cマウント鏡筒 への取り付け方法

オリンパス顕微鏡 (EVIDENT) の場合①



型式：U-OC
オリンパス顕微鏡用
ウルトラCマウント

U-CMAD3+U-TV1X-2 の代わりに使用できます
①接眼との同焦点調整
②中心軸調整が可能

オリンパス顕微鏡 (EVIDENT) の場合②



1 U-CMAD3 （オリンパス製）
＋
2 U-TV1X-2 （オリンパス製）

ニコン顕微鏡の場合①



1 Cマウントダイレクト TVアダプター （ニコン製）
＋
2 Y-T TV 直筒 （ニコン製）

ニコン顕微鏡の場合②



1 Cマウントダイレクト TVアダプター （ニコン製）
＋
2 LV-TV 直筒 （ニコン製）

ツァイス顕微鏡の場合



1 60N-C1” 1.0X

ライカ顕微鏡の場合①②



1 Cマウントアダプター 1x
2 Video/Photo 対物レンズ1x
3 Cマウントアダプター HC1x

※Cマウント鏡筒はレンズの入っていない1倍を使用してください




顕微鏡への取り付け方法②　各種スリーブを組み替えることで、顕微鏡の あらゆる鏡筒へ 取り付けできます

接眼部への取付

内径Φ30mm の場合　内径Φ23.2mm の場合

スーパースリーブ
（付属品）

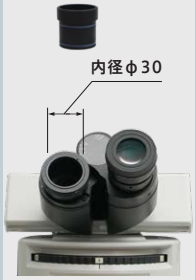

スーパースリーブ（付属品）を使用し内径φ30.0 接眼部に取付できます




内径φ23.2 の JIS 規格接眼部に対応 簡単に取付できます

JIS 直筒への取付け



直筒部固定スリーブ NY-JIS

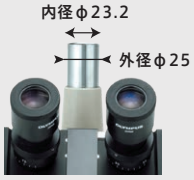


内径φ23.2 外形φ25 の JIS 直筒部に対応 。直筒部固定スリーブ（NY-JIS）でしっかり固定できます

オリンパス旧タイプ (BH 顕微鏡等) への取付



BH用固定スリーブ NY-BH

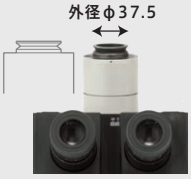

オリンパス製 BH 等の三眼鏡等に対応。BH 用固定スリーブ（NY-BH）を併用ください

オリンパス製写真鏡筒への取付け



BH用固定スリーブ NY-BH
価格：5,000 円 税別
（5,500 円 税込 ）



オリンパス製写真鏡筒に対応。BH 用固定スリーブ（NY-BH）を併用ください

ニコン旧タイプへの取付け



オプチフォト ラボフォト メタフォト SMZ−2T等の三眼鏡筒部に直接取付できます