

耐衝撃性アネロイド血圧計

# デュラエックス

No.555 Dura-X

「丈夫で安心」  
「軽くて楽々」  
「精度長期安定型」

Shock  
Resistant  
Aneroid  
Gear free

KENZMEDICO



## ショックレジスタント(耐衝撃性)

世界で初めて、アネロイド血圧計としてAAMI※の耐落下衝撃仕様に適応。

※AAMI:米国医療計測機器振興協会規格の略  
1967年設立。医療技術に関して安全使用及び安全な環境のための機器製品規格及びガイドラインを作成。

ギヤー無し構造	従来のアネロイド血圧計はカフからの圧力を精密なギヤー(歯車)に伝え、指針を回転させていましたが、本製品はギヤーを使用せず、らせん状のぜんまいによって直接指針を回転させる構造になっています。
バンパーで補強	合成ゴムのバンパーが、衝撃を吸収します。
軽量・薄型	部品点数の少ないシンプル構造により、軽量・薄型フォルムになりました。

## バリエーション豊富なカフ(腕帯)


### ■ウォッシュブルカフ仕様

>>液体が染み込まないノンブラダーのワンピースカフ仕様です。  
(内面ウレタンコーティング)

- ・消毒液での清拭が簡単で、チューブを外してコネクタープラグ(洗浄用キャップ)をつければ水洗いも可能。
- ・メータがカフに隠れないので読み取りが容易。

品目番号	品名
0555B071	アネロイド血圧計No.555 ウォッシュブルカフ仕様

※付属のカフは「ウォッシュブルカフM 2チューブ標準型」です。  
サイズはSS~LLまで取り揃えております。(オプション)

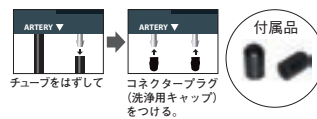

### ■標準型カフ仕様

>>ブラダーを使用しているナイロン製カフ仕様です。

- ・カラーバリエーションが豊富(全8色)。
- ・ソフトな使い心地。
- ・メータがカフに隠れないので読み取りが容易。

品目番号	品名
0555B021	アネロイド血圧計No.555 ブルー 標準型カフ仕様
0555B022	アネロイド血圧計No.555 レッド 標準型カフ仕様
0555B023	アネロイド血圧計No.555 グリーン 標準型カフ仕様
0555B024	アネロイド血圧計No.555 マゼンタ 標準型カフ仕様
0555B025	アネロイド血圧計No.555 グレー 標準型カフ仕様
0555B026	アネロイド血圧計No.555 ティール 標準型カフ仕様
0555B027	アネロイド血圧計No.555 ピンク 標準型カフ仕様
0555B028	アネロイド血圧計No.555 ライトブルー 標準型カフ仕様

※T型カフ仕様もご用意できます。お問合せください。



## メータ脱着可能 / メータ360° 回転式



メータをスライドさせられるループベルトです。

- ・ループベルトからメータをはずし手元で見ることができます。その際には見やすい角度にメータを回転させられます。

## 送気球カバー付



- ・カバーによって送気球が一回り大きく、滑りにくいので送気しやすくなっています。
- ・ゴム部に直接触れないので、不快なベトベト感がなくゴム臭も移りません。

注) ゴムアレルギー防止器具ではありません。

### アネロイド血圧計 No.555

寸法	メータ(バンパー含む) 送気球バルブセット	径φ約60mm 厚さ約34mm 最大径φ約43mm 長さ約110mm
重量	メータ(バンパー含む)	約80g
セット内容	メータ、カフ(腕帯)、送気球(カバー付)、血圧計バッグ、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)2個、取扱説明書、 ※コネクタープラグはウォッシュブルカフ仕様のみ 添付文書、保証書	
製造販売届出番号	11B2X00021555001	

※仕様及び外観は製品改良のためお断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

製造販売業者

## ケンツメディコ株式会社

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552-1  
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716  
ホームページ <http://www.kenzmedico.co.jp>