


締め付けがきつくて測るのが苦手な方に

腕にやさしい加圧中測定

加圧中測定とは？

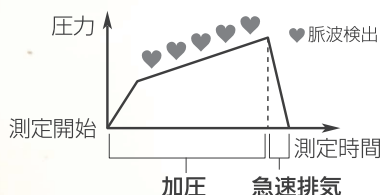

**必要なだけの加圧で測定できるので、
腕への負担を軽減！**

一気に所定値まで加圧後、ゆっくりと加圧しながら脈波を検出。加圧中に測定することで、無駄な締め付けを無くして腕への負担を軽減します。



欧州高血圧学会臨床精度試験合格

ESH(European Society of Hypertension: 欧州高血圧学会)は、高血圧における科学的情報交流を目的とした組織です。ESHの定める臨床精度試験は、各種医学研究等にも採用されており、またそれゆえに非常に難易度の高い試験だといわれています。DS-G10は、国際的に認知された血圧測定の臨床試験の中でも合格基準が厳しいとされる2010年改訂版のESH臨床試験プロトコルに適合しており、その測定精度が証明されています。

■主な仕様

測定可能上腕周囲	約22—42cm	電源	専用ACアダプタ(別売)または単3形アルカリ乾電池4本
腕帯	ユニバーサルスリム腕帯	本体寸法	縦162.3×横127.3×高さ96mm
測定方式	加圧中測定	本体質量	約336g(乾電池を除く)
メモリー	2つのメモリーにそれぞれ60回分の測定結果とその平均値	生産国	中国
医療機器認証番号	226AFBZX00162000		

●お断りなく仕様を変更する場合がありますので、ご了承下さい。

日本精密測器株式会社

〒377-0293 群馬県渋川市中郷 2508-13
TEL:0279-20-2311(代表) FAX:0279-20-2411
<https://www.nissei-kk.co.jp>



お問い合わせは

商品に関するお問い合わせ

お客様相談室 0120-211-164
(9:00～12:00、13:00～17:00 土・日・祝祭日を除く)

※ NISSEI は日本精密測器株式会社の登録商標です。