

試験報告書

依頼者 株式会社 松田商会 殿
品名 マスク内部のフィルター 1点

試験項目 バクテリア飛沫捕集(ろ過)効率(BFE) 他

平成28年11月24日付けで当所に提出された試料の
試験結果は、下記のとおりです。

平成28年12月9日


カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号

一般財団法人 **カケンテストセンター**

大阪事業所 生物ラボ

Tel (06)-6441-0399 Fax (06)-6441-6803

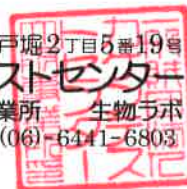

記

試験結果

1. BFE

試料	バクテリア飛沫捕集(ろ過)効率(%)			
	No.1	No.2	No.3	平均
マスク内部のフィルター	98.9	99.0	98.6	98.8

2. VFE

試料	ウイルス飛沫捕集(ろ過)効率(%)			
	No.1	No.2	No.3	平均
マスク内部のフィルター	98.5	98.2	98.0	98.3

試験方法

バクテリア飛沫捕集(ろ過)効率(BFE)試験: ASTM F2101-14

供試菌: 黄色ぶどう球菌・*Staphylococcus aureus* ATCC 6538

ウイルス飛沫捕集(ろ過)効率(VFE)試験: ASTM F2101-14、準用

供試ウイルス: バクテリオファージ Phi X174 ATCC 13706-B1

宿主細菌: 大腸菌 *E.coli* C ATCC 13706

試料

KAKEN KAKEI

以上