

5つの要素

● ソフトな肌触りと固定力

本体素材の肌側にソフトな肌触りの2WAY素材、外側に弾力性に優れた1WAY素材の2枚を合わせることで、柔らかさと固定力を両立させました。


● 樹脂ステー(プラスチック製)

2本のステーを体型に沿うように腰部の中心にフィットさせることで、効果的にサポートします。プラスチック製のためステーの軽量化が実現しました。

本体素材2枚合わせ構造



・長さ約150mm
・厚み約2mm

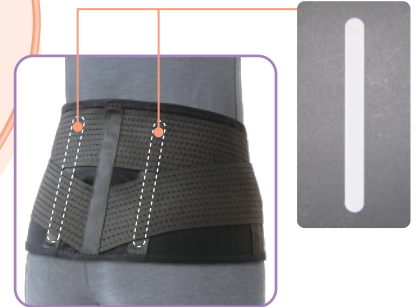

背面

● 補助ベルト

メッシュタイプの強力な補助ベルトを採用し、より腹圧を高め、強い固定を実現しました。



● 立体裁断

サイズ別に適確な立体裁断を施しているため確実な装着が行えます。腹部の幅が狭くなっているため、前屈制限が少なく、胃に負担をかけません。背部の幅が広がっているため、過伸展を防ぎ背筋を補助します。

● バランスのとれた形状

動きやすさ、通気性、そしてホルド性。3つの機能をバランスよく実現した形状です。

規格

・定価…オープン価格
・ケース単位…10枚入

商品番号	規格/腰廻り	販売単位	JAN CODE
034052	S 65cm ~ 75cm	1枚	4958995340525
034053	M 75cm ~ 90cm	1枚	4958995340532
034054	L 90cm ~ 105cm	1枚	4958995340549
034055	LL 105cm ~ 120cm	1枚	4958995340556



主な素材

ナイロン
ポリエステル
ポリウレタン
天然ゴム
樹脂ステー

※本品は天然ゴムを使用しています。

洗濯方法

- ・面ファスナーは閉じた状態で洗濯してください。
- ・水の温度は40℃を限度とし、手洗いをしてください。(洗濯機のご使用は避けてください。)
- ・洗剤は中性洗剤をご使用ください。漂白剤による漂白はできません。
- ・タンブラー乾燥は製品変形、劣化のもとになりますのでおやめください。
- ・日陰でつり干しをしてください。
- ・アイロン、ドライクリーニングは避けてください。

*染色の性質上、色落ちや移染の恐れがありますので、必ず他のものと分けて単独で洗濯してください。

保険対応

処置にあたり腰部固定帯を使用した場合

区分J119-2 腰部又は胸部固定帯固定35点の算定に対して、区分J200 腰部固定帯加算(初回のみ)170点を加算できる。

発売元



株式会社 **竹虎**®
メディカル事業部

取扱店

URL <http://taketora-web.com/> E-mail info@taketora-web.com

東日本営業部 TEL.045(680)0308(代) 西日本営業部 TEL.06(6386)7217(代)