

Closed Needleless Therapy
Connectors



輸液用延長チューブ

Bionector® Octopus®

ビオネクター オクトパス



Value Life

閉鎖式ニードルレスコネクター

ビオネクター付の輸液用延長チューブです。





- 閉鎖式ニードルレスコネクター ビオネクターが付いていますので、接続されたシリンジなどを取り外しても、カテーテル内に陰圧が起こりにくく、カテーテル内への血液の引き込みを低減できます。
- 専用デバイスや金属針を使用せず薬剤の注入が可能です。
- 既存のルアースリップやルアーロックアダプターを接続することができます。
- フラットな形状の接続部は簡単、確実に消毒ができます。

PVCフリーのチューブ素材

- チューブ素材にはポリ塩化ビニール樹脂（PVC）を使用していません。
- 使用される薬剤における吸着や可塑剤DEHPの溶出の問題に対応でき、安全に輸液療法を行うことができます。

逆流防止弁付の製品もあります。（製品コード:841.232）

- 薬液などの逆流を防止することができます。

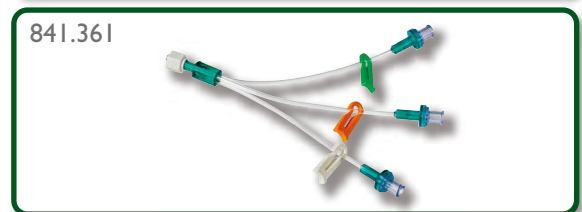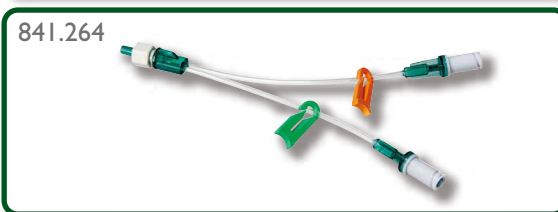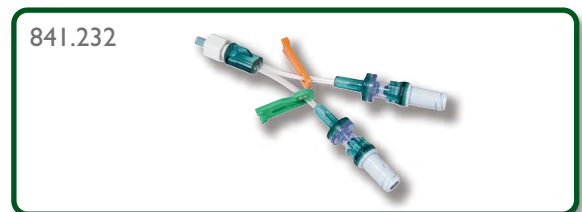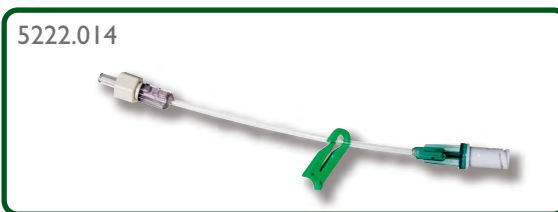

● ビオネクター オクトパス

製品コード	製品仕様	プライミングボリューム	販売単位
5222.014	ビオネクター1個付 / チューブ長10cm	0.29 mL	50個 / 箱
841.264	ビオネクター2個付 / Y型チューブ / チューブ長10cm	0.57 mL	50個 / 箱
841.232	ビオネクター2個付 / Y型チューブ / チューブ長3cm / 逆流防止弁2個付	0.50 mL	10個 / 箱

販売名：ビゴン オクトパス(ビオネクター付) 医療機器届出番号：27B1X00117000002

● ビオネクターS

製品コード	製品仕様	プライミングボリューム	販売単位
896.23	コネクター単体	0.02 mL	50個 / 箱

販売名：ビオネクターS 医療機器届出番号：27B1X00117000011

● オクトパスTIVA

製品コード	製品仕様	プライミングボリューム	販売単位
841.231	逆流防止弁2個付 / Y型チューブ / チューブ長3cm	0.62 mL	10個 / 箱
841.361	逆流防止弁3個付 / 三股チューブ / チューブ長10cm	1.2 mL	10個 / 箱

販売名：ビゴン オクトパスN 医療機器届出番号：27B1X00117000003

製造販売元

株式会社 ビゴン・ジャポン

大阪市中央区平野町4丁目6番3号 大明ビル5階

Tel. 06-6228-0300 Fax. 06-6228-0331

VJACOP500D2014-001



www.vygon.com