

JOINT SUPPORT

FOR YOUR COMFORT LIFE

関節支援帯

ウルファースリーズの特色

- 左右兼用!
- 関節部位以外に負担をかけないためADLを制限しない!
- 適度な伸縮性のある本体生地!
- 面ファスナー接着により着脱簡単!

*防水素材ではありません。

使用部位	用途	商品名	特色	バンドカラー	サイズ
足関節	足関節固定バンド	ソフラウルファー(フリーサイズ)		ベージュ・ブラック	フリー
		ソフラウルファー(S~LLサイズ)		ベージュ・ネイビー	S~LL(6規格)
	8の字固定バンドつきアーチパッド	ソフラウルファーアーチ(14mm)		ベージュ・ネイビー	S~L(4規格)
		ソフラウルファーアーチ(18mm)		ベージュ・ネイビー	S~L(4規格)
	8の字固定バンドつき足底板	ソフラウルファーOA	ベージュ・ネイビー	S~L(4規格)	
手関節	TFCC固定バンド	ソフラウルファーTFCC		ベージュ・ネイビー	フリー/XL
	手関節固定バンド	ソフラウルファーリスト		ベージュ・ネイビー	
	CM関節固定バンド	ソフラウルファーCM		ベージュ・ネイビー	
		ソフラウルファーエピコン		ブラック *中指ベルトはグレーです。	
	上腕骨外上顆バンド	ソフラウルファーエピコン		ブラック *中指ベルトはグレーです。	


TAKETORA
ウルファースリーズ

ウルファースリーズ リスト

手関節固定バンド



●例:左手

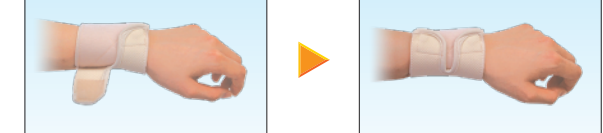

①手首に巻き、上部ベルトで仮接着します。 ②下部ベルトを接着し、微調節します。

カラー	商品番号	規格(手首廻り)	販売単位	JAN CODE
ベージュ	037910	フリー 12cm~20cm	1枚	4958995379105
	037916	XL 16cm~24cm	1枚	4958995379167
ネイビー	037980	フリー 12cm~20cm	1枚	4958995379808
	037986	XL 16cm~24cm	1枚	4958995379860

●留め部分がセパレートタイプなので、サポート力を自在に調節できます。


*この商品のメーカー出荷はケース単位(6枚入)です。

ウルファースリーズ CM

CM関節固定バンド



●例:左手/★印:母指CM関節

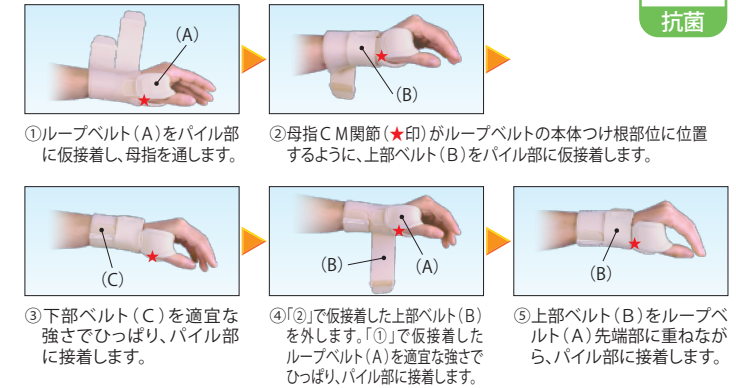

- 上部ベルトをループベルトに重ねることにより、より適度なサポートができます。
- 手首の留め部分がセパレートタイプなので、サポート力を自在に調節できます。
- 母指指間の対立位を効果的に保持します。
- 母指IP関節の運動を妨げません。

カラー	商品番号	規格(手首廻り)	販売単位	JAN CODE
ベージュ	037920	フリー 12cm~20cm	1枚	4958995379204
	037926	XL 16cm~24cm	1枚	4958995379266
ネイビー	037930	フリー 12cm~20cm	1枚	4958995379303
	037936	XL 16cm~24cm	1枚	4958995379365

*この商品のメーカー出荷はケース単位(6枚入)です。

ウルファースリーズ エピコン

上腕骨外上顆バンド



●例:右手



①手首ベルトをパイル面が外側になるように手首に装着し、手関節を固定します。 ②中指ベルトの1本になっている方を、手の甲側から手首ベルトに接着します。 ③中指ベルトの2本に分かれている方を、中指を挟んで手のひら側へ通し、手首ベルトに接着します。中指が手のひら側へ適度に傾くように調整します。

- 短横側手根伸筋と総指伸筋の中指成分を伸展制御することにより、上腕骨外上顆部にかかるストレスを軽減します。
- 手首ベルトで手関節を固定することにより、短横側手根伸筋の伸展を制御します。
- 中指ベルトで中指を押さえることにより、総指伸筋の中指成分の伸展を制御します。
- 中指ベルトにより屈曲位を持続させることで、ストレッチ効果が得られます。

カラー	商品番号	規格(手首廻り)	販売単位	JAN CODE
ブラック	037830	フリー 12cm~20cm	6組入	4958995378306
	037836	XL 16cm~24cm	6組入	4958995378368

*ケース単位...10組入 *1組...手首ベルト(ブラック)1枚、中指ベルト(グレー)1枚

発売元




URL <http://takatora-web.com/> E-mail info@takatora-web.com

取扱店

ウルファアー®

足関節固定バンド フリーサイズ

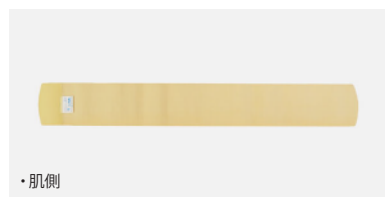

- フィギュアエイトの効果に応用した足関節固定帯です。
- 適度な伸縮性で距骨の動揺を制限し、安定した圧迫固定ができます。
- バンド外側全面が面ファスナー[メス]になっているため、自由な位置で接着できます。

●例：右足




カラー	商品番号	規格 (バンド寸法)	販売単位	JAN CODE
ベージュ	037670	フリー 8cm×60cm	1枚	4958995376708
ブラック	037680	フリー 8cm×60cm	1枚	4958995376807

・この商品のメーカー出荷はケース単位 (6枚入) です。


ウルファアー®

足関節固定バンド S~LLサイズ

- フィギュアエイトの効果に応用した足関節固定帯です。
- 適度な伸縮性で距骨の動揺を制限し、安定した圧迫固定ができます。

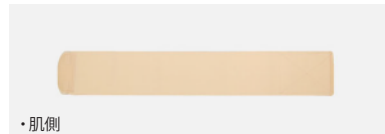

●例：右足

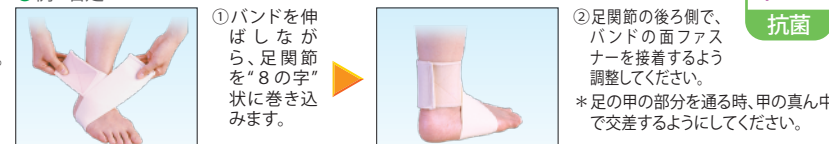



カラー	商品番号	規格 (バンド寸法)	販売単位	JAN CODE
ベージュ	037942	S 6cm×35cm	1枚	4958995379426
	037943	M 6cm×40cm	1枚	4958995379433
	037947	MX 8cm×45cm	1枚	4958995379471
	037944	L 8cm×50cm	1枚	4958995379440
	037948	LX 8cm×55cm	1枚	4958995379488
ネイビー	037945	LL 8cm×60cm	1枚	4958995379457
	037952	S 6cm×35cm	1枚	4958995379525
	037953	M 6cm×40cm	1枚	4958995379532
	037957	MX 8cm×45cm	1枚	4958995379570
	037954	L 8cm×50cm	1枚	4958995379549
037958	LX 8cm×55cm	1枚	4958995379587	
037955	LL 8cm×60cm	1枚	4958995379556	

・この商品のメーカー出荷はケース単位 (6枚入) です。

ウルファアー® OA


8の字固定バンドつき足底板

足底板 (取外し可能)

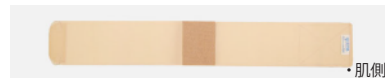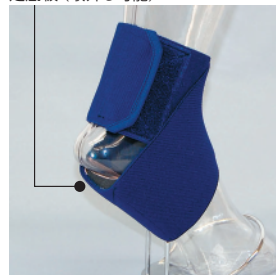

- 足関節を固定する弾力性バンドとマイクロセルスポンジの足底板を組み合わせることにより、足底板の効果がより期待できます。
- フィギュアエイトの効果に応用し、適確に足関節を固定します。
- 足関節固定により、足底板の矯正角が足関節で相殺されることを防ぎます。
- ワンタッチで足底板の固定ができます。

足底板と8の字バンドは容易に取り外しができます。

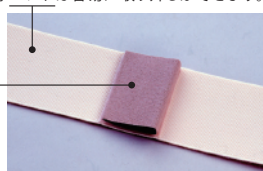

●例：右足 ①(*)...X脚の場合は内側を高く、O脚の場合は外側を高く。



カラー	商品番号	規格 (バンド寸法)	販売単位	JAN CODE
ベージュ	037772	S 8cm×45cm	1枚	4958995377729
	037773	M 8cm×50cm	1枚	4958995377736
	037777	MX 8cm×55cm	1枚	4958995377774
	037774	L 8cm×60cm	1枚	4958995377743
ネイビー	037962	S 8cm×45cm	1枚	4958995379624
	037963	M 8cm×50cm	1枚	4958995379631
	037967	MX 8cm×55cm	1枚	4958995379679
	037964	L 8cm×60cm	1枚	4958995379648
	037770	替えスポンジ 最大部位での高さ12mm	1個	4958995377705

・S,M,MX,L:ケース単位...5枚入

[US PAT.]

ウルファアー® アーチ

8の字固定バンドつきアーチパッド



- 足底板 (アーチパッド) を二峰性にする事で、内側縦アーチで発生する内返しを、外側縦アーチで制限できます。
- 二峰性アーチパッドにより、外側への動揺を軽減し、歩行を補助します。
- 足関節固定により内反を軽減し、安定させます。
- バンドの牽引力でアーチパッドを足底部に密着させることで、体重がかかっていない時にも、持続的にアーチ形成することができます。
- バンドにより、アーチパッドが固定されるので、室内など靴を履かない場面でもお使い頂けます。

便利な着脱用ストラップ付き。少ない力で着脱できます。

●例：右足



14mm規格



カラー	商品番号	規格 (バンド寸法)	販売単位	JAN CODE
ベージュ	037972	14mm S 8cm×45cm	1枚	4958995379723
	037973	14mm M 8cm×50cm	1枚	4958995379730
	037977	14mm MX 8cm×55cm	1枚	4958995379778
	037974	14mm L 8cm×60cm	1枚	4958995379747
ネイビー	037862	14mm S 8cm×45cm	1枚	4958995378627
	037863	14mm M 8cm×50cm	1枚	4958995378634
	037867	14mm MX 8cm×55cm	1枚	4958995378672
	037864	14mm L 8cm×60cm	1枚	4958995378641

・この商品のメーカー出荷はケース単位 (5枚入) です。

・アーチパッド部 最高部14mm、第二高部9mm

[PAT.]

18mm規格



カラー	商品番号	規格 (バンド寸法)	販売単位	JAN CODE
ベージュ	037672	18mm S 8cm×45cm	1枚	4958995376722
	037673	18mm M 8cm×50cm	1枚	4958995376739
	037677	18mm MX 8cm×55cm	1枚	4958995376777
	037674	18mm L 8cm×60cm	1枚	4958995376746
ネイビー	037682	18mm S 8cm×45cm	1枚	4958995376821
	037683	18mm M 8cm×50cm	1枚	4958995376838
	037687	18mm MX 8cm×55cm	1枚	4958995376876
	037684	18mm L 8cm×60cm	1枚	4958995376845

・この商品のメーカー出荷はケース単位 (5枚入) です。


・アーチパッド部 最高部18mm、第二高部9mm

ウルファアー® TFCC

TFCC固定バンド



●例：右手

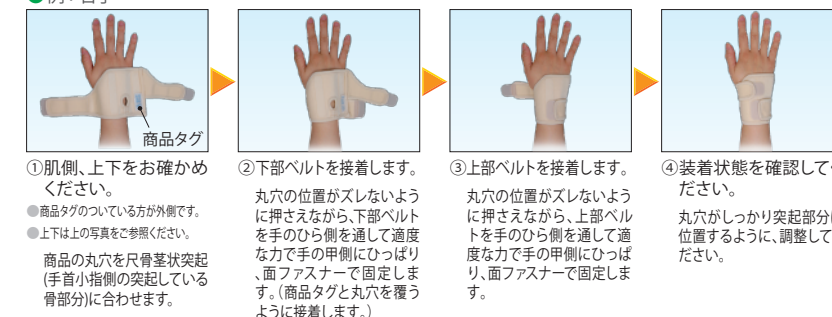

- 上部ベルトと下部ベルトでの固定調整により、症状にあわせた適度な固定が可能です。
- 尺骨側にステーが配置されるように装着できるので、効果的な尺屈制限が可能です。
- 手の甲側にもステーがくるように配置されていますので、背屈の制限も期待できます。

カラー	商品番号	規格 (手首廻り/幅)	販売単位	JAN CODE
ベージュ	037820	フリー 12cm~20cm/10cm	1枚	4958995378207
	037826	XL 16cm~24cm/12cm	1枚	4958995378269
ネイビー	037850	フリー 12cm~20cm/10cm	1枚	4958995378504
	037856	XL 16cm~24cm/12cm	1枚	4958995378566

・この商品のメーカー出荷はケース単位 (5枚入) です。

[JP PAT.]