

Digital Lensmeter DL Series

仕 様

測定範囲	球面度数	-25D～+25D	(0.01/0.12/0.25 step)
	柱面度数	0～±10D	(0.01/0.12/0.25 step)
	軸角度	0～180°	(1°)
	加入度数	0～+10D	(0.01/0.12/0.25 step)
	プリズム度数	0～+10△	(0.01/0.12/0.25 step)
被検レンズ	未加工レンズ（径：100mm） フレーム入り加工済レンズ	—— 単レンズ、多焦点レンズ、累進焦点レンズ	
	ハードコンタクトレンズ ソフトコンタクトレンズ	—— 専用レンズ受け使用	
赤外線透過率測定＊	0～100％ 測定ステップ：5％		
瞳孔間距離測定＊	45～85％ 測定ステップ：0.5mm		
測定波長	525nm		
電源定格	100～240V 50/60Hz		
消費電力	40VA		
プリンター＊＊	サーマルプリンター（用紙幅58mm）		
モニター	カラー液晶モニター（5.7インチ）		
寸法・重量	170mm（W）×205mm（D）×468mm（H）（400mm：モニター折りたたみ時） 約4.3kg		
使用環境条件	温度範囲：10℃～40℃ 湿度範囲：30～90％HR（但し、結露状態を除く）		

*：DL-1000 のみ
**：DL-1000/900 のみ

Models	DL-1000	DL-900	DL-800
紫外線透過率	○	—	—
瞳孔間距離測定	○	—	—
プリンター	○	○	—

製造販売元

Rexxam
株式会社レクザム

香川工場
〒761-1494 香川県高松市香南町池内958
TEL.087-879-3131 FAX.087-879-6837

お問い合わせ先

アイケア機器営業部 東京オフィス
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2丁目4番地2 神田アーバンビル7階
TEL:03-6262-9471 FAX:03-6262-9472
E-mail:eye@rexexam.co.jp
URL:http://www.rexxam.co.jp

お問合せ先／E-mail eye@rexexam.co.jp

レクザム 検索

SHIN-NIPPON by **Rexxam**

Digital Lensmeter DL Series

DL-1000/900/800



Digital Lensmeter DL Series

使い勝手の良さと精度、デザインを追求したモデル。

Stylish Design & Accuracy

新型・薄型フラットモニターにより、美しく視認性の良いグラフィック表示。薄く、洗練されたボディーデザインは、様々な空間とマッチ。新設計の光学部によって、測定精度の良さを実現しました。



新世代・DESIGN & STYLE

精緻なディテールとクオリティー。さまざまな空間とマッチする洗練されたフォーム／カラー。ツートンの高級メタリック&パール塗装。シャープで且つやわらかな曲面をみせる造形はお客様に信頼感をアピールします。

コンパクト&スリムなデザイン

背面を壁に付けてスッキリ配置できます。



グリーン光

従来の赤色LEDからグリーンLED採用によりABBEの設定を変更しなくても精度の高い測定が可能になりました。



便利なアクセサリBOX

モニターの後ろに、便利なアクセサリBOXを搭載。スベアのプリント用紙を丸ごと収納できます。



新開発。一体型レンズホルダー&印点ペン

エルゴノミックスの追求によって、レンズホルダーと印点ペンを一体にしました。印点ペンのストロークを短くする事で、操作性が向上して、精度の高い印点が可能になりました。



Easy & Comfortable Operation

5.7インチの薄型フラットモニターは美しく視認性に優れ、モニターがチルト（60°）することで、立ったままでも、座ったままでも操作が可能。新設計のソフトウェア、画面インターフェースは、簡単に、直感的に、累進レンズの測定ができるようになりました。


視認性に優れた画面インターフェイス

アライメントが合うと色が変わり、測定が終了するとデータ窓の色が変わります。測定状態を視覚で分かりやすく表現します。



直感的操作が可能な累進レンズ測定画面

モニター内の表示と連動したリアな動きを実現。誰でも簡単に直感的に累進レンズの測定ができます。

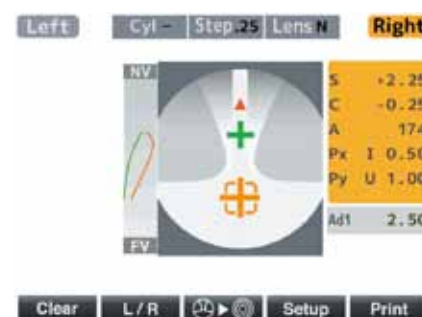

UV（紫外線）透過率測定機能を搭載

レンズの度数の測定と同時に、UV（紫外線）透過率を測定できます。結果は、モニターにすぐに表示されます。



フェザータッチ・センサーボタン

画面との連動性／インターフェイスを考慮したフェザータッチ・センサーボタンは、軽く、確実な操作感を実現しました。



視野角が広く見やすいチルトモニター

視野角が広く、またチルトする事で、立ったまま、座ったままでも操作が可能です。



2つの鼻当てパッドで、より簡単なPD測定を実現

左右に鼻当てパッドを2つ取り付けることで、PD測定がより簡単に、よりスピーディになりました。

