



福祉機器ブランドマーク

超軽量マグネシウム合金製4点杖

アルファ

テトラ・ケイン α

Sタイプ 500g \pm 3% 59.5~74.5cm ● Mタイプ 530g \pm 3% 69.5~84.5cm ●

右用、左用の切替ができます。



右用



左用


身長に応じて2つの長さを用意しました。

- ・Sタイプ 59.5~74.5cm
- ・Mタイプ 69.5~84.5cm (1cm単位で調整可能)
- ・垂直耐荷重 75kg

日本古色

色調は、長岡造形大学・松丸教授の監修により日本古色をベースにアレンジしました。

青墨(あおずみ)

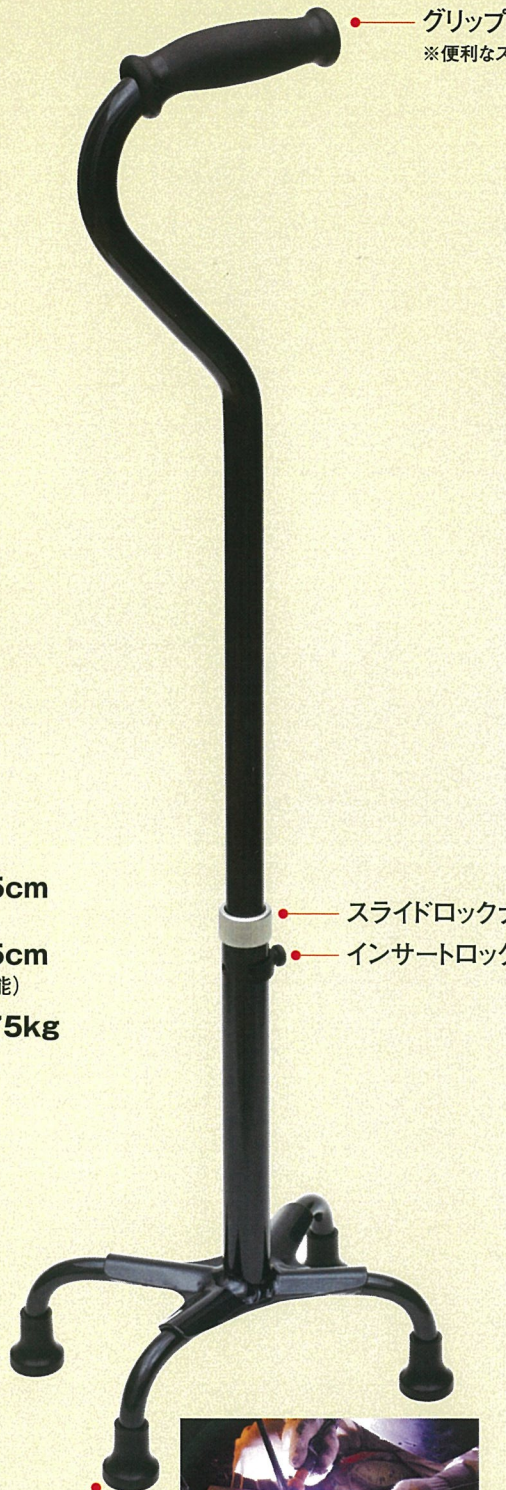


グリップ

※便利なストラップ付もあります。


従来品と比べて、下部を太くし、つねね部分を溶接しました。これにより力をかけやすくなりました。

安定した歩行をサポート


1cm単位で高さ調整ができます。

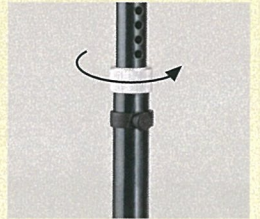

スライドロックナットを1回転緩めます。

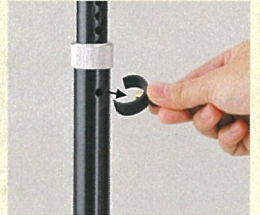


インサートロックピンを引き抜きます。

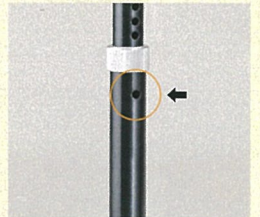


使用しやすい高さに調整し、穴の位置をあわせませす。



インサートロックピンを合わせた穴に差し込みます。

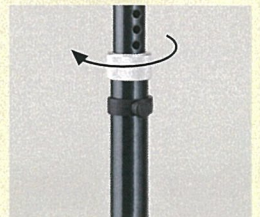

スライドロックナットをしめ、固定します。しっかり固定されていることを確認して、ご使用ください。

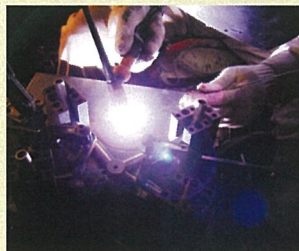

加工が難しいといわれるマグネシウムを熟知した熟練工の手作業で製造しています。

脚ゴム

マグネシウム合金製超軽量4点杖

●製造販売元

田辺プレス株式会社
マグネシウム事業部

〒955-0814 新潟県三条市金子新田984-21
TEL0256-32-1492 FAX0256-35-8095

・カタログと実際の製品とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

日本製