



DEHPフリー

ISO80369-3に準拠しております。

アトム栄養カテーテルGS 紫色 認証番号: 231ADBZX00033000

製品コード	造影ライン	フレンチサイズ	チューブ		発売単位	価格
			外径	長さ		
43590	●	3Fr	1.0mm	40cm	1箱 (50本入)	
43591	●	4Fr	1.35mm			
43592	●	5Fr	1.7mm			
43593	●	6Fr	2.0mm	40cm		
43594	●		60cm			
43595	●	7Fr	2.35mm	70cm		
43596	●	8Fr	2.7mm	80cm		

材質: ポリ塩化ビニル(可塑剤:TOTM)、ABS樹脂 エチレンオキサイドガス滅菌済

DEHPフリー


ISO80369-3に準拠しております。

アトム延長用チューブGS 紫色 認証番号: 231ADBZX00032000

製品コード	フレンチサイズ	外径	チューブ		発売単位	価格
			長さ	容量		
43600	4Fr	1.35mm	60cm	約0.43mL	1箱 (50本入)	
43601			100cm	約0.66mL		
43602	6Fr	2.0mm	60cm	約0.85mL		
43603			100cm	約1.31mL		

材質: ポリ塩化ビニル(可塑剤:TOTM)、ABS樹脂 エチレンオキサイドガス滅菌済

# アトム栄養カテーテルGS・アトム延長用チューブGS

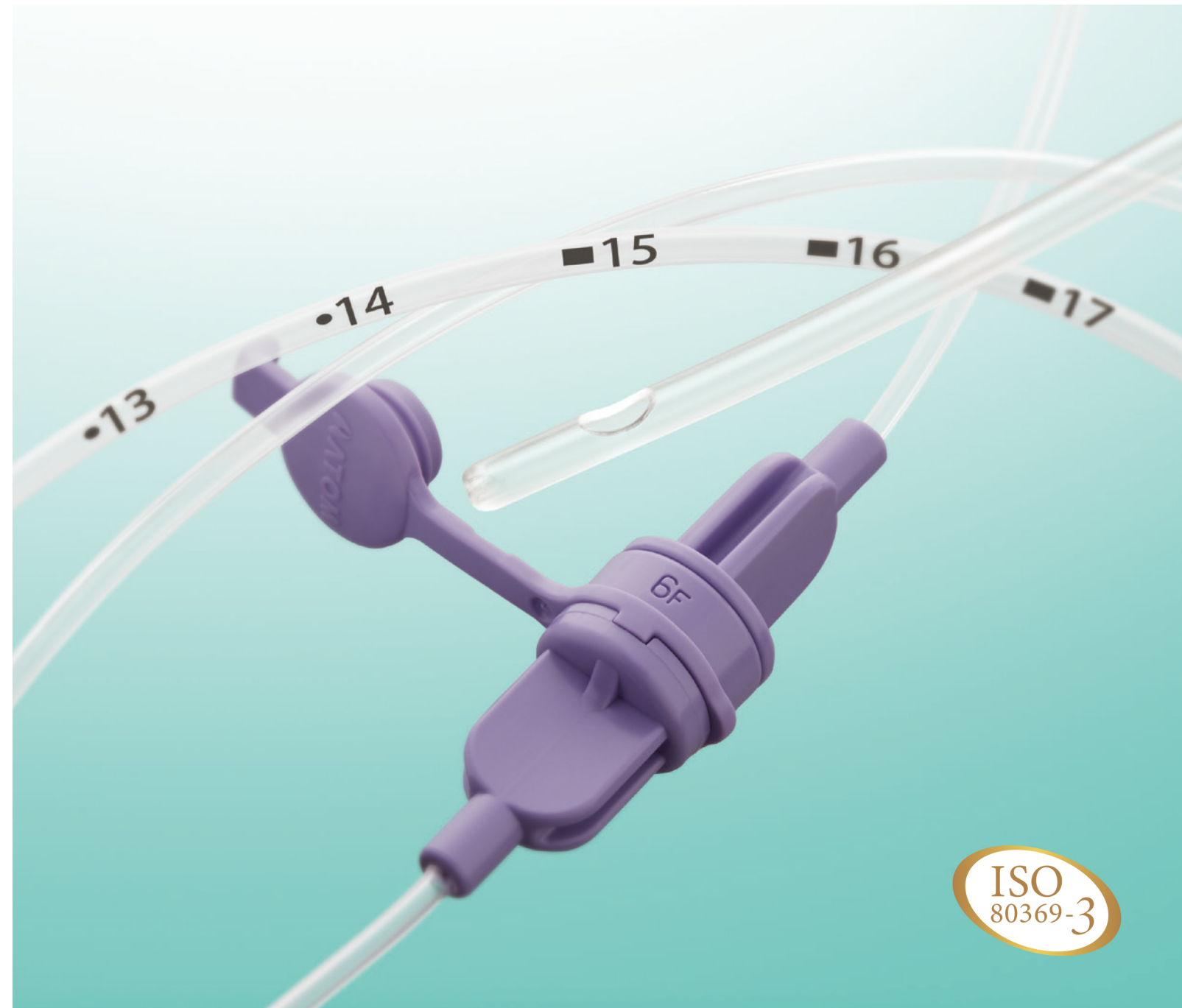

ISO 80369-3

既存規格製品と新規規格製品を接続するための「変換コネクタ」をご用意しております。



DEHPフリー

変換コネクタ 紫色

変換コネクタが2色に色分けされているので、既存規格製品(黄色側)と新規規格製品(紫色側)を接続する方向が視覚的にわかります。

認証番号: 231ADBZX00032000

製品コード	型式	発売単位	価格
43608	旧-新タイプ	1箱 (50個入)	
43609	新-旧タイプ		

材質: ポリ塩化ビニル(可塑剤:TOTM)、ABS樹脂 エチレンオキサイドガス滅菌済

※「変換コネクタ」をご利用いただくことで、既存規格製品と新規規格製品の接続が可能になります。

表示マークについて

DEHPフリー

DEHPに比べて溶出が少なく、精製毒性の低い可塑剤(TOTM)を使用した製品を示すマークです。

# 児に安心して栄養を届けられる8つの特長

## コネクタ部分の特長

特長  
**1**

持ちやすく、つまみやすい  
コネクタ形状

コネクタの持ち手部分が平たくなっています。

特長  
**2**

固定の目安がわかりやすい

コネクタを隙間なく接続することが、固定の  
目安になります。



特長  
**3**


キャップをワンアクションで  
閉められる

キャップを押し込むだけのワンアクション  
で閉めることができます。

特長  
**4**

フレンチサイズの確認  
が容易

コネクタ部分にフレンチサイズを  
刻印しています。

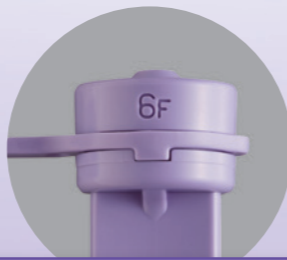


## チューブ部分の特長

特長  
**5**

詰まりにくい先端と側孔

ワイドサイズの先端と側孔なので、母乳添加用粉末などを  
混ぜた母乳でも、詰まりにくい構造になっています。

※当社比較による

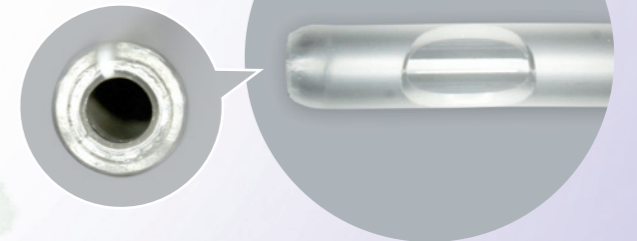

特長  
**6**

読みやすい目盛

数値には読みやすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用し、頻用する15、16、17cmの  
目盛はマークを変えています。

特長  
**7**

キンクしにくいチューブ

チューブには、折れ・潰れ・よれが  
発生しにくい工夫をしています。

※当社比較による

特長  
**8**

挿入深度がわかりやすい目盛

数値入りの目盛が1cmごとに印字されているので、挿入深度の再確認が  
しやすくなっています。また、6、7、8Frでは目盛が最大50cmまで5cm  
ごとに印字しているため、乳幼児でも幅広くご使用いただけます。

