

Zart

[ザート]

静 音

振動が少ない

充電式

コンパクト

最大36,000回転

最大8時間連続使用

バッテリー分離タイプ

ブラシレスハンドピース



セラミックカッター3本付



処置イメージ



処置イメージ

マイクロドリル ザート

品番: SN308S-W

JCT 株式会社シェイ・シー・ティ



マイクロドリル ザート

品番: SN308S-W

操作部とバッテリーが切り離せ、持ち運びに便利です。

また、追加でバッテリーをご購入していただくと
長時間の使用も気にせずご利用できます。

製品構成

- 本体(操作モジュール) 1
- 本体(バッテリー部) 1
- フットスイッチ 1
- ハンドピース用シリコンスタンド .. 1
- ACアダプタ 1
- セラミックカッター 3
- ブラシレスハンドピース 1

セラミックカッター3本セット



セラミックカッター
円錐台型
中目
SN808#2M

セラミックカッター
円柱型
テーパートップ 中目
SN808#4M

セラミックカッター
細部ショート
中目
SN808#1

セラミックカッターについて

セラミックは、ステンレス製に比べ軽く、耐久性・耐熱性に優れています。切削摩擦で熱くなりにくく、スムーズな削り心地が持続します。耐腐食性にも優れており衛生的にご利用いただけます。

本体(操作モジュール)

品番: X01



1,000~36,000rpm ダイヤルを回して調整。
液晶に回転数が表示されます。

本体(バッテリー部)

品番: X02



約3時間の充電で最大8時間の
使用が可能です。

ハンドピース用シリコンスタンド

品番: X05



フットスイッチ (on-off)

品番: X03




ACアダプタ (MICRO USB)

品番: X06




ブラシレスハンドピース

品番: SN03S

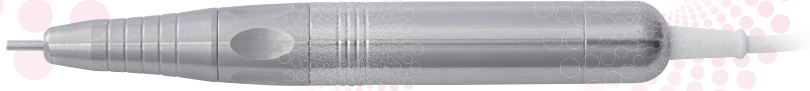


低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。
振動・騒音・発熱を最小限に抑えた構造です。

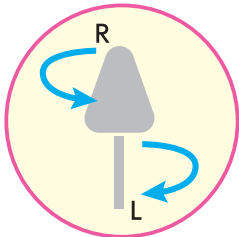

推奨

削る際、回転方向の逆に向かって削ってください。
回転方向と同じ方向に向けて削ると危険です。

イメージ

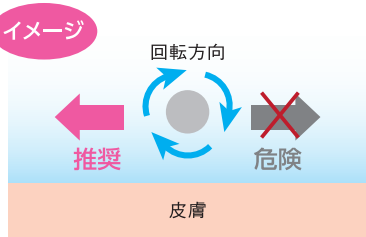

回転方向
危険
推奨
皮膚

ディスクタイプの サンドペーパーもございます。



サンドペーパー
ハンド用マンドレール
198564-3

サンドペーパー
細目

サンドペーパー
中目

サンドペーパー
粗目

飛散防止用品・各種ニッパー・各種アタッチメントバーを取扱っております。お問い合わせは弊社までご連絡ください。

詳しくはWEBから

JCTフットケア

検索

<http://www.jct-inc.jp/>

● 総販売元: **JCT 株式会社ジェイシーティ**

販売会社

広島本社 〒731-0138 広島市安佐南区祇園1-28-7
 TEL(082)871-3308 / FAX(082)850-3235
 関東支店 TEL(045)910-0867 / FAX(045)912-7844
 福島営業所 TEL(024)546-8051 / FAX(024)546-8070
 北関東営業所 TEL(049)298-8844 / FAX(049)283-7100
 関西営業所 TEL(075)951-5585 / FAX(075)951-5589
 大阪営業所 TEL(06)4806-7630 / FAX(06)4806-7631
 高松営業所 TEL(087)815-2733 / FAX(087)815-3844
 福山営業所 TEL(084)973-0660 / FAX(084)925-5430
 広島営業所 TEL(082)850-3160 / FAX(082)850-3236
 山口営業所 TEL(083)974-4773 / FAX(083)974-4766
 九州営業所 TEL(093)663-5822 / FAX(093)663-5825
 熊本営業所 TEL(096)278-7750 / FAX(096)278-7751