

# Artisan

フットケアドリル 充電式 アーチザン

品番: J-MT

軽 量


静 音

ウエストポーチ付



## 製品特徴

- ✓ ハンドピースはブラシレスモーター搭載
- ✓ 静音設計で振動が少ない
- ✓ 正逆回転機能付き
- ✓ 充電残量と回転数表示(最大30,000回転)
- ✓ からみにくいストレートコード
- ✓ 2時間の充電で最大7時間連続回転

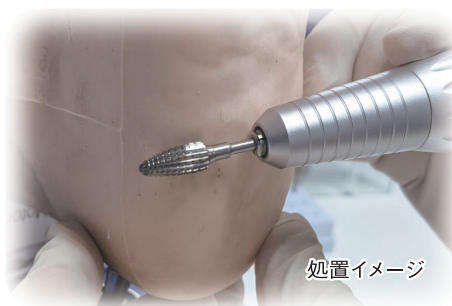

## フットケアドリル 充電式 品番:J-MT

### 製品構成


- 本体 ..... 1
- ハンドピース ..... 1
- ハンドピース台 ..... 1
- フットスイッチ ..... 1
- 持運び腰ベルト ..... 1
- 充電コード ..... 1
- 包装箱 ..... 1
- 取扱説明書 ..... 1



付属のウエストポーチで写真のとおりに収納ができます。設定の操作も行えます。



軽量160g

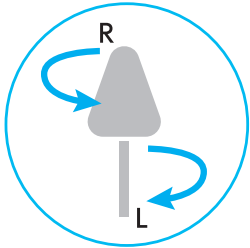

### 推奨

削る際、回転方向の逆に向かって削ってください。回転方向と同じ方向に向けて削ると危険です。

### イメージ



皮膚

## オプション

### 推奨アタッチメントバー処置用セットⅢ 洗浄消毒 滅菌対応

### 特徴

- ダイヤモンド  
繊細で精度の高い研磨作業が快適に行えます。
- タングステン  
厚くて硬化した部位の研削に適しています。
- セラミック  
熱を持ちにくく耐久性に優れています。



### アタッチメントバーを洗浄するための推奨事項

清潔でより長くご使用頂く為に、適切な方法で洗浄する必要があります。金属ブラシのご使用は避けてください。ナイロンブラシをご使用いただき流水でブラッシングして削りカスを取り除いてください。

### ディスクタイプの サンドペーパーもご便利です。



飛散防止用品・各種ニッパー・各種アタッチメントバーを取扱っております。お問い合わせは弊社までご連絡ください。

詳しくはWEBから JCTフットケア

検索

<http://www.jct-inc.jp/>



● 総販売元: **JCT 株式会社ジェイシーティ**

販売会社

広島本社 〒731-0138 広島市安佐南区祇園1-28-7  
 TEL(082)871-3308 / FAX(082)850-3235  
 関東支店 TEL(045)910-0867 / FAX(045)912-7844  
 福島営業所 TEL(024)546-8051 / FAX(024)546-8070  
 北関東営業所 TEL(049)298-8844 / FAX(049)283-7100  
 関西営業所 TEL(075)951-5585 / FAX(075)951-5589  
 大阪営業所 TEL(06)4806-7630 / FAX(06)4806-7631  
 高松営業所 TEL(087)815-2733 / FAX(087)815-3844  
 福山営業所 TEL(084)973-0660 / FAX(084)925-5430  
 広島営業所 TEL(082)850-3160 / FAX(082)850-3236  
 山口営業所 TEL(083)974-4773 / FAX(083)974-4766  
 九州営業所 TEL(093)663-5822 / FAX(093)663-5825  
 熊本営業所 TEL(096)278-7750 / FAX(096)278-7751