


**見本**



5. 偏置荷重 \*試験荷重=100 g

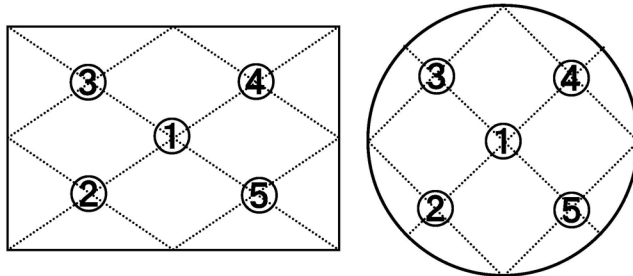

位置	指示値
①	100.0001 g
②	100.0000 g
③	100.0003 g
④	100.0002 g
⑤	99.9999 g
①との最大差	0.0002 g

6. 正確さ

No. ( <i>I</i> )	風袋荷重 ( <i>T<sub>i</sub></i> )	荷重 ( <i>W<sub>i</sub></i> )	指示値 ( <i>I<sub>i</sub></i> )
1	0 g	200 g	200.0001 g
2	0 g	50 g	50.0000 g
3	50 g	50 g	50.0000 g
4	100 g	50 g	50.0001 g
5	150 g	50 g	49.9999 g
6	50 g	50 g	50.0000 g

7. 校正結果

風袋荷重	公称値	偏差	拡張不確かさ	包含係数 <i>k</i>
0 g	200 g	0.00011 g	0.00029 g	2
0 g	50 g	0.00000 g	0.00016 g	2
50 g	50 g	0.00000 g	0.00016 g	2
100 g	50 g	0.00010 g	0.00016 g	2
150 g	50 g	-0.00010 g	0.00016 g	2
50 g	50 g	0.00000 g	0.00016 g	2

備考

- 1). 拡張不確かさは、信頼の水準約 95 %に相当し、包含係数 *k* は上記の通りである。
- 2). 校正の条件  
前負荷実施 200 g
- 3). 感度調整実施 調整前 : 200.0008 g  
使用分銅 : 200 g (4<sub>1</sub>)

以上