




小型クリーンボトル

ポリエチレン製クリーン容器

UN規格適合品



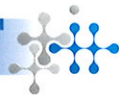

セキスイのクリーン容器は、研究開発から量産まで対応します。

研究開発から量産まで一気通貫

ラボから量産までスケールアップが容易で、リードタイムが短縮できます。

セキスイの小型クリーンボトルは、20Lや200Lのセキスイクリーン容器と同じ原料を使用していますので、量産化に伴うスケールアップ時に容器の性能評価の手間が省けます。

優れたクリーン性能で、内容液の品質を保持します。

様々な分野で実績のあるセキスイクリーン容器と同じ原料を使用しており、内容液への成分溶出を極限まで抑えています。

危険物輸送に必要なUN規格に対応しています。

UN規格(危険物の輸送に関する国連勧告)に適合しております。

UN等級:1H1/Y1.5/200



確かな実績を研究開発の分野にも

セキスイクリーン容器は、半導体や液晶などクリーン性能が求められる分野で数多くの実績があります。また、100mL小型ボトルから200Lプラスチックドラムまで同じ原料を使用していますので、安心してお使い頂けます。



元素	ブランク	1ヶ月	4ヶ月
Li	1	1	1
B	37	32	35
Na	23	28	41
Mg	8	6	5
Al	13	27	7
K	3	2	11
Ca	26	12	10
Ti	15	25	17
V	1	1	1
Cr	4	10	6
Mn	1	1	1
Fe	5	13	5
Co	1	1	1
Ni	1	3	2
Cu	3	5	1
Zn	4	5	8
As	1	2	3
Ag	1	4	2
Cd	1	1	1
Sn	3	7	10
Ba	3	2	1
W	1	1	2
Au	1	1	1
Pd	1	1	1

使用試薬: PGMEA
 保管環境: 23°Cクリーンルーム内(クラス1000)
 試験容器: 20Lクリーン容器(ナチュラル色)
 分析装置: NEXION300S(パーキンエルマー社)
 ※数値は参考値です。
 ※性能を保証するものではありません。

製品仕様



品名	容量(ℓ)	寸法(mm)	カラー	UN等級	出荷単位
01AL-F	0.1	φ52×85.5	ナチュラル	Y1.9/200	20本/ケース
02AL-F	0.25	φ64×127			
05AL-F	0.5	φ75×191	ナチュラル グレー	Y1.5/200	10本/ケース
1AL-F	1.0	φ102×191			

セキスイクリーン容器ラインナップ



※各製品の詳細や仕様については、お問い合わせください。

積水成型工業株式会社 <https://www.sekisuseikei.co.jp/>

東日本ブロー営業所

〒101-0024
 東京都千代田区神田和泉町1番地
 (住友商事神田和泉町ビル4階)

TEL.03-6837-0302 FAX.03-3865-5652

西日本ブロー営業所

〒530-6125
 大阪市北区中之島三丁目3番23号
 (中之島ダイビル25階)

TEL.06-6479-0273 FAX.06-6479-0264

ISO 9001 登録
 JQA-QM3807

※色調は実物と異なることがあります。
 ※改良のため予告なしに仕様変更する場合があります。