

for Best Care

ALCARE

アンシルク®シリーズ

Ansilk Series



毎日、快適に
履き続けられること。

弾性ストッキング
Elastic Stockings

www.alcare.co.jp


日本人の体型にフィットした設計。 快適な装着で下肢静脈血流を 促進します。

アンシルクシリーズは、

日本人の体型データに基づいて設計した
医療用弾性ストッキングです。

足首の圧迫圧を最大とし、大腿部に向けて
段階的に圧迫圧を減少させる

C&G (Compression & Gradation) 構造により、
下肢静脈血流を促進。高いフィット性で
日常的に心地よく履き続けられます。

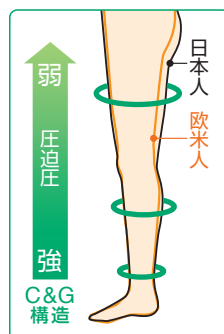

患者さんに合わせて 3種類の圧迫圧から選択できます。

圧迫圧 19hPa 14mmHg	圧迫圧 27hPa 20mmHg	圧迫圧 40hPa 30mmHg
●アンシルク・1	●アンシルク・2 ●アンシルク・2 ブライト ●アンシルク・2 ソックス	●アンシルク・3

「hPa(ヘクトパスカル)」は、圧力を表す国際単位です。数値が大きくなるほど脚を圧迫する力が強くなることを表します。(1hPa=0.75mmHg)

※アンシルクシリーズは医療機器です。圧迫圧選定の際は、必ず医師の指導を受けてください。

日本生まれのアンシルクシリーズだから、 履き続けられる理由があります。

- 日本人体型に基づく高いフィット性**
日本人の体型データの分析と研究から設計、開発。高いフィット性で快適な装着をもたらし、脚の各部位を的確に圧迫して、下肢静脈血流を促進します。
- 柔らかく履きやすい生地を使用**
伸縮性のある柔らかな生地を採用。力の弱い女性や高齢者の方でも着脱しやすくなっています。
- 豊富なラインアップ**
1980年の誕生以来、30年以上にわたり日本人の脚を見つめてきたアンシルクシリーズ。患者さんの要望に合わせて幅広く選択できる、豊富なラインアップを揃えています。

アンシルクシリーズ ラインアップ

圧迫圧	商品名	形状	色	サイズ	掲載ページ
19 hPa 14 mmHg	アンシルク・1	 パンティーストッキング つま先あり	クリア ベージュ ナチュラル ベージュ ブラック	L, M, S	6ページ
		 マタニティー つま先あり	クリア ベージュ	L, M, S	
27 hPa 20 mmHg	アンシルク・2	 ハイソックス つま先あり	ライト ブラウン ブラック	LL, L, M, S, SS	7ページ
		 ハイソックス つま先なし	ライト ブラウン ブラック	LL, L, M, S, SS	
		 ストッキング つま先あり	ライト ブラウン ブラック	LL, L, M, S, SS	8ページ
		 パンティーストッキング つま先あり	ライト ブラウン ブラック	LL, L, M, S, SS	
		 マタニティー つま先あり	ライト ブラウン	LL, L, M, S, SS	
	アンシルク・2 ブライト (薄手タイプ)	 ハイソックス つま先あり	クリア ベージュ ナチュラル ベージュ ブラック ホワイト	L, M, S	9ページ
		 パンティーストッキング つま先あり	クリア ベージュ ナチュラル ベージュ ブラック ホワイト	L, M, S	
	アンシルク・2 ソックス	 ハイソックス つま先あり	ブラック	LL, L, M, S	10ページ
40 hPa 30 mmHg	アンシルク・3	 ハイソックス つま先なし	ライト ブラウン ブラック	LL, L, M, S, SS	11ページ
		 ストッキング つま先なし	ライト ブラウン ブラック	LL, L, M, S, SS	

サイズの選択は、5ページ【サイズ選びのポイント】をご覧ください。

サイズ選びのポイント

適切な圧迫圧と快適なフィット感のために、サイズ選びは重要です。
下記の手順とサイズ表を参考に、正しいサイズをお選びください。


■サイズ計測の手順

- 1 足首、ふくらはぎ、大腿の3つの部位の周囲をメジャーで計測し、サイズ表から適合するサイズをお選びください。
- 2 1で適合するサイズが2つあった場合は、足首周囲が適応範囲の中央値に近いサイズをお選びください。

■サイズ表 (単位:cm)

該当 サイズ	足首周囲	ふくらはぎ周囲	大腿周囲
LL	23~27	40~46	55~64
L	21~25	36~42	50~59
M	19~23	32~38	47~56
S	17~21	28~34	44~53
SS	15~19	24~30	40~49

■形状と計測部位

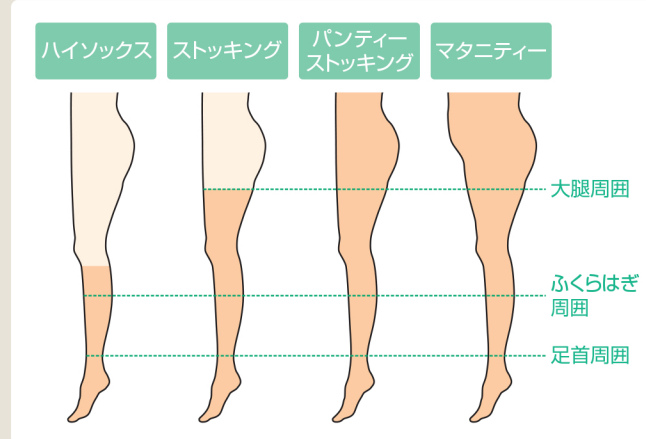

圧迫圧
19hPa
14mmHg

アンシルク®・1

- 足首の圧迫圧は19hPa(14mmHg)で、軽度の圧迫が得られます。
- 薄手の生地で圧迫も軽いので、初めての方でも履きやすくなっています。



パンティーストッキング つま先あり

	サイズ	商品 コードNo.	1函 入数	メーカー希望 小売価格(税抜き)
クリアベージュ	L	18421		
	M	18422	1足	
	S	18423		
ナチュラルベージュ	L	18431		
	M	18432	1足	
	S	18433		
ブラック	L	18441		
	M	18442	1足	
	S	18443		

マタニティー つま先あり

	サイズ	商品 コードNo.	1函 入数	メーカー希望 小売価格(税抜き)
クリアベージュ	L	18451		
	M	18452	1足	
	S	18453		

妊婦さんのための専用設計

- マチのついたゆとりのある立体設計で、大切な腹部をやさしく包み込みます。
- ウエストベルトはボタンでサイズ調節が可能です。妊娠中の腹部周径の変化に対応します。



圧迫圧
27hPa
20mmHg

アンシルク®2

- 足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で、中程度の圧迫が得られます。
- 幅広いサイズと豊富な形状から、適切なタイプをお選びいただけます。



ハイソックス

つま先あり

サイズ	商品 コードNo.	1函 入数	メーカー希望 小売価格(税別)
LL	18461	1足	
L	18462		
M	18463		
S	18464		
SS	18465		



サイズ	商品 コードNo.	1函 入数	メーカー希望 小売価格(税別)
LL	18471	1足	
L	18472		
M	18473		
S	18474		
SS	18475		



ストッキング(両足)

つま先あり

サイズ	商品 コードNo.	1函 入数	メーカー希望 小売価格(税別)
LL	18481	1足	
L	18482		
M	18483		
S	18484		
SS	18485		



サイズ	商品 コードNo.	1函 入数	メーカー希望 小売価格(税別)
LL	18491	1足	
L	18492		
M	18493		
S	18494		
SS	18495		



パンティーストッキング

つま先あり

サイズ	商品 コードNo.	1函 入数	メーカー希望 小売価格(税別)
LL	18511	1足	
L	18512		
M	18513		
S	18514		
SS	18515		



サイズ	商品 コードNo.	1函 入数	メーカー希望 小売価格(税別)
LL	18521	1足	
L	18522		
M	18523		
S	18524		
SS	18525		



マタニティー

つま先あり

サイズ	商品 コードNo.	1函 入数	メーカー希望 小売価格(税別)
LL	18531	1足	
L	18532		
M	18533		
S	18534		
SS	18535		



サイズ	商品 コードNo.	1函 入数	メーカー希望 小売価格(税別)
LL	18541	1足	
L	18542		
M	18543		
S	18544		
SS	18545		



妊婦さんのための専用設計

- マチのついたゆとりのある立体設計で、大切な腹部をやさしく包み込みます。
- ウエストベルトはボタンでサイズ調節が可能です。妊娠中の腹部周径の変化に対応します。



ハイソックス

つま先なし

サイズ	商品 コードNo.	1函 入数	メーカー希望 小売価格(税別)
LL	20271	1足	
L	20272		
M	20273		
S	20274		
SS	20275		



サイズ	商品 コードNo.	1函 入数	メーカー希望 小売価格(税別)
LL	20281	1足	
L	20282		
M	20283		
S	20284		
SS	20285		



ストッキング(片足)

つま先あり

サイズ	商品 コードNo.	1函 入数	メーカー希望 小売価格(税別)
LL	18501	1枚	
L	18502		
M	18503		
S	18504		
SS	18505		



圧迫圧
27hPa
20mmHg

アンシルク®・2 ブライト

- 足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で、中程度の圧迫が得られます。
- 明るく透明感のある薄手生地で、日常生活でも自然に着用いただけます。



ハイソックス つま先あり

サイズ	商品コードNo.	1函入数	メーカー希望小売価格(税抜き)
L	18541	1足	
M	18542		
S	18543		



クリアベージュ	L	18551	1足	
	M	18552		
	S	18553		



ナチュラルベージュ	L	18561	1足	
	M	18562		
	S	18563		



ブラック	L	18571	1足	
	M	18572		
	S	18573		



パンティーストッキング つま先あり

サイズ	商品コードNo.	1函入数	メーカー希望小売価格(税抜き)
L	18581	1足	
M	18582		
S	18583		



クリアベージュ	L	18591	1足	
	M	18592		
	S	18593		



ナチュラルベージュ	L	18601	1足	
	M	18602		
	S	18603		



ブラック	L	18611	1足	
	M	18612		
	S	18613		



アンシルク®・2 ソックス

- 足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で、中程度の圧迫が得られます。
- 綿混素材の靴下タイプで、男女ともに日常生活で着用いただけます。



綿混素材

ハイソックス つま先あり

サイズ	商品コードNo.	1函入数	メーカー希望小売価格(税抜き)
LL	20111	1足	
L	20112		
M	20113		
S	20114		



圧迫圧
40hPa
30mmHg

アンシルク®・3

- 足首の圧迫圧は40hPa(30mmHg)で、強い圧迫が得られます。
- 強い圧迫によるつま先の圧迫を軽減できるよう、つま先が開いています。



ハイソックス つま先なし

サイズ	商品 コードNo.	1函 入数	メーカー希望 小売価格(税抜き)
LL	18621	1足	
L	18622		
M	18623		
S	18624		
SS	18625		

	LL	18631	1足	
	L	18632		
	M	18633		
	S	18634		
	SS	18635		

ストッキング つま先なし

サイズ	商品 コードNo.	1函 入数	メーカー希望 小売価格(税抜き)
LL	18641	1足	
L	18642		
M	18643		
S	18644		
SS	18645		

	LL	18651	1足	
	L	18652		
	M	18653		
	S	18654		
	SS	18655		

ストッキング吊り具 アンシルク®・ガーターベルト

- ストッキングのズレ落ちを防ぎ、男性でも使用できるシンプルなデザイン。
- ウエストサイズや吊り具の長さは調節可能です。



サイズ	商品 コードNo.	ウエスト回	1函 入数	メーカー希望 小売価格(税抜き)
L	11801	75~95cm	1コ	
M	11802	60~80cm		

※アンシルク・2、アンシルク・3のストッキングに
お使いください。


履き方 & 脱ぎ方ガイド

本ガイドを参考に、患者さんが適切に履き続けられるようご指導ください。


※履き方はハイソックス、ストッキング、パンティーストッキング、マタニティー共通です。

※転倒しないよう、必ず座って着脱してください。


■履き方

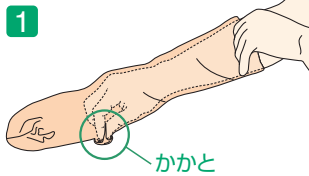

ストッキングの中に手を入れ、内側からかかと部分をつまみます。

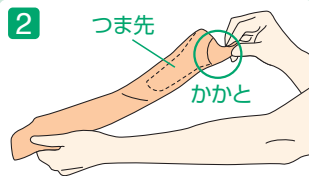

かかと部分を内側でつまんだまま、手を引き抜き、かかと部分まで裏返します。

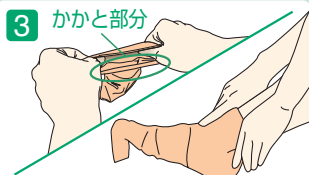

履き込み口を広げ、つま先からかかとまでを履き込みます。




両手の親指をストッキングと足の間に差し込み、半円を描くように動かしながら、少しずつ均一に引き上げていきます。




上まで引き上げたら、かかとの位置が合っているか、シワやたるみがないか、ねじれていないかなどを確認してください。

■脱ぎ方

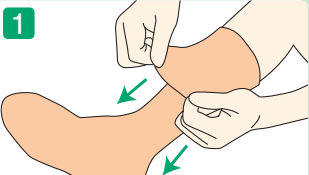


ストッキングを上から足首まで裏返しながらかき下ろします。

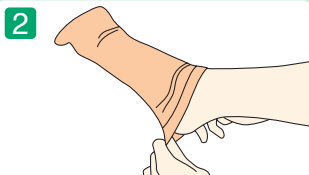


足首とストッキングの間に親指を引っかけて、かかとの部分を引き抜きます。

■正しい装着位置


ハイソックス
脛骨粗面
(膝下の骨の出っぱり)

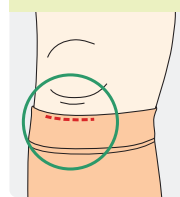

ストッキング
脚の付け根から
5cm程度

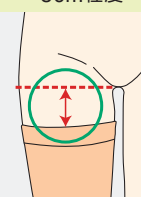


パンティーストッキング
股下に隙間を
作らない

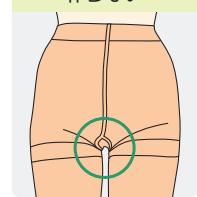


※高伸縮性ですので、引き上げすぎに注意してください。

■装着チェックポイント


シワはありませんか？

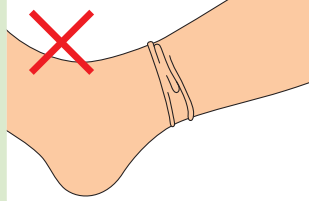


かかとの位置は
あっていますか？

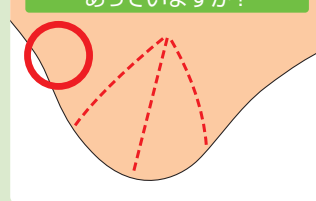


引っ張りすぎていませんか？

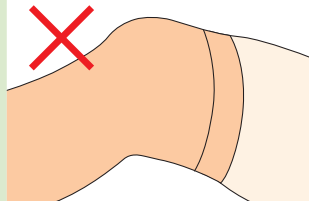

生地は均一に
引き伸ばされていますか？

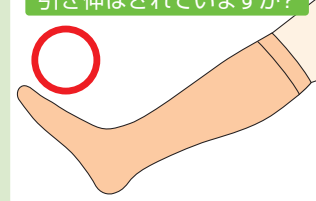

丸まっていませんか？

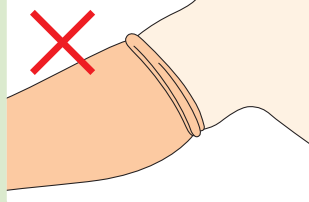

つま先のまくれは
ないですか？



※つま先なしタイプ

サポートツールをご用意しています
アンシルクシリーズWebサイト

<http://www.alcare.co.jp/medical/ansilk/>

患者さんへの指導にお役立ていただける情報とサポートツールを掲載しております。

アンシルク

検索



医療・ケアの情報サイト

アルメディアWEB

履き方 & 脱ぎ方 動画

専用メジャー

など



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル

0120-770-863

土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

- 本カタログの内容は2017年10月現在のものです。
- 商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。