



皮膚の健康を追求したプレミアムモデル

## セルケア®シリーズ

Cellcare

しなやかで、皮膚のような一体感。  
だから、意識せずずっと使い続けられます。  
セルケアなら、はがしたときもきれいな皮膚のまま。  
気持ちまで若くなれそうです。

オストメイトの大きな悩みは、はがすときの皮膚トラブルでした。  
かぶれず、安心できるものになりたい。  
使い続けながら皮膚が健康になるようなものにできないか。  
そうした思いから着目したのが、「セラミド」です。  
ストーマ周囲の皮膚ケアへの応用をめざし、研究を重ねました。  
そして誕生したのが、技術の集大成、セルケアシリーズです。  
トラブルの起こりにくい健康な皮膚を保つセルケアは  
皮膚の健康を求めるオストメイトから信頼をいただいています。



セルケア®1・TDs Cellcare1-TDs

種類	商品コードNo.	規格		袋サイズ(縦×横)	1函入数	メーカー希望 小売価格(非課税)
		穴の大きさ	ストーマ有効径			
30フリー	20151	15mmφ	14~29mm	300mm×150mm	5枚	
40フリー	20152	25mmφ	24~39mm			
50フリー	20153	35mmφ	34~49mm			

交換日数：2~5日  
皮膚保護剤：セラミド配合CPBHS系



セルケア®1・Ds キャップ Cellcare1-Ds Cap

種類	商品コードNo.	規格		袋サイズ(縦×横)	1函入数	メーカー希望 小売価格(非課税)
		穴の大きさ	ストーマ有効径			
30フリー	20131	15mmφ	14~29mm	346mm×148mm	5枚	
40フリー	20132	25mmφ	24~39mm			
50フリー	20133	35mmφ	34~49mm			

交換日数：2~5日  
皮膚保護剤：セラミド配合CPBHS系

**ALCARE**

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1アルカセントラル19階〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
www.alcare.co.jp

●本カタログの内容は2019年5月現在のものです。  
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。  
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ：コールセンター  
フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く  
午前9:00~午後5:00



452-0517-0519/2

for Best Care **ALCARE**

セルケア®1・TDs  
Cellcare1-TDs

セルケア®1・Ds キャップ  
Cellcare1-Ds Cap



術後早期の  
ファーストチョイスに、  
セーフティプレート。

ワンピースオストミーシステム  
1-Piece Ostomy System

www.alcare.co.jp



術後早期のファーストチョイスに安心感を。

〈セーフティプレート〉《セルケア®1・TDs》《セルケア®1・Ds キャップ》



違和感なくフィットして

**追従**

過度の圧迫をせず

**密着**


腹壁の硬さを問わず **追従 + 密着** し、便漏れのリスクを低減します。



セルケアシリーズ面板の特長

面板の種類	平面 (プレートなし)	セーフティプレート	フレキシコンベックス
面板仕様	 中心1.5mm～外縁0.3mmの薄さで、柔軟性に優れ、「かがむ」「ねじる」「反る」などの体の動きに追従する	 高さ3mmのなだらかな傾斜と適度な柔らかさで、腹壁の硬さを問わず密着し、便漏れのリスクを低減する	 高さ4mmの急傾斜と適度な硬さで、ストーマ近接部をしっかり押え、シワやくぼみを補正する
対象	ストーマに高さのある方 ストーマ周囲の状態が落ち着いている方	ストーマに高さのある方 術後早期などケアに不安のある方	ストーマに高さのない方 ストーマ周囲にシワやくぼみのある方

シンプル設計だから、  
初めての方でも覚えやすく、使いやすい。

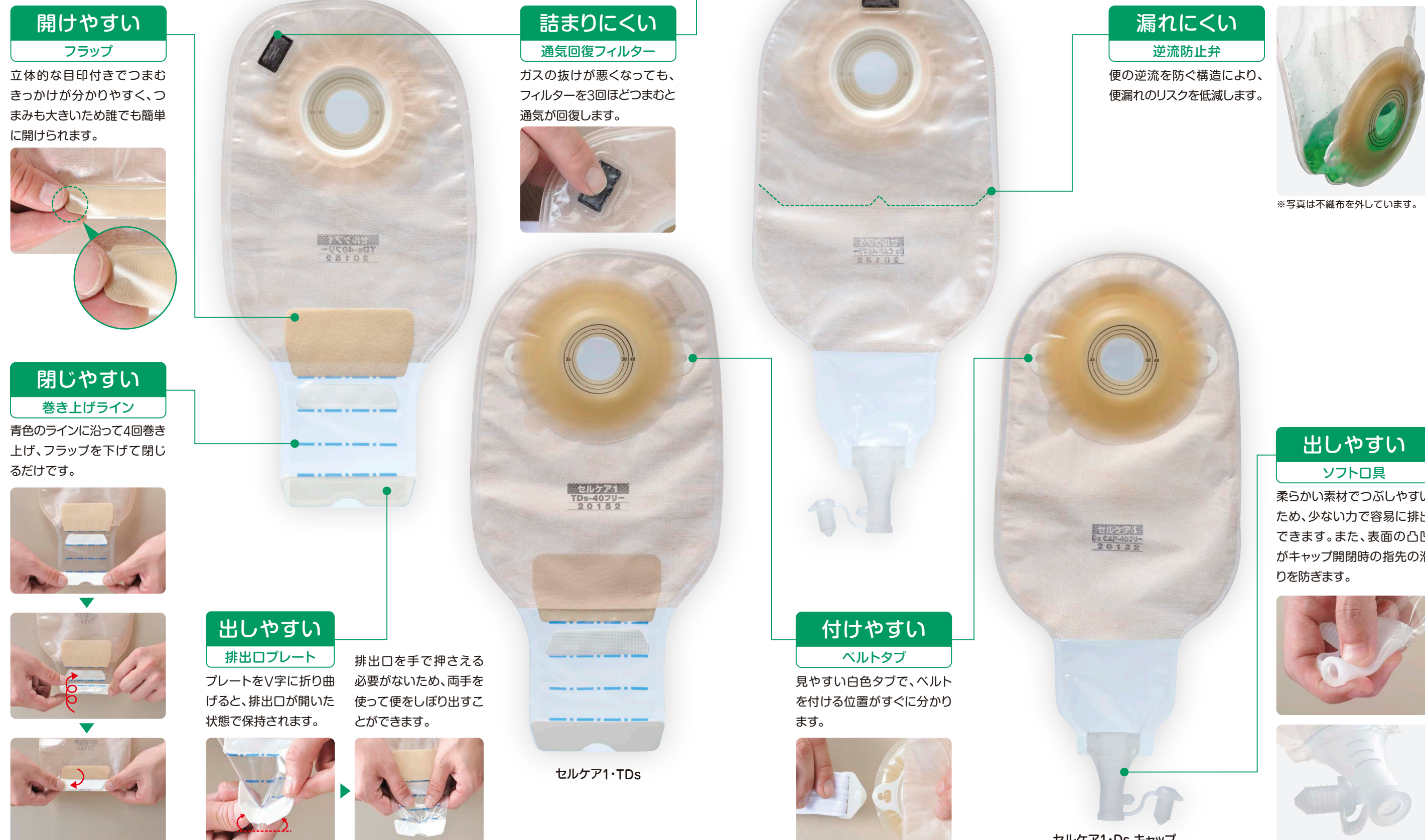

※写真は不織布を外しています。

セルケア1・Ds キャップ