



抗菌聴診器

ナーシングフォネットⅢ

No.116Ⅲ (シングル) No.126Ⅲ (ダブル) KENZMEDICO

かわいい + 欲張りスペック
抗菌・軽量・耳にやさしい聴診器



made in
Japan
ケンゾメディコ聴診器は日本製です。

KENZMEDICO

チェストピースの構造

No.116Ⅲ (シングル)



- ① **チェストピース (抗菌加工)**
UV塗装で傷がつきにくく、光沢のある美しさを保持
- ② **ノンチリング (抗菌加工)**
患者様に“ヒヤッ”とした感じを与えない
- ③ **ダイアフラム (抗菌加工)**
硬質で高感度なガラスエポキシを採用

No.126Ⅲ (ダブル)



- ④ **ベルカパー (抗菌加工)**
耐久性に優れ肌触りの良いシリコンゴム
- ⑤ **チェストピース (抗菌加工)**
UV塗装で傷がつきにくく、光沢のある美しさを保持
- ⑥ **ノンチリング (抗菌加工)**
患者様に“ヒヤッ”とした感じを与えない
- ⑦ **ダイアフラム (抗菌加工)**
硬質で高感度なガラスエポキシを採用
- ⑧ **くぼみの目印**
くぼみとは反対側が聴診可能面になります。

NEW ネームタグが新しくなりました!



クリアが標準付属品です。*ブラックは別売品です。

耳周りの構造


日本人の耳にやさしくフィットするように、日本人の感性で考えました。



▶ **可動式の耳管で角度調節**
個々の外耳道の角度に合わせられるような構造。

▶ **回転式のソフトイヤピースで耳への負担を軽減**
聴診器を装着した時には耳の中でイヤピースは固定されます。耳の中で余計な摩擦が起こらなくなり、耳への負担が軽減されるよう考えました。

▶ **適度な力できちんと装着**
キツすぎない適度な強さのバネで耳にやさしく、しっかり把持。

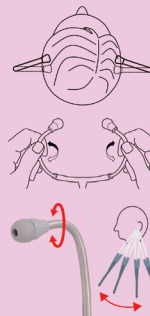

わくわくする カラーバリエーション

全13色

No.126Ⅲ (ダブル)
No.116Ⅲ (シングル)



ナーシングフォネットNo.116Ⅲ

- 全長/約72cm 重量/約90g
- 材質:チェストピース/アルミ 耳管/真鍮
- 直径:ダイアフラム面/約φ48mm
- 標準付属品/ソフトイヤピース大×1セット
ネームタグ(クリア)×1ヶ
- 製造販売届出番号/11B2X00021116201

ナーシングフォネットNo.126Ⅲ

- 全長/約72cm 重量/約100g
- 材質:チェストピース/アルミ 耳管/真鍮
- 直径:ダイアフラム面/約φ48mm ベル面/約φ33mm
- 標準付属品/ソフトイヤピース大×1セット
ネームタグ(クリア)×1ヶ
- 製造販売届出番号/11B2X00021126201

別売品/補充品	品名	品番	希望小売価格(税別)
ダイアフラム	抗菌ダイアフラム116用	1116D001	
	抗菌ダイアフラム126用	1126D001	
リング	抗菌リング ブラック	1110B801	
	抗菌リング スカイブルー	1110B121	
	抗菌リング ピンク	1110B122	
	抗菌リング グレー	1110B123	
	抗菌リング ライラック	1110B124	
	抗菌リング セイルブルー	1110B125	
	抗菌リング ラズベリーピンク	1110B126	
	抗菌リング ダークネイビー	1110B127	
	抗菌リング ハンターグリーン	1110B128	
	抗菌リング バーガンディ	1110B130	
	抗菌リング パールブルー	1110B132	
	抗菌リング パールプラム	1110B133	
	ベルカパー	126抗菌ベルカパー	1126B101
126抗菌ベルカパー パールピンク		1126B102	
126抗菌ベルカパー パールブルー		1126B103	
126抗菌ベルカパー パールプラム		1110B104	
イヤピース	ソフトイヤピースセット ブラック(大小)	1138F511	
	ソフトイヤピースセット グレー(大小)	1138F512	
ネームタグ	聴診器ネームタグ ST-2 クリア	1095B402	
	聴診器ネームタグ ST-2 ブラック	1095B401	

製造販売業者

ケンツメディコ株式会社

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552番地1
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716
ホームページ <http://www.kenzmedico.co.jp>

