

## 歩行車

## リトルターン

小さく回れて、小さくしまえる歩行車シリーズ

製品紹介



Video



## 狭い空間でも扱いやすい小回りの良い本体設計

業界最小クラスの本体幅

48cm

(ロー、ハイタイプ)

トール103タイプは54cm

抑速付は50cm

電動アシスト付は52cm

本体幅、ホイールベース(前輪と後輪の長さ)が小さいので小回りがききます。

ホイールベース

約40cm



最小回転幅

約80cm



歩行車を持ち上げて方向転換していた狭い廊下のコーナー部も…



before



after

スイスイ

「リトルターン」は抜群の小回りでスイスイハンドリング。小さな本体で狭い居室空間での使用にもピッタリ

## コンパクトに収納できる左右折りたたみ構造


折りたたみ幅

26cm


抑速付は28cm

電動アシスト付は30cm

折りたたんだ後も自立します。

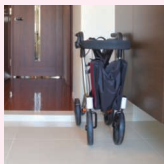

玄関

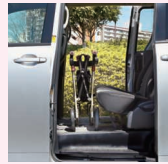

後部座席



## 軽量設計で取り扱いしやすい



軽量設計でちょっとした段差も楽に持ち上げられます。また大きな車輪で、凹凸のある道も楽に乗り越えられます。



本体重量 約6.5kg

トール103タイプは約7.1kg

抑速付は約8.5kg

電動アシスト付は約9.1kg

車輪直径 20cm



バッグ容量 大容量12ℓ (トール103タイプは14ℓ)



楽に握れるブレーキレバー



スイッチ式の簡単ハンドル高さ調節

①スイッチを押して、②ハンドルを上下するだけ。スイッチにはロック機能がついているので、使用中、不用意にハンドル高さが変わることがありません。



座面付きで休憩できます。



ロックはブレーキレバーを下げるだけ



簡単折りたたみ

①ストラップを引き上げて、②フックをかけてロック。

