




Yushin Medical Products Critical Care

# バイタルキャス 閉鎖式吸引システム


*Vital-Cath  
Closed suction systems*

Further reduce the burden on  
patients and healthcare  
professionals associated with  
tracheal suction

24h

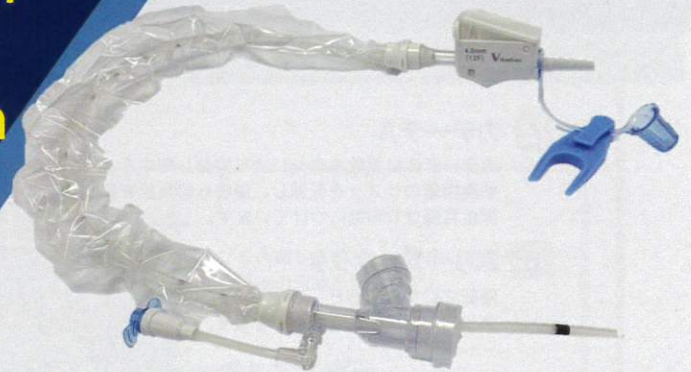

72h

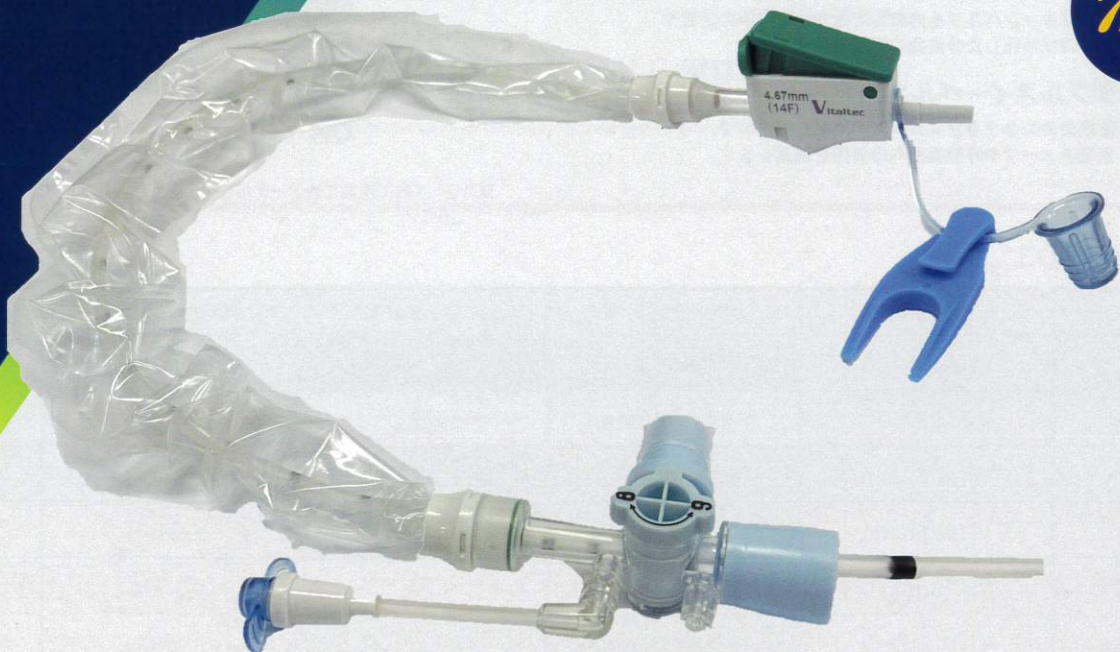


# Vital-Cath Closed suction systems

## 【バイタルキャス 72】

### 【製品規格】

一般的名称：気管支吸引用カテーテル  
 医療機器製造販売認証番号：226AFBZX00025000  
 販売名：バイタルキャス  
 クラス分類：Ⅱ管理医療機器

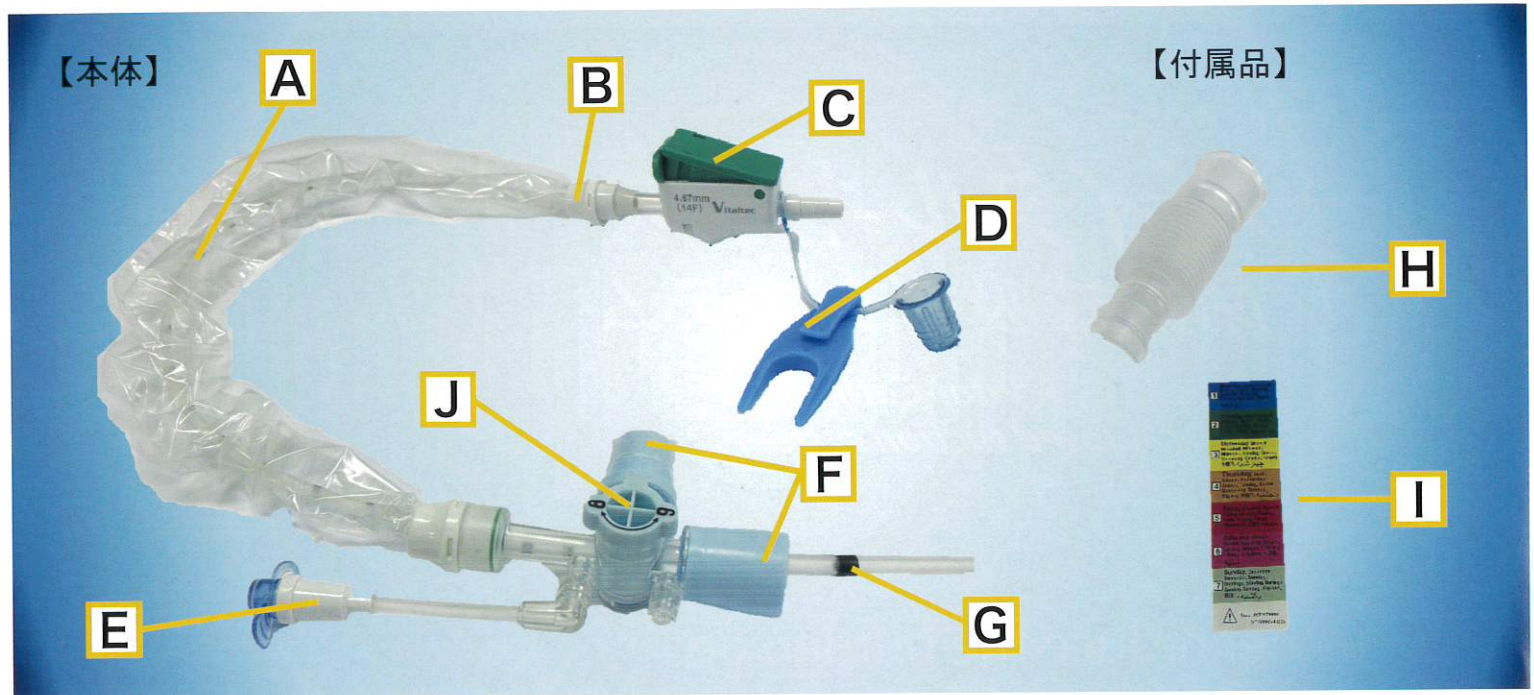

#### A カテーテル

カテーテルは柔軟なコシにより操作しやすく、粘膜損傷のリスクを低減し、患者への負担を軽減します。深度目盛は1cm毎につけています。

#### B スリーブコネクタ

回転式になっており、スリーブのよじれを解消できます。



#### C サクションコントロールスイッチ

人間工学に基づいた操作しやすい吸引用スイッチは医療従事者に容易で素早い吸引操作を提供します。またスイッチ全体は握りやすいデザインを採用しているため吸引時は快適に作業ができます。

#### D ディスコネクトウェッジ

バイタルキャスと接続するラインとの分離を容易にします。

#### E 洗浄ポート

ノンリターンバルブを内蔵しており、洗浄中の逆流やエアロゾル化した分泌物の汚染を防ぎます。

#### F ダブルスワイベルエルボー

接続口のコネクタがスムーズに回転しますので、気管チューブや呼吸回路への負担を軽減します。

#### G ブラックリングインジケータ

くっきり目立つブラックリングインジケータを採用し、吸引後のカテーテルのスリーブ内への引き込み状況を簡単に視認できます。


#### H フレックスコネクタ

伸縮と角度調整が可能です。

#### I 曜日ステッカー

#### J アイソレーションバルブ

バルブをOFFポジションに回すことで、人工呼吸のラインと吸引カテーテルの洗浄チャンバーを確実に分けることができます。そのため、より良い洗浄を行うことができます。\*

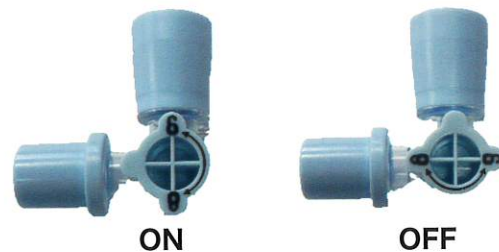

※スリーブ内に確実にカテーテルを引き戻してからOFF操作を行って下さい。

EOG滅菌済 単回使用


種別	製品番号	カテーテル外径	カラーコード	カテーテル全長	入数
気管挿管用	VITAL67100	10Fr / 3.33mm	黒	540mm	20本/箱
	VITAL67120	12Fr / 4.00mm	白	540mm	20本/箱
	VITAL67140	14Fr / 4.67mm	緑	540mm	20本/箱
気管切開用	VITAL68100	10Fr / 3.33mm	黒	305mm	20本/箱
	VITAL68120	12Fr / 4.00mm	白	305mm	20本/箱
	VITAL68140	14Fr / 4.67mm	緑	305mm	20本/箱

# Vital-Cath Closed suction systems

## 【バイタルキャス 24】

### 【製品規格】

一般的名称：気管支吸引用カテーテル  
 医療機器製造販売認証番号：226AFBZX00025000  
 販売名：バイタルキャス  
 クラス分類：Ⅱ 管理医療機器

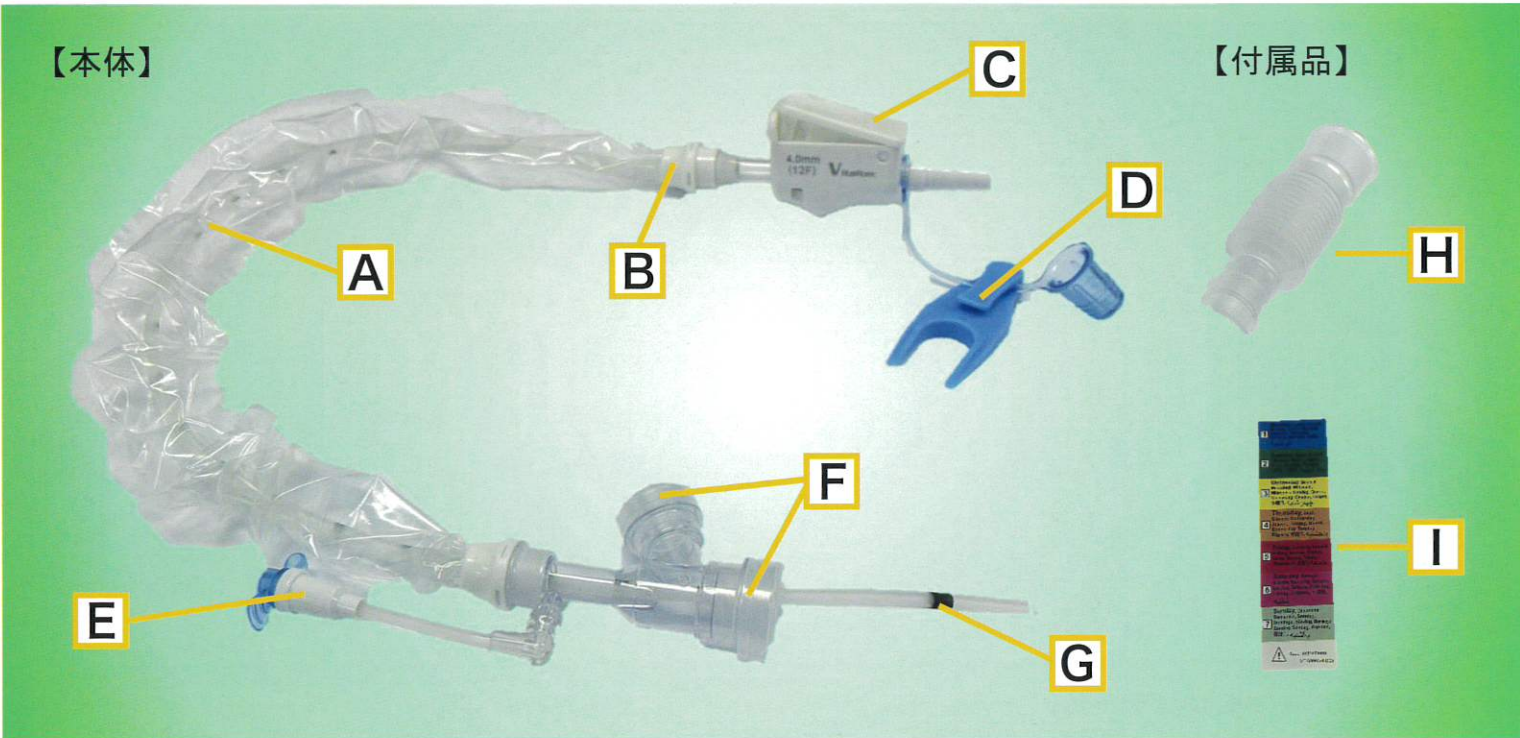

#### A カテーテル

カテーテルは柔軟なコシにより操作しやすく、粘膜損傷のリスクを低減し、患者への負担を軽減します。深度目盛は1cm毎につけています。

#### B スリーブコネクタ

回転式になっており、スリーブのよじれを解消できます。



#### C サクションコントロールスイッチ

人間工学に基づいた操作しやすい吸引用スイッチは医療従事者に容易で素早い吸引操作を提供します。またスイッチ全体は握りやすいデザインを採用しているため吸引時は快適に作業ができます。

#### D ディスコネクトウェッジ

バイタルキャスと接続するラインとの分離を容易にします。

#### E 洗浄ポート

ノンリターンバルブを内蔵しており、洗浄中の逆流やエアロゾル化した分泌物の汚染を防ぎます。

#### F ダブルスイーベルエルボー

接続口のコネクタがスムーズに回転しますので、気管チューブや呼吸回路への負担を軽減します。

#### G ブラックリングインジケータ

くっきり目立つブラックリングインジケータを採用し、吸引後のカテーテルのスリーブ内への引き込み状況を簡単に視認できます。

#### H フレックスコネクタ

伸縮と角度調整が可能です。

#### I 曜日ステッカー

EOG滅菌済 単回使用

種別	製品番号	カテーテル外径	カラーコード	カテーテル全長	入数
気管挿管用	VITAL62100※	10Fr / 3.33mm	黒	540mm	20本/箱
	VITAL62120	12Fr / 4.00mm	白	540mm	20本/箱
	VITAL62140	14Fr / 4.67mm	緑	540mm	20本/箱
気管切開用	VITAL63100※	10Fr / 3.33mm	黒	305mm	20本/箱
	VITAL63120	12Fr / 4.00mm	白	305mm	20本/箱
	VITAL63140	14Fr / 4.67mm	緑	305mm	20本/箱


※は受注生産品です。

# Vital-Cath Closed suction systems

## 【バイタルキャス 24 新生児/小児用】

### 【製品規格】

一般的名称：気管支吸引用カテーテル  
 医療機器製造販売認証番号：226AFBZX00025000  
 販売名：バイタルキャス  
 クラス分類：Ⅱ 管理医療機器

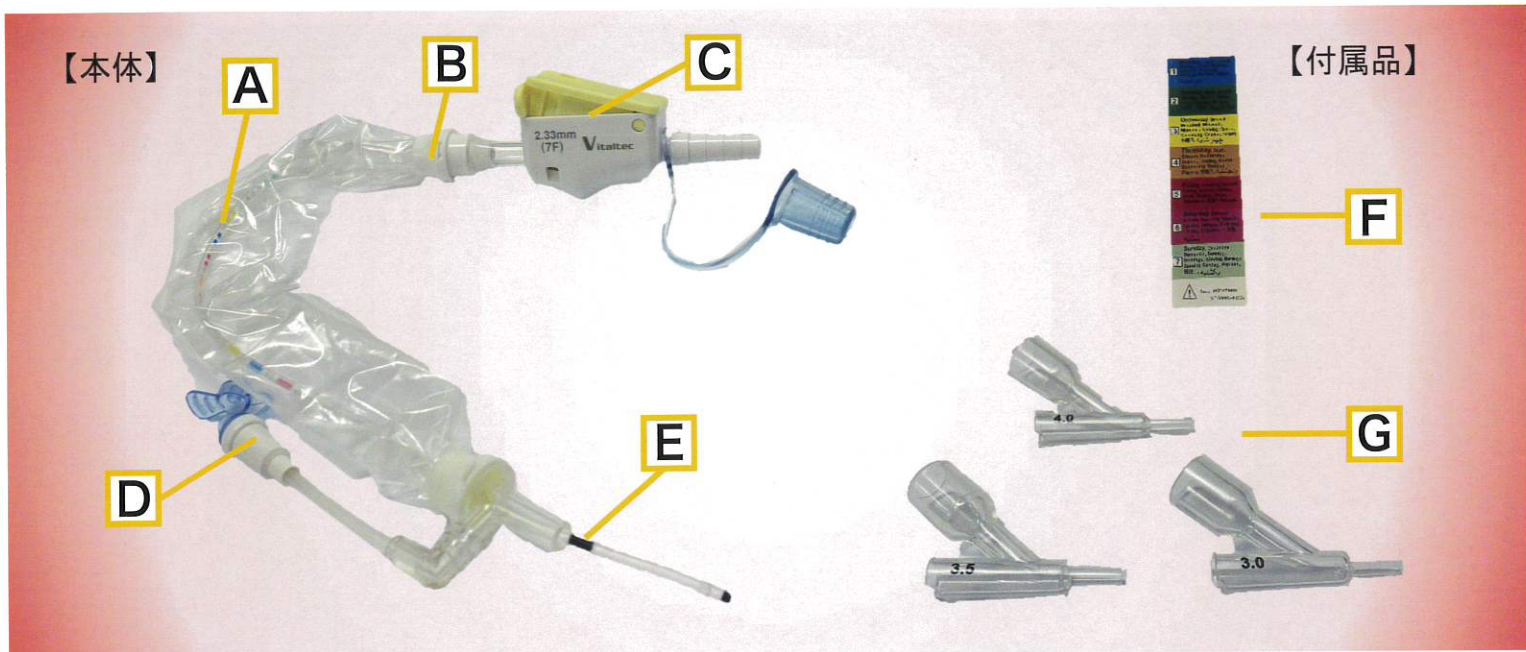

#### A カラーマーク付カテーテル

カテーテルはカラーマーク表示がされているため、挿入深度を正確に計測できます。深度目盛は1cm毎につけています。

#### B スリーブコネクタ

回転式になっており、スリーブのよじれを解消できます。



#### C サクションコントロールスイッチ

人間工学に基づいた操作しやすい吸引用スイッチは医療従事者に容易で素早い吸引操作を提供します。またスイッチ全体は握りやすいデザインを採用しているため吸引時は快適に作業ができます。

#### D 洗浄ポート

ノンリターンバルブを内蔵しており、洗浄中の逆流やエアロゾル化した分泌物の汚染を防ぎます。

#### E ブラックリングインジケータ

くっきり目立つブラックリングインジケータを採用し、吸引後のカテーテルのスリーブ内への引き込み状況を簡単に視認できます。

#### F 曜日ステッカー

#### G Yアダプタ

2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5mmの種類を各サイズ別でご用意。※

EOG滅菌済 単回使用

製品番号	カテーテル外径	カラーコード	Yアダプタ ※	カテーテル全長	入数
VITAL6000500	5Fr / 1.67mm	グレー	2.0/2.5mm	305mm	20本/箱
VITAL6000600	6Fr / 2.00mm	薄緑	2.5/3.0/3.5mm	305mm	20本/箱
VITAL6000700 ※	7Fr / 2.33mm	クリーム	3.0/3.5/4.0mm	305mm	20本/箱
VITAL6000800	8Fr / 2.67mm	薄青	3.5/4.0/4.5mm	305mm	20本/箱
VITAL6001000 ※	10Fr / 3.33mm	黒	4.5/5.0/5.5mm	405mm	20本/箱

※は受注生産品です。

製造販売元

株式会社 ユーシンメディカル

〒113-0033 東京都文京区本郷2-26-3

TEL 03-5844-1415

FAX 03-3815-5782

URL <http://www.yushinmed.co.jp>

販売業者