

「酸素をしっかりと取り込めているか」

酸素飽和度・脈拍数・灌流指標を8秒で測定！

管理医療機器 KA800

医療機器認証番号：304AGBZX00082000

ワンタッチ操作ですぐに測定

パルスオキシメータ

PULSE OXIMETER

目には見えない健康状態が数値で確認できるパルスオキシメータ。最近では医療機関だけでなく、家庭での体調管理にその用途が広がっています。

不安を安心に変える一つの指標として、一家に一台の時代です。

お求めになりやすい価格で新登場！



日本の厳しい認証審査をクリアした医療機器だからこそその高品質・高機能

安心

安全

簡単

高精度

パルスオキシメータとは

- 皮膚を通して動脈血酸素飽和度(SpO2)と脈拍数(PR)を測定するための装置です。本製品は、灌流指標(PI)も測定します。
- 肺から酸素をしっかりと取り込めているかを測ることができます。

パルスオキシメータの必要性

指先につければ、即座に血中酸素飽和度と脈拍数が分かるパルスオキシメータの利点が再認識されています。新型コロナウイルス感染後の重症化の目安として活用でき、また、病院への連絡や受診をする判断材料になります。痛みなく簡単に毎日の健康状態がチェックでき、健康管理用として家庭に常備しておくとう安心です。

使いやすさ・便利さにこだわった7つの特長

- 指にはさむだけの簡単操作
- 指を抜くと自動で電源OFF
- アラーム設定機能搭載
- 視認性に優れたTFT液晶ディスプレイ
- 持ち運びに便利な軽量小型ボディ
- 酸素飽和度、脈拍数、灌流指標を1画面で表示
- ストラップ付き



痛みなく簡単に体内の酸素の状態が分かります。今や一家に一台の必需品です。


ご利用シーン



- 新型コロナウイルス感染症対策としてご家族の毎日の体調管理に
- 呼吸器の疾患がある方に
- 急に進行する肺炎の症状を把握するために
- スポーツ時のコンディショニングチェックに
- 登山時の高山病予防に
- 在宅介護やご高齢の方の体調チェックに

KAEI(株)のパルスオキシメータは、自宅療養者用や医療・介護の現場でお使いいただいております。

測定値の表示について

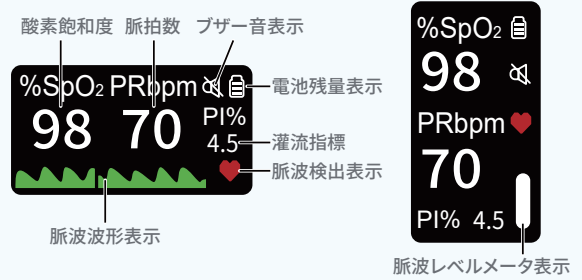

- **酸素飽和度 (SpO₂)**
血液中の酸素濃度を表示します。
- **脈拍数 (PR)**
1分間に心臓が拍動する回数を表示します。
- **灌流指標 (PI)**
血液の末梢循環状態を表示します。
- **脈波レベルメータ**
脈波に同期して脈波の強度レベルを表示します。
- **脈波波形表示**
酸素飽和度測定に際して得られる脈波波形を表示します。

〈セット内容〉

- 本体
- ストラップ
- お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×2本)
- 取扱説明書
- 添付文書



仕様

販売名	パルスオキシメータ KA800	オートパワーオフ機能	約8秒
一般的名称	パルスオキシメータ	アラーム設定機能	酸素飽和度と脈拍の上限/下限のアラーム設定が可能
医療機器分類	管理医療機器/特定保守管理医療機器	IP保護等級	IP22
医療機器認証番号	304AGBZX00082000	電源	単4形アルカリ乾電池×2本
酸素飽和度測定機能	測定精度：±2% (70%~100%)	寸法	約63(長さ)×35(幅)×35(高さ)mm
	規定しない(0%~69%)	質量	約54g(乾電池を含む)
脈拍数測定機能	表示範囲：30%~99%	使用環境温度	温度：10~40°C 湿度：15~95%
	測定精度：±3bpm (25bpm~250bpm)	保管条件	温度：-20~60°C 湿度：15~95%(結露なきこと)
	表示範囲：25bpm~250bpm	J A N	4589621557385

※患者の状態に関する臨床判断は、本製品の情報だけでなく、臨床症状や他の検査結果と合わせて総合的に行ってください。
※ご使用の際は取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

MADE IN CHINA

コンセプト

CONCEPT

「安心」「安全」「簡単」「高精度」

世界中でコロナウィルスの感染が拡大している今、体温や酸素飽和度の測定は、日々の健康管理に欠かせないものとなりました。誰もが迷うことなく直感的で、簡単に使えるわかりやすさを追求しました。体調の良くないときでもストレス無く使うことが大切だと考えているからです。

信頼性

RELIABILITY

医療機器に関する品質マネジメントシステムの規格であるISO13485の認証を取得した製造所で生産しており、日本の医療機器認証を取得しています。欧州での医療機器販売に必要なCEマークも取得しており、信頼の品質をご提供します。

デザイン理念

DESIGN PHILOSOPHY

白を基調としたシンプルで清潔感のあるカラーは、私たちの届けたい優しさを表現しています。よくあるカラフルな色使いではなく、こころが落ち着く、シンプルなデザインです。

お問い合わせ先

製造販売元：KAEI株式会社 大阪市中央区南船場2-4-8 TEL：06-6940-4085 Email：info@kaei.co.jp

●本資料は営業用の為、法律上適切ではない表現も含まれております。あくまで社内用としてご使用ください。●製品のデザイン、仕様は改善等のため予告なく変更する場合があります。●写真・イラストはイメージです。

KAEIはヘルスケア・IVDメーカーとして健康と安心をサポートし、人と医療をつなぎます。

