

# 防水フィルムで水をシャットアウト

テープ部に防水フィルムを使用しているので、貼ったまま入浴・シャワーができます。  
キズぐちはモイストパッド™でしっかり密閉し、痛みをやわらげキズを早くきれいに治します。

超大判  
Mサイズ  
4枚入



テープサイズ：90mm×108mm  
パッドサイズ：50mm×70mm

超大判  
Lサイズ  
3枚入



テープサイズ：100mm×125mm  
パッドサイズ：60mm×75mm

## ▼ ケアリーヴ™ 治す力™ 防水タイプ ラインアップ ▼

品名	イメージ	品番	内容	包装	入目	JANコード	JANコード 中箱・箱 G-TINコード	個装サイズ 幅×奥行×高さ		質量
								中箱サイズ 幅×奥行×高さ	箱 サイズ 幅×奥行×高さ	
ケアリーヴ™ 治す力™ 防水タイプ		CNB12M	Mサイズ 12枚	個装	-	4 987167 075026	4987167075026	70×25×(105+20)mm	25g	
				中箱	10コ			24987167075020	275×73×109mm	308g
				箱	200コ			14987167075023	566×308×287mm	6.7kg
		CNB9L	Lサイズ 9枚	個装	-	4 987167 075033	4987167075033	70×25×(105+20)mm	24g	
				中箱	10コ			24987167075037	275×73×109mm	296g
				箱	200コ			14987167075030	566×308×287mm	6.5kg
		CNB7LL	LLサイズ 7枚	個装	-	4 987167 075040	4987167075040	75×25×(105+20)mm	26g	
中箱				10コ	24987167075044			275×78×109mm	319g	
箱				200コ	14987167075047			566×328×287mm	7.0kg	
	CNB5B	ビッグサイズ 5枚	個装	-	4 987167 075057	4987167075057	83×25×(112+20)mm	28g		
			中箱	10コ			24987167075051	275×86×116mm	339g	
			箱	200コ			14987167075054	601×360×287mm	7.5kg	
	CNB4J	ジャンボサイズ 4枚	個装	-	4 987167 091590	4987167091590	103×25×(132+20)mm	37g		
			中箱	10コ			24987167091594	275×106×136mm	437g	
			箱	100コ			14987167091597	551×288×290mm	4.9kg	
	CNB16SP	スポット用 16枚	個装	-	4 987167 092665	4987167092665	70×25×(105+20)mm	23g		
			中箱	10コ			24987167092669	275×73×109mm	277g	
			箱	200コ			14987167092662	566×308×287mm	6.1kg	
	CNB8H	かかと用 8枚	個装	-	4 987167 090005	4987167090005	70×25×(105+20)mm	23g		
			中箱	10コ			24987167090009	275×73×109mm	280g	
			箱	200コ			14987167090002	566×308×287mm	6.2kg	
超大判		NEW CNBCHO4M	超大判 Mサイズ 4枚	個装	-	4 987167 099480	4987167099480	125×7×193mm	24g	
				中箱	10コ			24987167099484	127×90×197mm	282g
				箱	100コ			14987167099487	265×465×212mm	3.2kg
超大判		NEW CNBCHO3L	超大判 Lサイズ 3枚	個装	-	4 987167 099497	4987167099497	135×5×208mm	23g	
				中箱	10コ			24987167099491	137×70×212mm	281g
				箱	100コ			14987167099494	285×365×227mm	3.2kg

### 使用上の注意

●感染したキズ、にきび、湿疹、虫さされ、皮膚炎などの症状、目の周囲・粘膜には使用しない。●かさぶたができていたり、滲出液や血液が乾いて固まっているキズには使用しない。●糖尿病や血行障害の治療を受けている方は、使用前に医師又は薬剤師に相談する。●消毒剤や軟膏等と併用しない。●キズを水道水などでよく洗い、水気をふきとってから使用する。●小児には保護者の監督のもとに使用する。●3歳未満の乳幼児には使用しない。●水濡れ、高温、多湿、直射日光をさけ、小児の手のとどかないところに保管する。●個包装紙に天然ゴムラテックスを使用。●貼る際にフィルムにシワが入ると、防水性が損なわれる場合があります。●2、3日に1度の交換を推奨します。

再使用禁止

このカタログの内容は、2023年11月現在のものです。



# 治癒を促進する絆創膏 ケアリーヴ™ 治す力™

防水タイプに

# 超大判 新登場





# 透明で目立たず、キズを早くきれいに治す

成長を続ける

ケアリーヴ™ 治す力™ 防水タイプから

**超大判**が登場しました。

## ケアリーヴ™ 治す力™ 防水タイプ

インテージ SRI+ 絆創膏市場 2017年4月～2023年3月

年度別販売個数

5年間で**約2倍に成長**



肌へのやさしさを追求した特殊形状

# ケアリーヴ™ 治す力™ 防水タイプ 超大判の特長

治癒を促進する絆創膏

特殊形状でかぶれにくい

キズを早くきれいに治すモイストパッド™

よくつき肌にもやさしいアクリル系粘着剤

透明で目立たずはがれにくい素材の防水フィルム

[Lサイズ実物大]


サイズ：100mm×125mm パッド部 60mm×75mm

[Mサイズ実物大]

サイズ：90mm×108mm パッド部 50mm×70mm

## モイストヒーリングでキズを早くきれいに治す

ハイドロコロイド素材のモイストパッド™が<sup>しんじゅつえき</sup>滲出液を吸収・保持し、キズを治すのに最適な潤い環境を保ちます。かさぶたをつくらず、新しい皮ふが早くきれいに再生するのを促進します。

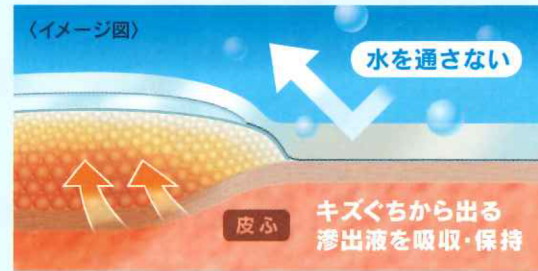


効能効果

切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」

他にもキズに合わせて選べる豊富なサイズ

実物大

## ケアリーヴ™ 治す力™ 防水タイプ 超大判の貼り方

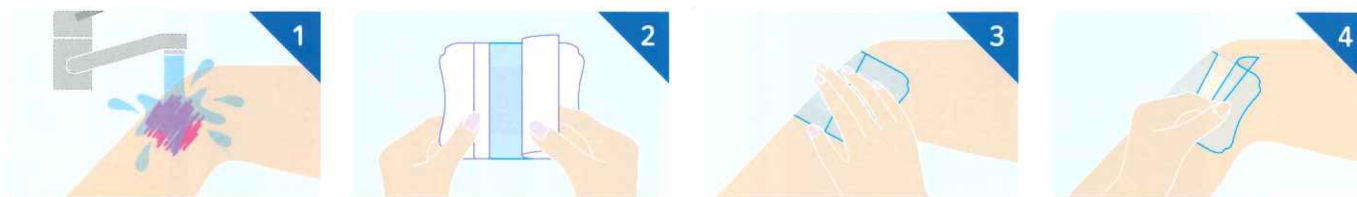

1 キズぐちの汚れや異物を水道水などでよく洗い、水分をふき取ってください。

2 パッドを汚さないよう注意して、はく離紙をはがします。

3 キズぐちにパッドをあて、なるべくシワが入らないようにテープ部分をしっかり押さえてください。

4 表面フィルムの中心「最後にはがす」の取り口から、矢印の方向にゆっくりはがしてください。



5 防水性を高めるために、再度テープ部分をしっかり押さえて、パッドの周りやシワの部分に隙間ができない様にしてください。

肘(ひじ)に貼る場合

※関節を15°～25°程度に曲げた状態で、テープを伸ばさずに貼ってください。



膝(ひざ)に貼る場合

※関節を35°～45°程度に曲げた状態で、テープを伸ばさずに貼ってください。

