

ニチバン

# ファスナート™

FASNAHT™








確実な創閉鎖を実現するために



一般医療機器：皮膚接合用テープ  
 医療機器届出番号：1382X00218143010  
 JMDNコード：70438000
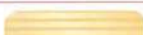
## 手術創や挫創・切創の閉鎖、縫合部の補強に

▶ 小さい創部にも対応できるラインアップ

品番	サイズ(実物大)	入り数	標準価格(税別)	JANコード
FN0438	4mm×38mm 	4本×50袋		4987167083519
FN0476	4mm×76mm 	4本×30袋		4987167083526
FN0619	6mm×19mm 	6本×30袋		4987167083533
FN0638	6mm×38mm 	3本×50袋		4987167083540
FN0676	6mm×76mm 	3本×30袋		4987167083557
FN1235	12mm×35mm 	8本×30袋		4987167098865
FN1276	12mm×76mm 	4本×30袋		4987167083564

## 高い通気性

通気孔を設けた粘着剤と不織布基材の組み合わせにより高い通気性があります。貼っていてもムレにくく、また血液等がテープの内側に溜まりにくくなっています。



## 高い付着性

優れた粘着力により、創閉鎖に必要な付着性があります。水に濡れてもはがれにくく、耐水性があります。

## プレカットタイプ

あらかじめ必要な長さにカットされているため、ハサミでカットする必要がありません。


## 基材の工夫

創部の閉鎖に必要な方向にのみ、強度を高めるために樹脂をストライプ加工しました。強度を高めながらもしなやかな基材を採用しているため凹凸部へしっかりとフィットします。



## かど丸形状

テープの「かど」を丸くすることでテープが端からはがれにくくなっています。

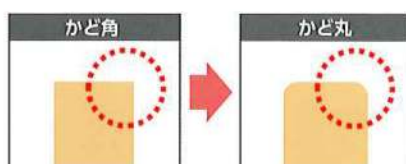

## ハンドリング性

はく離紙からはがした際にカールしにくく、操作性に優れます。



### 使用上の注意

#### 【重要な基本的注意】

- 感染創もしくは感染が疑われる部位には使用しないでください。本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害(発疹・発赤、水疱、皮膚はく離、かゆみ等)と思われる症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 本品を再滅菌しないでください。

### 保管方法

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存してください。

TMtrademark

日本製  
MADE IN JAPAN

## ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3  
ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>