

メディクスワブ エタノール


医療現場での安全・便利で確実な消毒に。

原寸大
4.5

medic swab ethanol



- 十分に塗布できる薬液量 速乾性に優れたエタノール使用
- 小さな力で確実に薬液を押し出す「M字形状」(登録意匠)
- 薬液が飛び散るのを防ぐ、手を汚さない「ループ構造」(登録意匠)
- 綿棒を取りだしやすい「フィルムストップ加工」
- 中の綿棒を確認しやすい透明フィルム

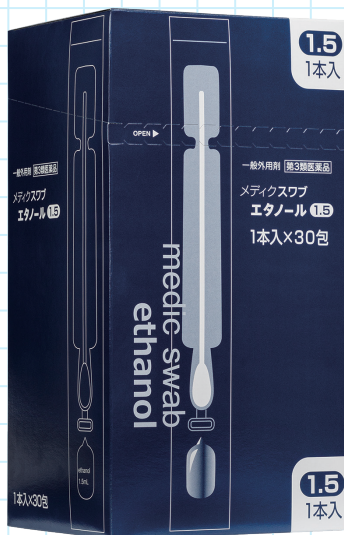


メディクスワブ
エタノール 1.5



メディクスワブ
エタノール 4.5

本品は、アルミ包装されて箱に入っています

- 安心** 一回使い切りタイプで、汚染リスクを最小限に
- 手軽** 消毒剤の調整や、容器の洗浄・滅菌の手間をカット
- 明瞭** 薬液の流れが確認できる透明容器を使用
- 高品質** 専用設計した、薬液を塗布しやすい高品質の日本製木軸綿棒を採用
- 衛生的** 徹底した衛生管理のもと、クラス10000 (ISOクラス7)のクリーンブースで生産
- 便利** 一本個包装で、在宅・訪問介護にも便利

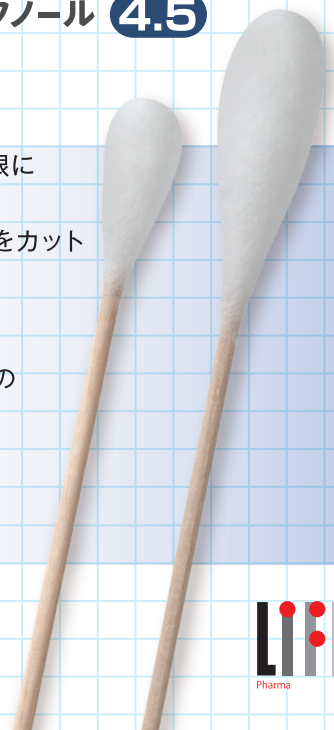



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用后、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

その他の注意

本剤の使用により、アレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある

効能・効果

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

用法・用量

本剤を付属の綿棒で、塗抹、清浄用として用いる。
<用法用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 外用にのみ使用すること。
- (5) 本剤は1包につき、1回の使用とし、薬液押し出し後又は開封後はできるだけ速やかに使うこと。
- (6) 過度に使用した場合、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること

メディクスワブエタノール 製品仕様

商品名	商品コード	綿棒規格	薬液量	製品サイズ (幅×奥行×高さ)		重量	JANコード
メディクスワブ エタノール 1.5	7026	全長:約153mm 綿球径:約10mm 1本/包	1.5mL	単品	135mm×110mm×255mm	210g	4976558004370
				外箱 (12箱入)	555mm×345mm×270mm	3.2kg	
メディクスワブ エタノール 4.5	7025	全長:約158mm 綿球径:約14mm 1本/包	4.5mL	単品	135mm×110mm×255mm	300g	4976558004387
				外箱 (12箱入)	555mm×345mm×270mm	4.3kg	

【製造販売元】

平和メディック株式会社 <https://www.heiwamedic.com/>

〒506-0058 岐阜県高山市山田町1382番地6 TEL: 0120-380-512
受付時間 9:00~17:00(土・日、祝日、当社休日を除く)

● 本 社

〒506-0041 岐阜県高山市下切町 180 TEL:0577-33-0511 FAX:0577-33-0819

● 東京営業所

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1丁目9番11号 石川ICOビル202号 TEL 03-3258-0966

● 大阪営業所

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目7番4号 新大阪生原ビル201号 TEL 06-6307-1666

組 成

メディクスワブ エタノール1.5	担体	綿棒
	有効成分	100mL中エタノールを83mL(76.9~81.4vol%)含有
	容量	綿棒 1本あたり薬液1.5mL
メディクスワブ エタノール4.5	担体	綿棒
	有効成分	100mL中エタノールを83mL(76.9~81.4vol%)含有
	容量	綿棒 1本あたり薬液4.5mL

添加物:イソプロパノール

保管及び取扱い上の注意


- (1) 直射日光のあたらない、涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 衣類等に付着すると、脱色及び変色することがあるので注意すること。
- (5) 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。
- (6) 綿に指が触れないように使用し、再使用はしないこと。
- (7) 薬液押し出し後又は開封後は、速やかに使用すること。
- (8) 薬液が漏れるおそれがあるため、薬液ポケットを下にして保管すること。
- (9) 火気に近づけないこと。

取扱い方法




本製品の薬液の押し出しを確実にを行うため、次の手順でご使用ください。

1 薬液ポケットを押して液を綿にしみこませる

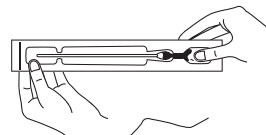

2 フィルムをめくり綿棒を取り出す

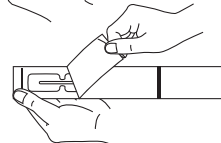

薬液ポケットの押さえ方や使用環境(低温下など)によっては、力が加わりすぎてフィルムが破れるなどの原因となり、薬液が漏れ出すことがあります。

- 注1) 万一、薬液ポケットから液が染み出ている場合は、ご使用を控えてください。
- 注2) フィルム特性により低温下ではきれいに剥がれないことがあります。

medic swab ethanol