


ULTRA LIGHT COAT

全方位からの散乱線をカット。
長時間作業をする人、フロアを動きまわることの多い人などにおすすめです。

ダブルサポートベルトがコルセット効果を発揮。
からだの一体感を高め、X線防護衣の重量感を軽減します。

① ウルトラライト サポートコート

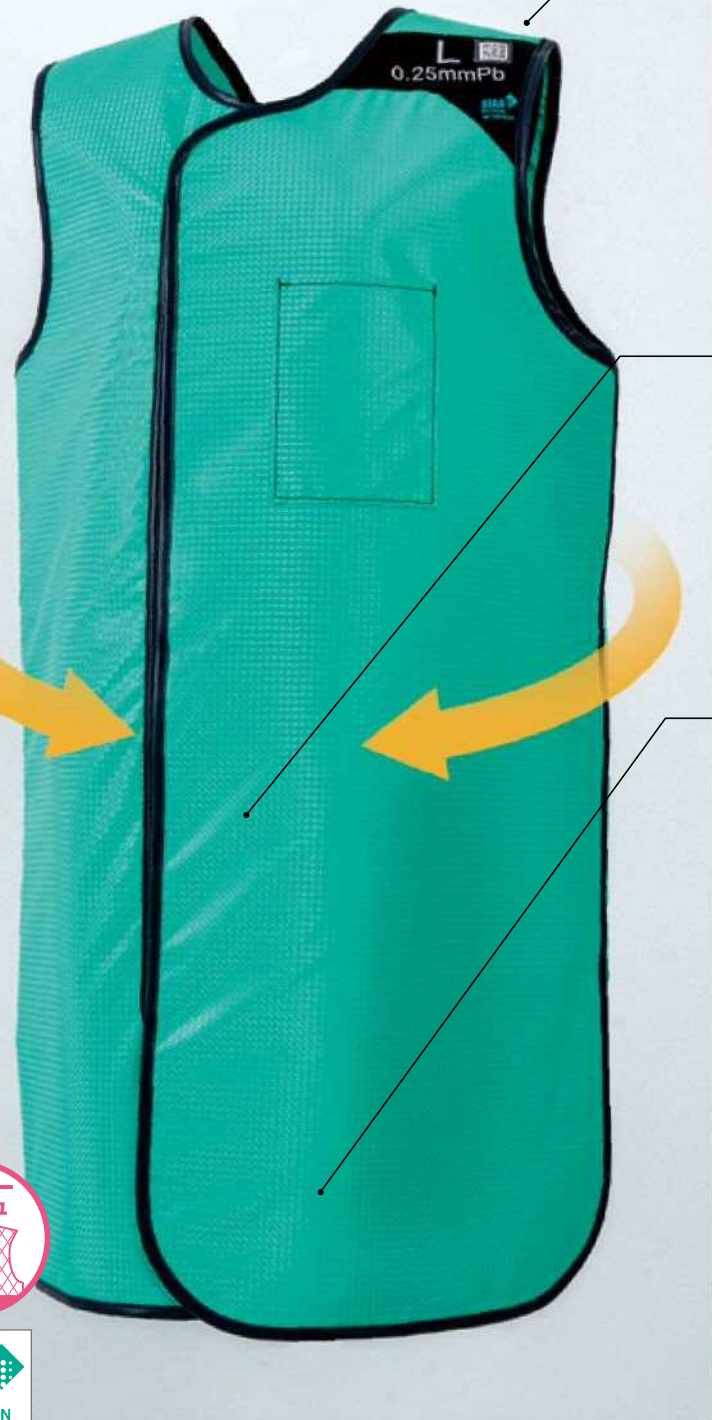

ハニカムメッシュ
ハニカム二層構造の素材を採用し、優れた通気性を確保しました。



外ベルトなし
外ベルトのないシンプルなデザイン。薬品などが付着したときの清拭もスムーズです。



オーバーラップ式スリット
動きやすいスリット入り。前後が重なり合った仕様とすることで、防護性能を確保しました。



バックスタイル

ダブルサポートベルトの締め方

STEP 1



腰まわりを覆うようにしながら、ダブルサポートベルトを締めます。固定はマジックテープでワンタッチ。

STEP 2



締め付け用ベルトを前方に引っ張り、マジックテープで固定します。

STEP 3



着用完了。ダブルサポートベルトが優れたコルセット効果を生み出します。



ダブルサポートベルト

ベルト位置の高さ調整が可能です。
着用する方の腰の高さに合わせてご使用ください。

ULN ウルトラライト ネックガード

甲状腺から胸元までワイドにカバー。
X線防護衣に重ねて着用すると、防護効果が高まります。
放射線防護用カラー・ウルトラライト ネックガード
(届出番号) 13B3X00005210902



- カラーバリエーション
- クリアグリーン
 - クリアオレンジ
 - クリアピンク
 - クリアブルー

| 鉛当量 | サイズ | 重量 (kg) | 小売希望価格 |
|----------|-----|---------|---------|
| 0.25mmPb | フリー | 0.3 | 21,000円 |
| 0.35mmPb | フリー | 0.4 | 23,000円 |

汗取りシート：10枚付

① ULC ウルトラライト サポートコート

放射線防護用前掛・ウルトラライト エプロン/コート
(届出番号) 13B3X00005210901

| 鉛当量 | サイズ | 幅×丈 (cm) | 胸囲 (cm) | 重量 (kg) | 小売希望価格 |
|----------|-----|----------|---------|---------|----------|
| 0.25mmPb | S | 45×85 | 70~85 | 2.6 | 118,000円 |
| | M | 50×90 | 85~100 | 3.1 | 124,000円 |
| | L | 55×95 | 95~110 | 3.5 | 129,000円 |
| | LL | 60×100 | 105~120 | 3.8 | 140,000円 |
| 0.35mmPb | S | 45×85 | 70~85 | 3.1 | 131,000円 |
| | M | 50×90 | 85~100 | 3.6 | 137,000円 |
| | L | 55×95 | 95~110 | 4.1 | 142,000円 |
| | LL | 60×100 | 105~120 | 4.6 | 153,000円 |

鉛当量

