

移動もできるシャワーチェア

詳しい情報は

HPまで↓



ウーゴくん  
**ウーゴ君**

介護保険  
特定福祉用具購入  
入浴補助用具

**居宅**の  
浴室利用も最適！

**介護施設**での入浴時、こんなお悩みはありませんか!?

- ▶ご利用者を安全・安心・快適に入浴させたい…
- ▶洗い場から浴槽までの少しの距離だけど移動が大変…
- ▶一般的なシャワーキャリーは費用面で手を出しづらい…
- ▶浴室の広さに制限があり、シャワーキャリーは大きすぎる…

これで解消!

シャワーチェアの使い心地を備え、

さらに安全に移動もできる製品

それが

移動もできるシャワーチェア  
**ウーゴ君**

です!



安全に移動できれば…  
少しの距離なんだけど…



居宅の浴室利用にも!



※必ず介助者が付き添いのもとで使用してください

製品改良などにより、仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

SCA-01\_2312\_04

移動もできるシャワーチェア


# ウーゴ君ウーゴくん のココがポイント!!




使い心地の良いシャワーチェアをベースにしたキャスター付き製品。コンパクトサイズのため幅広い浴室環境で使用できます。




座面の高さは3段階の調節ができます。一般的なユニットバスの縁高さに適合するように設計していますので、横付けし移乗がしやすいです。

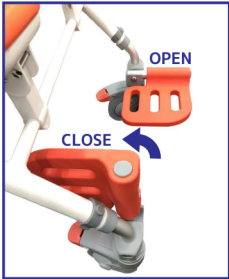


フットレストは開閉収納式。シャワーチェアとしての使用時や、立ち上がりの際に足を妨げません。移動時は足をのせて安全に使用できます。

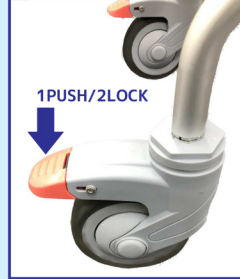

キャスターのストッパーはワンプッシュで2動作同時ロック仕様。車輪の進行と方向転換の回転にロックがかかり安全です。

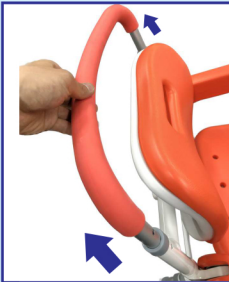

介助者が操作をしやすいようにハンドルの高さは4段階の調節ができます。個々に合わせた操作位置にする事で、負担を軽減します。

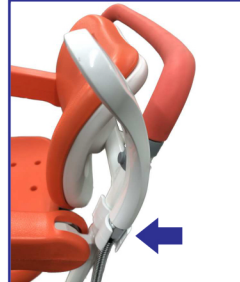

あると便利なシャワーヘッドホルダーを付属。冬場の入浴時にシャワーでご利用者を温めながら洗体などがおこなえます。



背面パッド、座面パッド、アームレストパッド、ハンドルラバーは抗菌・防カビ加工を施しています。



劣化などが発生しやすいパーツはメンテナンス部材としてご用意。継続使用ができるのでコストパフォーマンス効果が見込めます。



## <製品仕様>

品番	SCA-01
カラー	レッドオレンジ
標準小売価格+(税)	
JAN コード	4958519402005
TAIS コード	00093-000064
本体サイズ (座面低設定時)	約 W : 490 × H : 770 × D : 745 (mm)
座面パッドサイズ	約 W : 420 × D : 320 × t : 28 (mm)
重量	約 9.8 (kg)
耐荷重	100kg まで
折りたたみ	可能 (自立不可)
アームレスト/フットレスト	はね上げ可動
キャスターサイズ	Φ100 (mm) 4 インチ × 4 ケ
主な材質	アルミ / ステンレス / EVA / TPE
メンテナンス販売部材	背・座パッド / アームレストパッド / ハンドル / 固定ピン / シャワーヘッドホルダー 左右各前輪用フットレスト付きキャスター / 左右共通後輪用キャスター

ケアメディックス株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-23-1 SKビル 2F

TEL : 03-3837-0551 FAX : 03-3837-0554 HP : <http://www.caremed.co.jp/>

製品改良などにより、仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

SCA-01\_2312\_04\_5000