

High Temperature Data Logger

殺菌/滅菌管理ための高温耐熱温度データロガー

Microw XL

温度データロガーMicrow XL は、本体の耐熱温度が $+140^{\circ}\text{C}$ と高く、高温高圧滅菌器(オートクレーブ)内の温度記録に主に使用されている超小型の温度データロガーです。温度センサと温度記憶部が一体型のため、搬送式加熱置内の温度測定にも対応します。記憶容量は、20,225 メモリーと膨大で長期間の温度測定が可能です。温度センサには、殺菌消毒装置と滅菌処理法に関するEN ISO 285:2006 標準(Point 6.2.1.1)と同等の高精度サーミスタを使用し、分解能 0.01°C 、温度精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ と高精度を実現しています。本体はステンレスSUS 316 製で、酸やアルカリに非常に強く、そのうえ5 気圧耐圧型の完全防水構造IP68 適合です。



主な使用用途

オートクレーブやインキュベーターの温度管理などメディカル・医薬品製造分野、食品全般、医薬品、化学品のプロセス監視など。



滅菌工程の管理に！




食品製造工程の管理に！



使用パソコンと解析ソフト

- Windows 7/8/10
- マイクロプロセッサ Pentium III 400 以上、メモリー128 MB 以上
- CDドライブとUSB ポート
- 時間・温度グラフ表、時間・温度数値表
- 滅菌 Fo 値並びに低温殺菌 Pu 値自動計算表示
- グラフ拡大
- 測定データは Excel 形式で保存可能
- S-Micro XL とパソコンを専用のインターフェイスと通信ケーブルで接続して行いますが、電源の必要ありません。

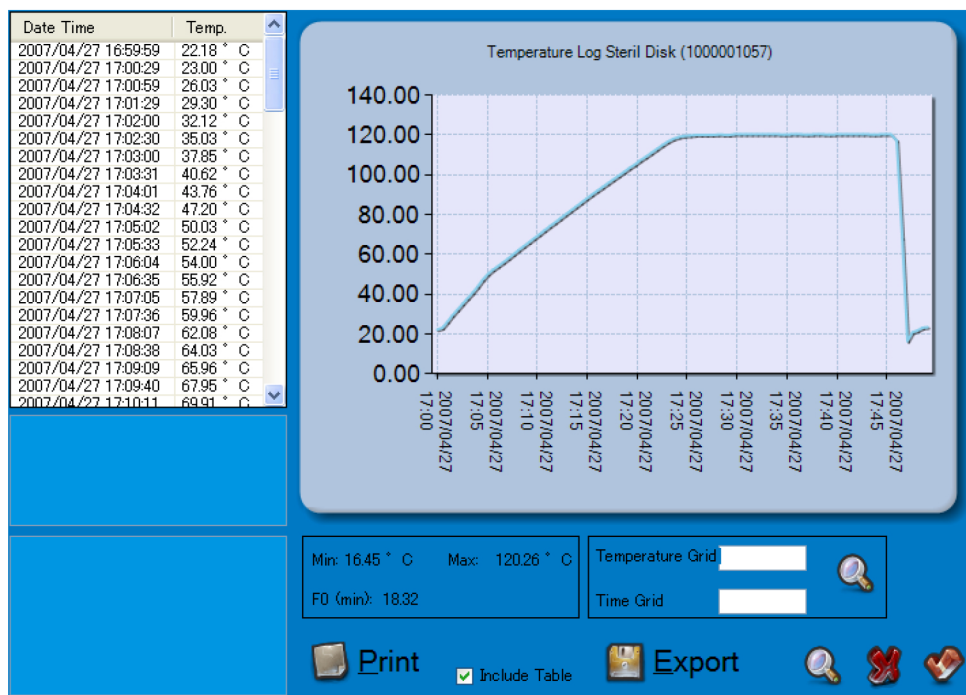

仕様

測定温度範囲	-40~+140°C/-40~+250°C(プローブ長50mm以上)
測定精度	±0.1°C(+25°C~+125°C温度校正範囲内)
分解能	0.01°C
メモリー数	20,225
センサタイプ	高精度サーミスタ
耐圧	5 bar
測定間隔	1 秒~255 分の範囲で自在
電池寿命	1 秒間隔で 17,000,000 回測定 (25°Cにて)
電池交換	簡単に交換可能
本体部サイズ	:直径 17 mm x 長さ 69 mm
センサプローブ	直径 3 x 長さ 20, 60, 100, 150 mm 選択
防水構造	IP68 (完全防水型)

お問合せは下記に;

税込標準価格

MicroW XL	
解析ソフト/インターフェイス等	
1. プローブ長による価格差はありません。	
2. 温度校正は 25, 50, 75, 100, 125 °C の 5 点校正となります。温度校正を実施した場合、測定精度は±0.2°C。	

* オートクレーブのバリデーションのための 21 CFR Part 11 適合ソフトも用意しております。価格に関してはお問い合わせください。

MK Scientific, Inc.
Measuring Knowledge

輸入発売元: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町 1500 番地
Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536
E-mail: sales@mksci.com
Web: https://www.mksci.com

販売代理店: