

High Temperature Data Logger

殺菌/滅菌管理ための高温耐熱温度データロガー

MicroW L

温度データロガー MicroW L は、本体の耐熱温度が+140℃と高く、高温高圧滅菌器(オートクレーブ)内の温度記録に主に使用されている超小型の温度データロガーです。温度センサと温度記憶部が一体型のため、搬送式加熱置内の温度測定にも対応します。記憶容量は、20,225 メモリーと膨大で長期間の温度測定が可能です。温度センサには、殺菌消毒装置と滅菌処理法に関する EN ISO 285:2006 標準 (Point 6.2.1.1) と同等の高精度サーミスタを使用し、分解能 0.01℃、温度精度 ±0.1℃ と高精度を実現しています。本体はステンレス SUS 316 製で、酸やアルカリに非常に強く、そのうえ 5 気圧耐圧型の完全防水構造 IP68 適合です。



主な使用用途

オートクレーブやインキュベーターの温度管理などメディカル・医薬品製造分野、食品全般、医薬品、化学品のプロセス監視など。



滅菌工程の温度管理に！




食品製造工程の温度管理に！



使用パソコンと解析ソフト

- Windows 7/ 9/ 10
- マイクロプロセッサ Pentium III 400 以上、メモリー128 MB 以上
- CDドライブとUSB ポート
- 時間・温度グラフ表、時間・温度数値表
- 滅菌 Fo 値並びに低温殺菌 Pu 値自動計算表示
- グラフ拡大
- 測定データは Excel 形式で保存可能
- S-Micro L とパソコンを専用インターフェイス・USB ケーブルで接続して行いますが、電源の必要ありません。

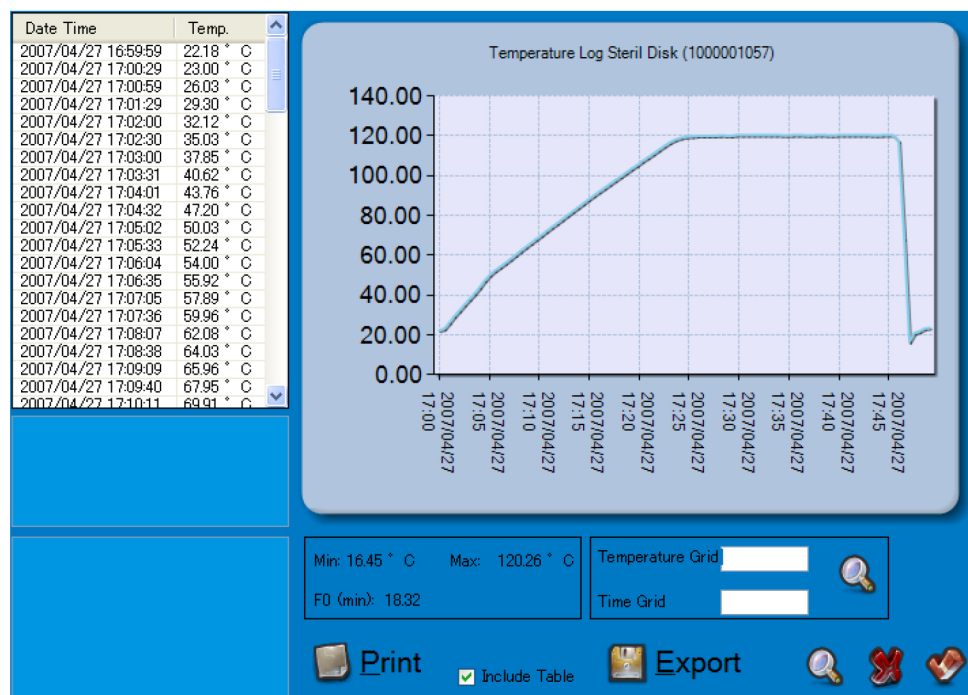

仕様

測定温度範囲	-40～+140℃/-40～+250℃(プローブ長50mm以上)
測定精度	±0.1℃(+25℃～+125℃温度校正範囲内)
分解能	0.01℃
メモリー数	20,225
センサタイプ	高精度サーミスタ
耐圧	5 bar
測定間隔	1 秒～255 分の範囲で自在
電池寿命	1 秒間隔で 100,000,000 回測定 (25℃にて)
使用電池	1/2 AA 耐熱型リチウム電池
電池交換	可能
本体部サイズ	直径 17 mm x 高さ 44 mm
センサプローブ	直径 3 x 長さ 20, 60, 100, 150 mm 選択
防水構造	IP 68 (完全防水構造)

税込標準価格

S-Micro L	
解析ソフト/インターフェイス等	
1. プローブ長による価格差はありません。	
2. 温度校正は 25, 50, 75, 100, 125 °C の 5 点校正となります。温度校正を実施した場合、測定精度は±0.1℃。	

* オートクレーブのバリデーションのための 21 CFR Part 11 適合ソフトも用意しております。価格に関してはお問い合わせください。

お問合せは下記に;

MK Scientific, Inc.

Measuring Knowledge

輸入発売元: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町 1500 番地

Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536

E-mail: sales@mksci.com

Web: <https://www.mksci.com>

販売代理店: