




両面が大小のダイアフラムですので、1本で成人と小児の使い分けができます。

※ダイアフラム(小)は、ナビスちゃんが印刷されています。
※チューブ接続金具に丸い凹みのある側と反対側がアクティブな面です。



小児用のダイアフラム(小)は、付属のカバーリングに変更してベル面にするすることができます。

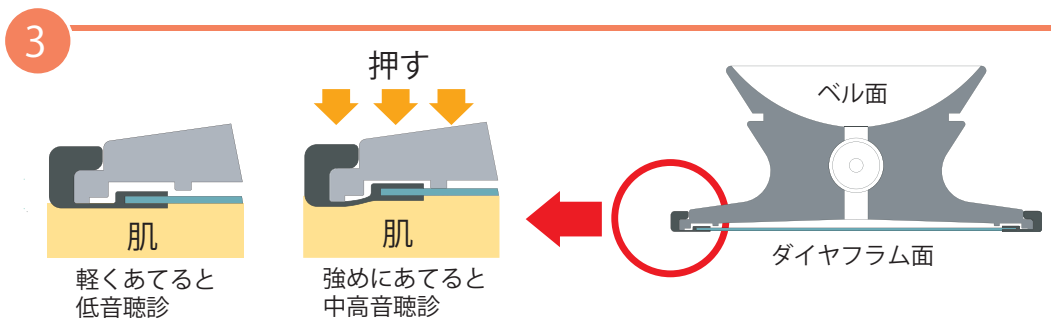

サスペンデッド型ダイアフラムは、皮膚に当てる力の加減で低音と中高音を切り替えて聴診することができます。

※皮膚に軽く当てると低音、強めに当てると中高音を聴診できます。

